

Co2 fractional laser vaginal tightening

You change that surprised them

- Easily remove stains
- Remove acne marks
- Shrink pores, tender skin.
- Tattoo removal





Collagen contraction and remodeling



Pigmentation removal



Skin tightening

up

Forehead

Eyelid / Brow

Nasolabial folds

Cheek

Double chin

Glabellum

Front face

Neck

down



Vaginal tightening



Scar removal



Stretch mark removal

SKIN RECONSTRUCTION



Five therapeutic heads

Equipped with scanning head * 1 / cutting head * 1 / private head * 3

• Scanning head efficacy

Tender skin/shrink pores/remove striae gravidarum and chloasma

• Cutting head efficacy

Removing sarcoma / nevus

• Efficacy of private head


Tighten vagina / tender vulva / tender vulva



• Trachea



Adjustable dot shape and size

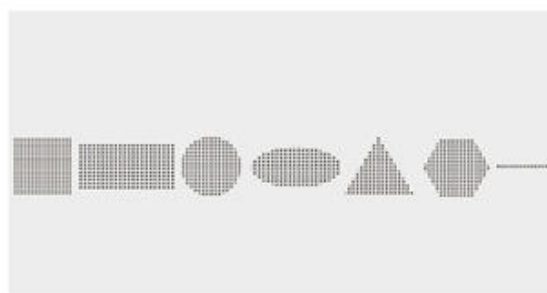

Shape display

Informacje o produkcie

Funkcja lasera frakcyjnego CO2:

1. Laserowa operacja resurfacingu
2. Laserowa operacja usuwania zmarszczek
3. Operacja laserowego usuwania blizn
4. Laserowa plastyka powiek
5. Inne zastosowania: usuwanie znamion barwnikowych, ostudy, piegów, pigmentów wieku, brodawek, rogowacenia łojotokowego, syringoma, acnes, prosaków, rozstępów gravidarum; Skurcz porów; Napinanie skóry; Laserowy przeszczep włosów; Laserowe powiększanie piersi itp.



CO2 FRACTIONAL LASER

CLEARLY DIFFERENT

BENEFITS



Shortest Pulse Duration,
Enabling High Peak Power



Improved ROI with Excellent Results in
Fewer Treatments



Unique Double Pulse Mode



Versatile Platform Enabling Multiple
Patient-Tailored Treatment Options



Supreme Feature-Set




Suitable for All Skin Types

Work Theory


It concentrated thermal heating of the vaginal tissue inner layers induces collagen and elastine contraction and regeneration of these proteins in the longer term. These molecular signal activate the entire wound healing process of the body's local immune system. The treatment outcome is the complete remodeling of the vaginal tissue in addition to re-establishment of firm "young like" vaginal tissue embedded with string-like, thick and long collagen fibers.



1. Laser irradiation angle can be adjusted

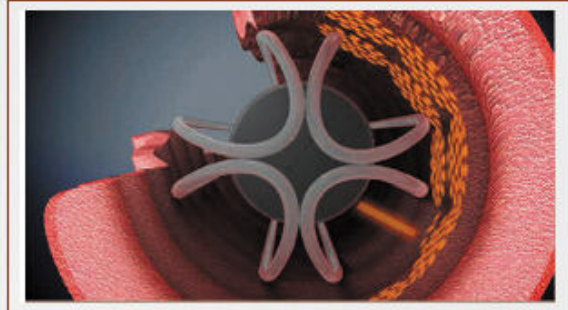

2. Laser irradiation can be rotated 360 degrees

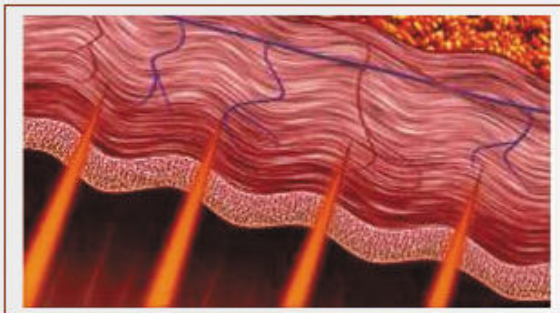


3. The area of the laser is compact edge contraction



4. vaginal walls shrink and tightening

WORKING PRINCIPLE

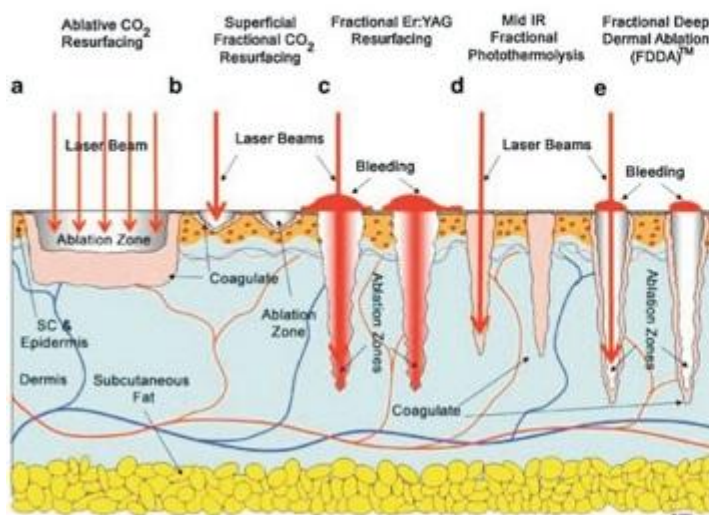

The CO2 laser uses a unique head piece which tracks the CO2 10.6 μm wavelength light as it passes light through its optical lens to penetrate the skin. We can control the depth of the penetration from only a few micrometers in depth (only as deep as a few sheets of paper) to much deeper with tiny thermal channels. This will also determine the length of healing, the number of treatments and the cost. Each thermal channel creates a small micro-injury but does not significantly disturb or disrupt the surrounding tissue.

Treatment effect comparison



Acne Scars



Burn Scars



Hypertrophic Scars




Surgery Scars



Chicken Pox Scars



Accident Scars

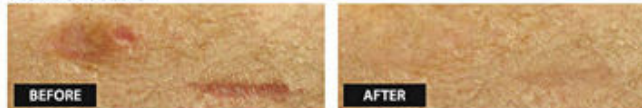

Wyświetlacz

Prawdziwy ekran dotykowy o przekątnej 10,4 cala, 6 rodzajów skóry do wyboru. * Duży ekran dotykowy o przekątnej 10,4 cala w prawdziwym kolorze



* Super fajne wrażenia dotykowe

* 6 języków do wyboru, można dodać specjalny język

* Akceptowane są usługi OEM, takie jak dostosowanie parametru, w tym energia/częstotliwość/szerokość impulsu

* 12 typów wzorów wyjściowych

SCREEN IMAGE

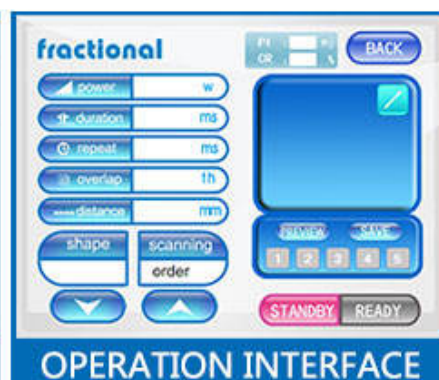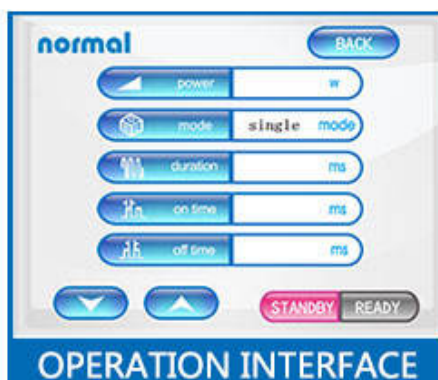

Typ lasera

Długość fali lasera

Moc lasera

System oświetlenia

Laser frakcyjny dwutlenku węgla

1060nm

do 40W (opcjonalnie)

7 wspólnych ramion

Czas trwania impulsu	100-5000 us
Facula	tryb pojedynczy
Skupiona średnica wiązki	0,25 mm
Obszar ogniskowy	0,05mm ²
Formularz wyjściowy	Ultrapulsowy, ułamkowy
Tryb pracy	Przerywane ładowanie
Tryb skanowania	Sekwencja, losowa, równoległa (przełączana)
Skanowanie kształtów	Trójkąt/kwadrat/prostokąt/okrągły/owalny/sześciokątny/liniowy
Obszar diagramu	≤20mm*20mm
Interfejs kolorowy ekran dotykowy	10.4 cala
System chłodniczy	Chłodzenie powietrzem, chłodzenie wodą
Moc wejściowa	AC 230V±10%, 50HZ/ AC 110V±10% 60HZ
Rozmiar plamki	≥0,2 mm w ognisku
Czas napromieniowania / Czas interwału	0,01 1 s
Wiązka celownicza	Promień podczerwony 635nm
Zasilacz	110/220V10% 60Hz 6A


U.S. FOOD & DRUG
ADMINISTRATION

Follow FDA | En Español

SEARCH

[Home](#) | [Food](#) | [Drugs](#) | [Medical Devices](#) | [Radiation-Emitting Products](#) | [Vaccines, Blood & Biologics](#) | [Animal & Veterinary](#) | [Cosmetics](#) | [Tobacco Products](#)

510(k) Premarket Notification

[FDA Home](#) | [Medical Devices](#) | [Databases](#)


[510\(k\)](#) | [DeNovo](#) | [Registration & Listing](#) | [Adverse Events](#) | [Recalls](#) | [PMA](#) | [HDE](#) | [Classification](#) | [Standards](#)
[CFR Title 21](#) | [Radiation-Emitting Products](#) | [X-Ray Assembler](#) | [Medsun Reports](#) | [CLIA](#) | [TPLC](#)

[New Search](#)
[Back To Search Results](#)

Device Classification Name	Powered Laser Surgical Instrument
510(K) Number	K200525
Device Name	Medical Diode Laser Hair Removal System
Applicant	Weifang Mingliang Electronics CO., LTD No.13426, Yuqing Street, High-tech District Weifang, CN 261000
Applicant Contact	Li Mingliang
Correspondent	Beijing Believe-Med Technology Service Co., Ltd. Rm. 912, Building#15, XiYueHui, No.5, YiHe North Rd., FangShan District Beijing, CN 102401
Correspondent Contact	Ray Wang
Regulation Number	879.4810
Classification Product Code	GEX
Date Received	03/02/2020
Decision Date	05/27/2020
Decision	Substantially Equivalent (SESE)
Regulation Medical Specialty	General & Plastic Surgery
510k Review Panel	General & Plastic Surgery
Type	Traditional
Reviewed By Third Party	No
Combination Product	No

CERTIFICATE

Display

Medical CE FDA IOS TUV



We can offer the door to door services by air or by sea just depend on your actual request. Such as DHL, UPS, TNT, FEDEX.

