



Multifunktionaler Elight IPL-Diodenlaser 808 nm Haarentfernung und Yag-Tattoo-Entfernung mit HF

Modell	Elight808nm DiodenlaserND-YAG-LaserRF
--------	---------------------------------------

Anwendung	1)Haarentfernung, Sommersprossenentfernung 2)Hautverjüngung 3) Pigmentierungsbehandlung 4) Falten beseitigen 5) Akne-Beseitigung 6) Entfernung der Augenlinie 7) Entfernung von Augenbrauenstickereien 8) Tattoorentfernung 9) Entfernung von Sommersprossen
Lichtquelle	Intensives gepulstes Licht
Handstück	Ein Elight-Griff Ein 808-nm-Diodenlasergriff Ein Nd-Yag-Lasergriff und ein RF-Griff
Wellenlänge	IPL:420/510/690~1200NM (IPL-Standard) 585/640/755~1200 nm (optional) SHR:640-690NM
Impulsverzögerungszeit	1~50ms
Geläufigkeit	2~15ms
Bildschirm	8,4-Zoll-Farb-Touchscreen
Punktgröße	12x20mm, 12x35mm, 15x50mm
Gütesgeschalteter Nd	ND: YAG-Laser
Wellenlänge	1064, 532 und 1320 nm
Pulsenergie	0-800 mJ 0-300 mJ
Energie von SHR	1-50J
Kühlsystem	Luft- und Kühlwasserzirkulation, Behandlungskopf mit Halbleiterkühlung, Temperatur einstellbar
Leistung	1600-3000 W
Elektrische Quelle	-4-----0
Verpackungsmethode	Aluminiumverpackung
Verpackungsmethode	Aluminiumverpackung

Multifunktionaler IPL-Diodenlaser mit 808 nm Haarentfernung und Yag-Tattoo-Entfernung

808-nm-Diodenlaser-Handgerät für superschnelle Haarentfernung

E-Light-Griff (IPLRF). zur Hautverjüngung, Hautstraffung, Haarentfernung, Hautpflege usw.

und YAG-Lasergriff zur Entfernung von Tätowierungen, Augenlinien usw

HF-Kopf für Gesichts- und Körperabnehmen, Hautverjüngung usw.

Advantage

- **Diode laser handle**

Painless hair removal, Permanent hair removal,
Suitable for all skin tones.

- **Elight handle**

Elight for hair removal ,skin rejuvenation,vascular
therapy ,pigmentation therapy,acne therapy.

- **ND YAG Laser handle**

ND Yag laser for tattoo removal, eyeline remova,
eyebrow ,embroidery removal. freckle removal.

- **RF handle**

Skin tightening/lifting, wrinkle removal on bod




DIODE LASER

755/808/1064nm diode laser, for all type skin hair removal, painless

755 NM

The Power of
Diversity

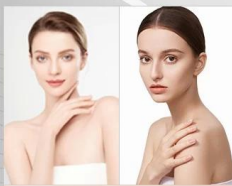

755nm

808 NM

Up To Speed



808nm

1064 NM

Dedicated to Darker
Skin



1064nm





One minute cooling

Suitable for hair removal on any part of the body



Arms



Legs



Face



Armpits



Back



Chest




How does it work

E-light IPL for Hair removal/Skin rejuvenation/Vascular Job/Pigmentation treatment/Acne clearance

Face and body with big and small treatment head.

Through the scientific design of diode laser handle, the high-energy laser beam instantly penetrates the skin and reaches the hair follicle during treatment, output light is absorbed by melanin in the hair follicle, so destroying the hair follicle and reach permanent hair removal. The laser pulse width is set shorter than the time that human body's feeling time, a single shot of light is over, but the human body felt painless, then could achieve the painless treatment feeling, to improve the customer's comfortable experience

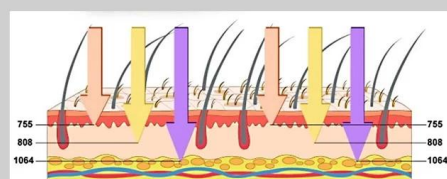

Refuse To Repeat And Leave No Scum



1 week-2 weeks
(2 times a week)

75% hair loss
Start to grow slowly
Smaller pores

3 week-4 weeks
(2 times a week)

Hair becomes thinner and
less
Rejuvenate tender
skin
Smooth body

5 week-8 weeks
(2 times a week)

Select according to hair
growth status
Use it
selectively say goodbye
Repeated hair removal

IPL Handle

© **High-quality IPL**

Handpiece with super cooling system

© **Optional Spot Size**

15*50mm, 15*35mm, 12*30mm

© **Long shots time**

IPL: 150,000 times

© **7 filters**

420/510/560/585/640/690/755nm

Standard: 420/510/560/690nm



420nm

Acne removal
Vascular
treatment

510nm

Pigmentation
therapy, Remove
freckles

560nm

Skin
rejuvenation
wrinkle removal

585nm

Remove Red
blood silk

640nm

Hair removal
(light skin)

690nm

Hair removal
(brown skin)

755nm

Hair removal
(black skin)





ND YAG

5 Treatment Heads

532: Remove colored tattoos.

755 honeycomb head: used to remove age spots, freckles, and chloasma, little damage to skin

Adjustable parameter 1064: for tattoo removal, eyebrow clearing
Non-adjustable parameter 1064: used for removing tattoos and clearing eyebrows

1320: large area treatment, large spot, fast treatment speed and good effect



1064nm
(Size Optional)



532nm
(Original)



1320nm
(Blackface doll)



755nm
(Honeycomb)



1064nm
(Original)


ND YAG ADUANTAGE

Imported crystal bonding laser rod, best quality , shot more than 1.5 million times

Counter on the handle, more easy to get the total shot time


LED red indicator, more easy to aim on the treatment area.

5 treatment tips for multi fuctions: tattoo removal, skin rejuvenation, pigment removal, carbon peeling....

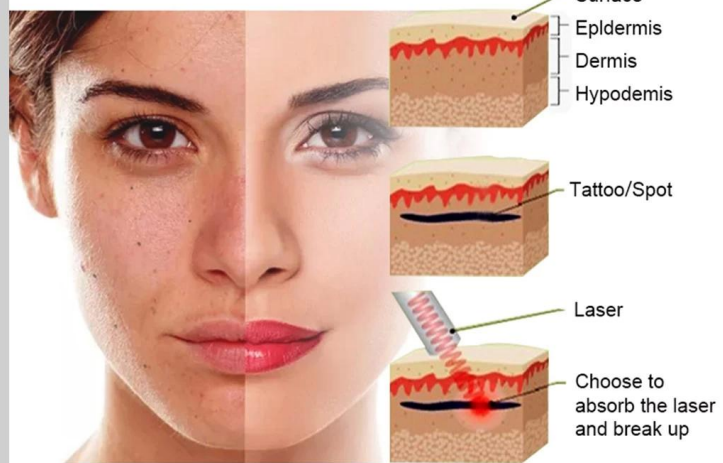

RF Handle

Suitable to 6 kinds of therapy area, to make sure the treatment on the corner of eye, and other area on face.

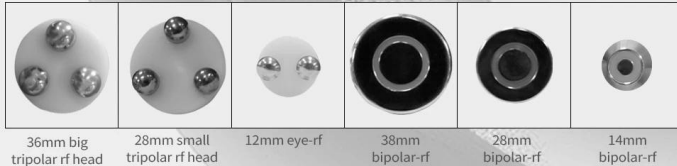

Multifunktionaler IPL-Diodenlaser mit 808 nm Haarentfernung und Yag-Tattoo-Entfernung

14-Zoll-Farb-Touchscreen, Männer- und Frauenhaut, 6 Sprachen zur Auswahl.

Ihre Sprache und Ihr Logo können frei hinzugefügt werden.

14 inch true color touch screen

Professional Screen, Easy operation



Lieferzeit: 3-5 Werktage nach Zahlungseingang.

Zahlungsbedingungen: T/T (Banküberweisung), Western Union

Garantie: 2 Jahre für die gesamte Maschine, 1 Jahr für den Griff

Versandart: Tür-zu-Tür-Service auf dem Luftweg, DHL/UPS/TNT

Verpackung: Aluminiumbox mit Hartschaum

Packing

safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,
one-year warranty.

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)
Can Keep You Operate It Easily.



3-5 business days delivery

Professional guide:

24 Hours Professional online customer service,