



Laser luxe

Powerful

fastly


Safety

Kurzpuls laser: Dauer \leq Nanosekunden (10^{-6} Sekunden)

[Bester Laser zur Tattoorentfernung](#)

Merkmale:

- Unter Verwendung des mechanischen Schalldruck-Strahleffekts von Licht ist eine einzelne Emissionsdauer kurz, hochenergetisch und leistungsstark;
- Die Impulsbreite ist im Allgemeinen nicht einstellbar.
- Kurze Impulse werden durch die Q-Switching-Technologie realisiert

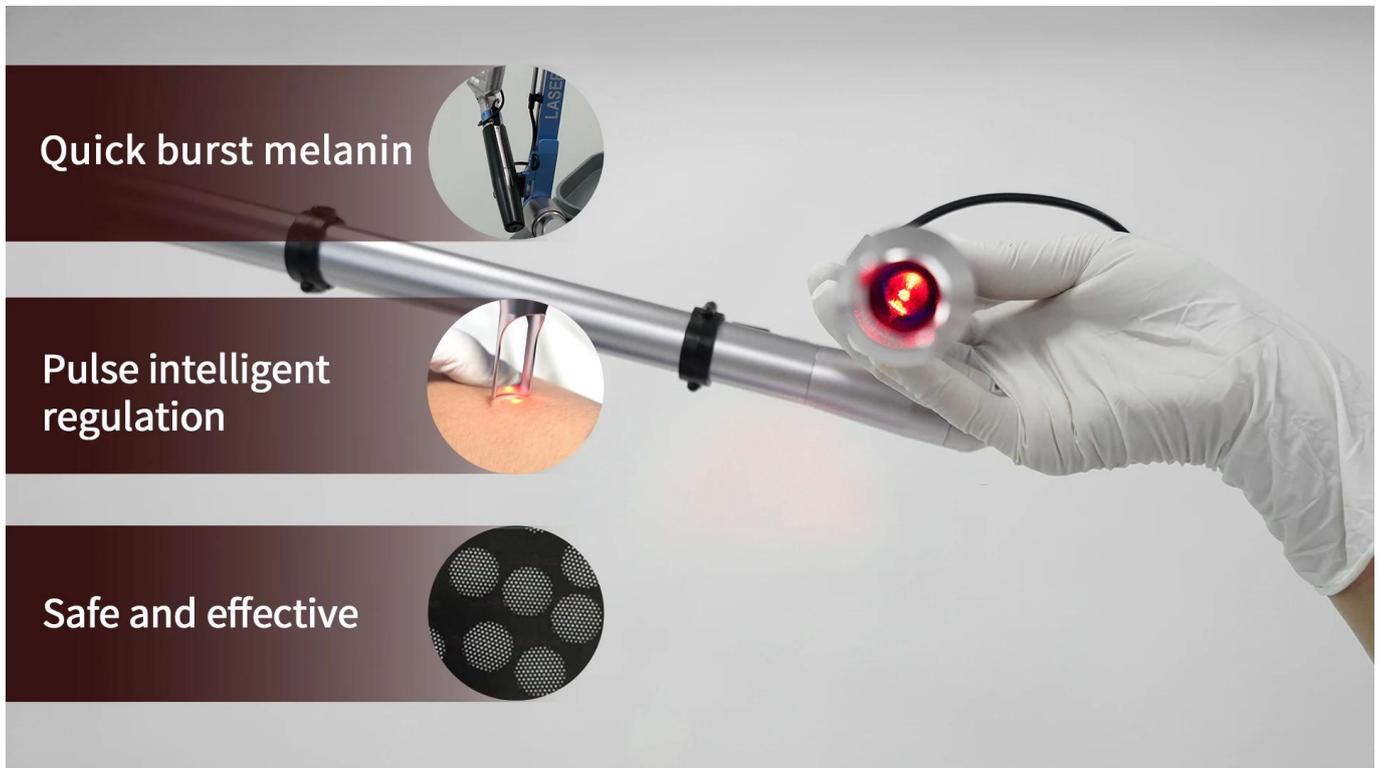

Produktinformation

Light guide arm imported from South Korea

- **Life can reach 5 million times**

Long service life, up to 5 million exposures, to better meet customer needs.

- **Aluminum**

Equipped with high-quality aluminum light guide arm, quality is guaranteed

- **Counterweight**

The light guide arm adopts a counterweight design, which makes the operation more flexible and convenient



Mit 7 Führungslichtarmen ist das Licht symmetrischer! Die Energiedichte (J/cm^2) ist der entscheidende Parameter der gütegeschalteten Lasertherapie. Gütegeschaltete Laser können die Impulsbreite normalerweise nicht anpassen und den gleichen Lichtenergiewert (mJ) einstellen. Je kleiner der Wirkungsbereich (je kleiner der Punktdurchmesser), desto größer die Energiedichte und desto intensiver die Hautreaktion. was die Bedeutung von „fokussieren“ ist

Über Griff

Product advantage

⬆ Fast and scar-less

⬆ imported 7 joint articulated arm
360 treatment without dead angle
and ensure the highest energy output
minimum energy loss during laser
transmission.

⬆ The combination different laser pulse
durations, provide an optimal method
for shattering all sizes of pigment
particles.

⬆ Spots no longer appear

⬆ 2-10mm adjustable spot size
Different treatment areas are applicable
Energy density is automatically
adjusted with spot size.

Behandlungseffekt


Merkmale: 1. Hohe Leistung: Das Ruby-Lasersystem verfügt über eine hohe Energieabgabe und eine hohe Leistungsdichte und ermöglicht so eine schnelle und effektive Operation und Behandlung. 2. Sicherheit: Das System nutzt fortschrittliche Lasertechnologie, um die Tiefe und Intensität des Laserstrahls genau zu steuern und so Schäden am umgebenden Gewebe zu minimieren. 3. Multifunktional: Das Ruby-Lasersystem kann für eine Vielzahl von Operationen und Behandlungen verwendet werden, einschließlich Hautentfernung, Behandlung von Gefäßerkrankungen, Narbenreparatur usw. 4. Hohe Präzision: Das System verfügt über hochpräzise Laserstrahlpositionierungs- und Steuerfunktionen. kann das Zielgewebe genau handhaben, die Erfolgsrate der Operation und den Behandlungseffekt verbessern. 5. Portabilität: Das Ruby-Lasersystem verfügt über ein kompaktes Design, ist leicht zu transportieren und zu bewegen und eignet sich für verschiedene klinische Umgebungen.

TECHNICAL PRINCIPLE



Traditional laser

Traditional nanosecond lasers predominately rely on photothermal action, delivering heat to the pigment and surrounding tissue

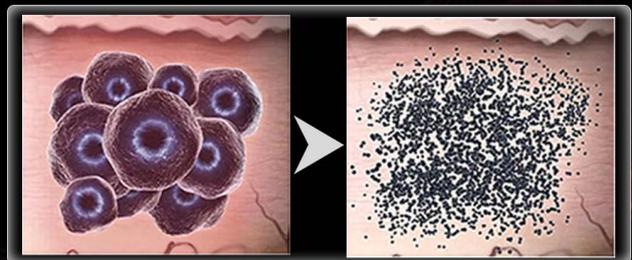

Laser luxe

Laser luxe takes advantage of Pressure Wave Technology to shatter the target ink into tiny particles that are easily

755 Wellenlänge, die zum Aufhellen und Vergilben verwendet wird, entfernt Staupigmente schnell und stellt Ihre weiße Haut problemlos wieder her. Der 532-nm-Pikosekundenlaser hat die beste Wirkung bei gelben Tätowierungen, gefolgt von roten Tätowierungen. Der 1064-nm-Pikosekundenlaser eignet sich am besten für schwarze Tätowierungen. Die Wellenlänge 532 wird zur Behandlung epidermaler Flecken wie Sommersprossen, Kaffeelecken, Lichtalterungsflecken, Akneflecken und Falten sowie roter und gelber Tätowierungen verwendet. 1064 zur Behandlung von Hautflecken wie braunen Cyanmolen, Otamolen, Chloasma, Pigmentierung, Aufhellung und Aufhellung zur Entfernung gelber, schwarzer und blauer Tätowierungen, kann gewaschen werden, zur Behandlung von Akne, zur Porenverkleinerung und zur Straffung der Haut, um den Effekt zu erzielen der Hautverjüngung.

Before & After



Before

After



Before

After



Before

After



Before

After



Before

After



Before

After

Parameters Table

Device Name	Laser luxe
Wavelength	1064nm 755nm 532nm
Screen Size	12 inch 4K Style touch screen
Pulse Duration	~7ns@1064nm ~6.5ns@532nm
Frequency	1-10hz
Spot size	2-10mm adjustable
Energy	1064/1000mj 755/1000mj 532/1000mj
Beam of light transmission	7 articular-arm of light guide transmitting
Indicator of aiming light	650 red diode laser
Cooling	Water cooling+Air cooling
Voltage	AC220V/110V 50HZ/60HZ
Demension of machine	93.6*92.7*39cm
Package	Aluminum box
Warranty	2 years



Zubehör für Hautaufhellungs-Pikosekundenlaser Q-geschaltete Nd-Yag-Laser-Tätowierungsentfernungsmaschine: Darüber hinaus verfügen wir über verschiedene Zubehörteile, um unseren Kunden einen hervorragenden Service zu bieten.
Laser-Q-geschalteter Nanosekunden-Kurzimpuls 755 532 1064 Gefäßtherapie-Narbenreparatur-Pikosekunden-Laser-Tätowierungsentfernungsmaschine





You'll get

Six value-added services

One-stop after-sales solution



2 years machine warranty
1 year for handle



Free enterprise training



Test **videos** and **pictures** about the machine



A professional **training service**
training files
training videos



Customized logos, posters and promotional videos, put the logo on screen system



Parcel **tracking service**
Help to do Customs clearance

Nach Dienst:

*Angesichts der großen Entfernung zwischen uns und unseren Kunden und um unsere Kunden viel besser bedienen zu können, *stellt unser Unternehmen ein professionelles Technologie-After-Service-Team auf.

*Unser Techniker wird für jedes Maschinenproblem zeitnah eine Lösung finden und die Dokumente innerhalb von 24 Stunden für Sie vorbereiten.

*Sie können uns auch telefonisch, online usw. kontaktieren.

Erfahren Sie mehr über Produktinformationen und Beauty-Wissen. Gerne können Sie uns konsultieren!

7*24 Stunden Online-Service!