



Eliminación multifuncional de tatuajes nd yag con láser de diodo elight ipl 808nm con rf

Modelo	Elightláser de diodo de 808nmláser nd yagRF
Solicitud	1)Depilación, eliminación de pecas. 2) Rejuvenecimiento de la piel 3)Tratamiento de pigmentación 4)Eliminar las arrugas 5) Eliminación del acné 6) Eliminación del contorno de ojos 7) Eliminación del bordado de cejas 8) Eliminación de tatuajes 9) Eliminación de pecas

Fuente de luz	Luz Pulsada Intensa
pieza de mano	Un mango Elight Un mango láser de diodo de 808 nm Un mango láser nd yag y un mango RF
Longitud de onda	IPL: 420/510/690~1200NM (estándar IPL) 585/640/755~1200nm (opcional) SHR: 640-690 NM
Tiempo de retardo del pulso	1~50ms
Fluidez	2~15ms
Pantalla	Pantalla táctil a color de 8,4 pulgadas
Tamaño del punto	12x20mm, 12x35mm, 15x50mm
Nd conmutado Q	Láser ND:YAG
Longitud de onda	1064 y 532 y 1320 nm
Energía de pulso	0-800mj 0-300mj
Energía de SHR	1-50J
Sistema de refrigeración	Circulación de aire y agua fría, cabezal de tratamiento con temperatura de enfriamiento de semiconductores ajustable
Fuerza	1600-3000W
fuentes electrica	-4-----0
Método de embalaje	Embalaje de aluminio
Método de embalaje	Embalaje de aluminio

Láser de diodo elight ipl multifuncional, depilación de 808nm, eliminación de tatuajes nd yag

Mango láser de diodo de 808 nm. para una depilación súper rápida

Mango de luz electrónica (IPLRF) Para rejuvenecimiento de la piel, estiramiento de la piel, eliminación de acné, depilación y cuidado de la piel, etc.

mango láser nd yag Para eliminación de tatuajes, eliminación de líneas de ojos, etc.

cabeza de rf para adelgazamiento facial y corporal, rejuvenecimiento de la piel, etc.

Advantage

- **Diode laser handle**

Painless hair removal, Permanent hair removal,
Suitable for all skin tones.

- **Elight handle**

Elight for hair removal ,skin rejuvenation,vascular
therapy ,pigmentation therapy,acne therapy.

- **ND YAG Laser handle**

ND Yag laser for tattoo removal, eyeliner removal,
eyebrow ,embroidery removal. freckle removal.

- **RF handle**

Skin tightening/lifting, wrinkle removal on bod




DIODE LASER

755/808/1064nm diode laser, for all type skin hair removal, painless

755 NM

The Power of
Diversity

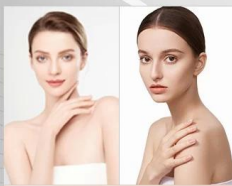

755nm

808 NM

Up To Speed



808nm

1064 NM

Dedicated to Darker
Skin



1064nm





One minute cooling

Suitable for hair removal on any part of the body



Arms



Legs



Face



Armpits



Back



Chest




How does it work

E-light IPL for Hair removal/Skin rejuvenation/Vascular Job/Pigmentation treatment/Acne clearance

Face and body with big and small treatment head.

Through the scientific design of diode laser handle, the high-energy laser beam instantly penetrates the skin and reaches the hair follicle during treatment, output light is absorbed by melanin in the hair follicle, so destroying the hair follicle and reach permanent hair removal. The laser pulse width is set shorter than the time that human body's feeling time, a single shot of light is over, but the human body felt painless, then could achieve the painless treatment feeling, to improve the customer's comfortable experience

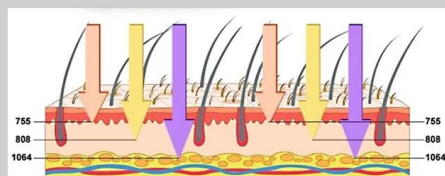

Refuse To Repeat And Leave No Scum



1 week-2 weeks (2 times a week)	3 week-4 weeks (2 times a week)	5 week-8 weeks (2 times a week)
75% hair loss	Hair becomes thinner and less	Select according to hair
Start to grow slowly	Rejuvenate tender skin	growth status Use it
Smaller pores	Smooth body	selectively say goodbye
		Repeated hair removal

IPL Handle

© **High-quality IPL**

Handpiece with super cooling system

© **Optional Spot Size**

15*50mm, 15*35mm, 12*30mm

© **Long shots time**

IPL: 150,000 times

© **7 filters**

420/510/560/585/640/690/755nm

Standard: 420/510/560/690nm



420nm

Acne removal
Vascular
treatment

510nm

Pigmentation
therapy, Remove
freckles

560nm

Skin
rejuvenation
wrinkle removal

585nm

Remove Red
blood silk

640nm

Hair removal
(light skin)

690nm

Hair removal
(brown skin)

755nm

Hair removal
(black skin)





ND YAG

5 Treatment Heads

532: Remove colored tattoos.

755 honeycomb head: used to remove age spots, freckles, and chloasma, little damage to skin

Adjustable parameter 1064: for tattoo removal, eyebrow clearing
Non-adjustable parameter 1064: used for removing tattoos and clearing eyebrows

1320: large area treatment, large spot, fast treatment speed and good effect



1064nm
(Size Optional)



532nm
(Original)



1320nm
(Blackface doll)



755nm
(Honeycomb)



1064nm
(Original)


ND YAG ADUANTAGE

Imported crystal bonding laser rod, best quality , shot more than 1.5 million times

Counter on the handle, more easy to get the total shot time


LED red indicator, more easy to aim on the treatment area.

5 treatment tips for multi fuctions: tattoo removal, skin rejuvenation, pigment removal, carbon peeling....

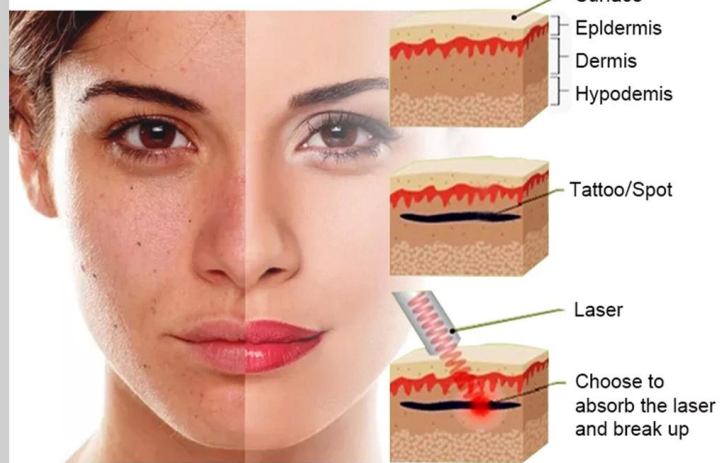

RF Handle

Suitable to 6 kinds of therapy area, to make sure the treatment on the corner of eye, and other area on face.

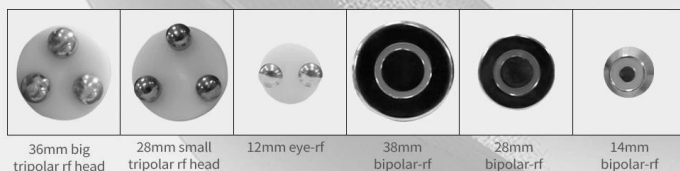

Láser de diodo elight ipl multifuncional, depilación de 808nm, eliminación de tatuajes nd yag

Pantalla táctil a color de 14 pulgadas, piel de hombre y mujer, 6 idiomas a elegir.

Su idioma y logotipo se pueden agregar libremente.

14 inch true color touch screen

Professional Screen, Easy operation



Tiempo de entrega: 3-5 días hábiles después de recibir el pago.

Condiciones de pago: T/T (transferencia bancaria), Western Union

Garantía: 2 años para toda la máquina, 1 año para el mango

Forma de envío: Servicio puerta a puerta por vía aérea, DHL/UPS/TNT

Paquete: Caja de aluminio con espuma dura.

Packing

safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,
one-year warranty.

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)
Can Keep You Operate It Easily.



3-5 business days delivery

Professional guide:

24 Hours Professional online customer service,