




Láser de pulso corto: duración $\leq$ nanosegundos ($10e-6$ segundos)

[El mejor láser para eliminar tatuajes.](#)

Características:

- ☐ Utilizando el efecto mecánico de explosión de presión sonora de la luz, una única duración de emisión es corta, alta energía y potencia máxima;
- ☐ El ancho del pulso generalmente no es ajustable;
- ☐ El pulso corto se realiza mediante tecnología de conmutación Q

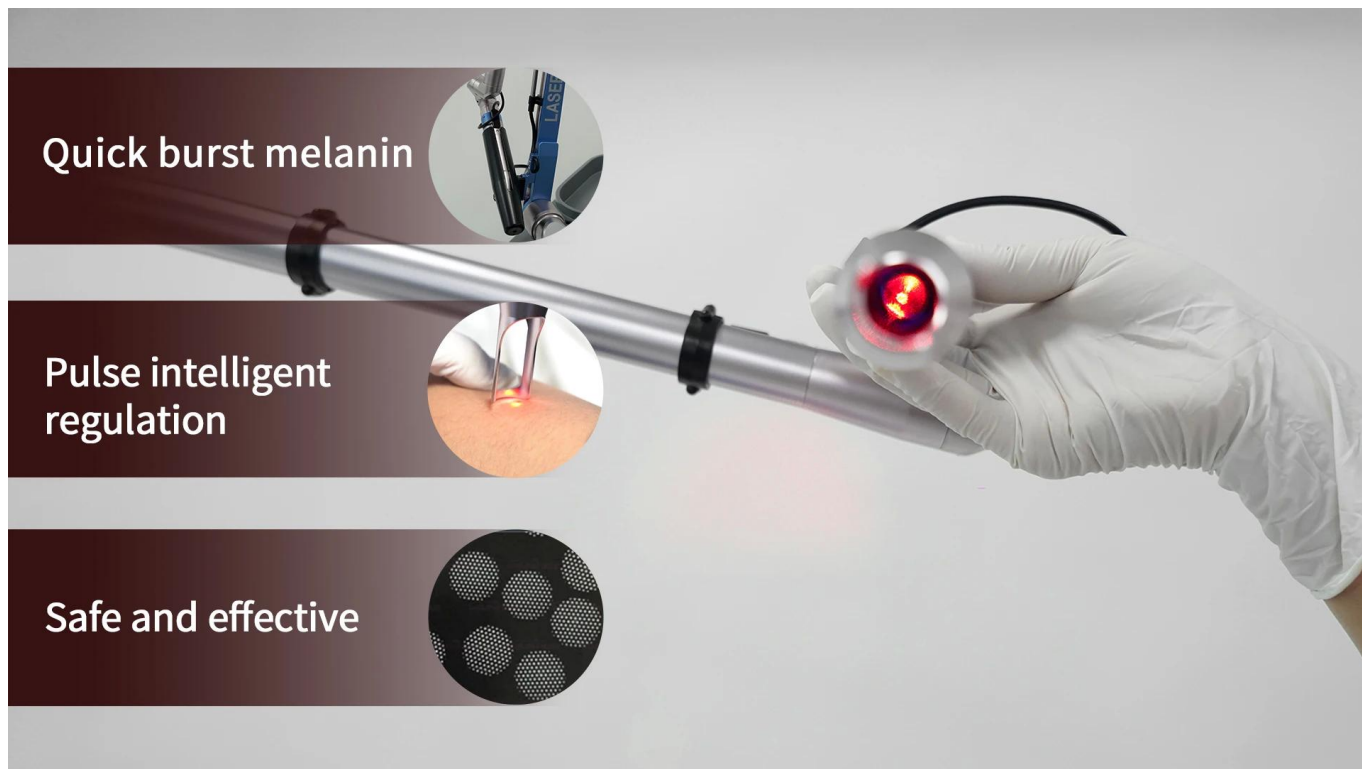

Información del Producto

Light guide arm imported from South Korea

- **Life can reach 5 million times**

Long service life, up to 5 million exposures, to better meet customer needs.

- **Aluminum**

Equipped with high-quality aluminum light guide arm, quality is guaranteed

- **Counterweight**

The light guide arm adopts a counterweight design, which makes the operation more flexible and convenient



¡Con 7 brazos de luz guía, la luz es más simétrica! La densidad de energía (J/cm^2) es el parámetro decisivo de la terapia con láser Q-switched. El láser Q-switched generalmente no puede ajustar el ancho del pulso, establecer el mismo valor de energía luminosa (mJ), si cuanto menor es el área de acción (cuanto menor es el diámetro del punto), mayor es la densidad de energía, más intensa es la reacción de la piel. ¿Cuál es el significado de "enfocar"?

Acerca del mango

Product advantage

⬆ Fast and scar-less

⬆ imported 7 joint articulated arm
360 treatment without dead angle
and ensure the highest energy output
minimum energy loss during laser
transmission.

⬆ The combination different laser pulse
durations, Provide an optimal method
for shattering all sizes of pigment
particles.


⬆ Spots no longer appear

⬆ 2-10mm adjustable spot size
Different treatment areas are applicable
Energy density is automatically
adjusted with spot size.

Efecto del tratamiento

Características: 1. Alto rendimiento: el sistema láser Ruby tiene una alta producción de energía y una alta densidad de potencia, lo que permite una cirugía y un tratamiento rápidos y eficaces. 2. Seguridad: El sistema utiliza tecnología láser avanzada para controlar con precisión la profundidad y la intensidad del rayo láser, minimizando el daño al tejido circundante. 3. Multifuncional: el sistema láser Ruby se puede utilizar para una variedad de cirugías y tratamientos, incluida la eliminación de la piel, el tratamiento de enfermedades vasculares, la reparación de cicatrices, etc. 4. Alta precisión: el sistema tiene funciones de control y posicionamiento del rayo láser de alta precisión, Puede manejar con precisión el tejido objetivo, mejorar la tasa de éxito de la cirugía y el efecto del tratamiento. 5. Portabilidad: El sistema Ruby Laser adopta un diseño compacto, fácil de transportar y mover, adecuado para diferentes entornos clínicos.

TECHNICAL PRINCIPLE

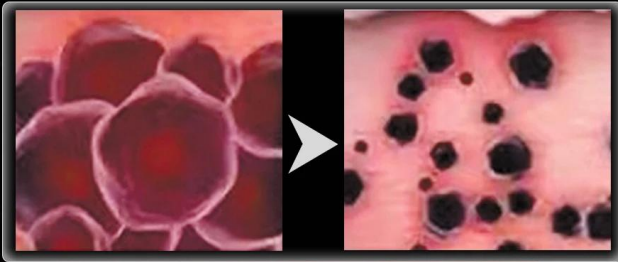

Traditional laser

Traditional nanosecond lasers predominately rely on photothermal action, delivering heat to the pigment and surrounding tissue




Laser luxe

Laser luxe takes advantage of Pressure Wave Technology to shatter the target ink into tiny particles that are easily

La longitud de onda 755 se utiliza para blanquear y amarillear, elimina rápidamente los pigmentos del polvo y restaura fácilmente la piel blanca. El láser de picosegundos de 532 nm tiene el mejor efecto en los tatuajes amarillos, seguidos de los tatuajes rojos. El láser de picosegundos de 1064 nm funciona mejor para tatuajes negros. 532 Wavelength se utiliza para tratar manchas epidérmicas como pecas, manchas de café, manchas de fotoenvejecimiento, marcas de acné y arrugas, así como tatuajes rojos y amarillos. 1064 se usa para tratar manchas dérmicas como cianmoles marrones, otamoles, cloasma, pigmentación, blanqueamiento e iluminación para eliminar tatuajes amarillos, negros y azules. Se puede lavar, usar para tratar el acné, reducir los poros y tensar la piel, para lograr el efecto de rejuvenecimiento de la piel.

Before & After

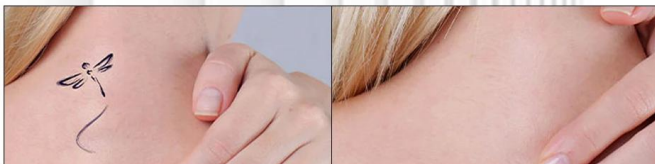

Before

After



Before

After



Before

After



Before

After



Before

After



Before

After

Parameters Table

Device Name	Laser luxe
Wavelength	1064nm 755nm 532nm
Screen Size	12 inch 4K Style touch screen
Pulse Duration	~7ns@1064nm ~6.5ns@532nm
Frequency	1-10hz
Spot size	2-10mm adjustable
Energy	1064/1000mj 755/1000mj 532/1000mj
Beam of light transmission	7 articular-arm of light guide transmitting
Indicator of aiming light	650 red diode laser
Cooling	Water cooling+Air cooling
Voltage	AC220V/110V 50HZ/60HZ
Demension of machine	93.6*92.7*39cm
Package	Aluminum box
Warranty	2 years



Accesorios para la máquina de eliminación de tatuajes con láser Nd Yag con láser de picosegundo para blanqueamiento de la piel: Además, también contamos con varios accesorios para brindar a nuestros clientes un excelente servicio.

Láser Q-switched nanosegundo pulso corto 755 532 1064 terapia vascular reparación de cicatrices máquina de eliminación de tatuajes con láser picosegundo





You'll get

Six value-added services

One-stop after-sales solution



2 years machine
warranty
1 year for handle



Free enterprise
training



Test **videos** and
pictures
about the machine



A professional
training service
training files
training videos



Customized logos,
posters and promotional
videos, put the logo on
screen system



Parcel **tracking service**
Help to do
Customs clearance

Después del servicio:

*Teniendo en cuenta la larga distancia entre nosotros y nuestros clientes, y para poder servirles mucho mejor, *Nuestra empresa construye un equipo profesional de tecnología pos servicio.

*Nuestro técnico brindará una solución oportuna para cualquier problema de la máquina y preparará los documentos dentro de las 24 horas.

*También puedes contactar con nosotros por teléfono, online, etc.

Obtenga más información sobre productos y conocimientos de belleza, ¡bienvenido a consultarnos!

¡Servicio en línea 7*24 horas!