

Co2 fractional laser vaginal tightening

You change that surprised them

- Easily remove stains
- Remove acne marks
- Shrink pores, tender skin.
- Tattoo removal





Collagen contraction and remodeling



Pigmentation removal



Skin tightening

up

Forehead

Eyelid / Brow

Nasolabial folds

Cheek

Double chin

Glabellum

Front face

Neck

down



Vaginal tightening



Scar removal



Stretch mark removal

SKIN RECONSTRUCTION



Five therapeutic heads

Equipped with scanning head * 1 / cutting head * 1 / private head * 3

- **Scanning head efficacy**

Tender skin/shrink pores/remove striae gravidarum and chloasma

- **Cutting head efficacy**

Removing sarcoma / nevus

- **Efficacy of private head**


Tighten vagina / tender vulva / tender vulva



- **Trachea**



- **Adjustable dot shape and size**

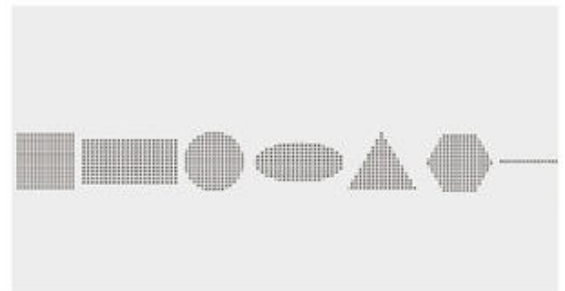

- **Shape display**

Información del Producto

Función de la máquina láser fraccional de CO2:

1. Cirugía de rejuvenecimiento con láser
2. Cirugía de eliminación de arrugas con láser
3. Cirugía de eliminación de cicatrices con láser
4. Blefaroplastia con láser
5. Otras aplicaciones: Eliminación de nevus pigmentado, cloasmas, pecas, pigmentos de la edad, verrugas, queratosis seborreica, siringoma, acnes, milia, estrías gravídicas; Contracción de poros; Estiramiento de la piel; Trasplante de cabello con láser; Aumento de senos con láser y etc.



CO2 FRACTIONAL LASER

CLEARLY DIFFERENT

BENEFITS



Shortest Pulse Duration,
Enabling High Peak Power



Improved ROI with Excellent Results in
Fewer Treatments



Unique Double Pulse Mode



Versatile Platform Enabling Multiple
Patient-Tailored Treatment Options



Supreme Feature-Set




I - VI Suitable for All Skin Types

Work Theory


It concentrated thermal heating of the vaginal tissue inner layers induces collagen and elastine contraction and regeneration of these proteins in the longer term. These molecular signal activate the entire wound healing process of the body's local immune system. The treatment outcome is the complete remodeling of the vaginal tissue in addition to re-establishment of firm "young like" vaginal tissue embedded with string-like, thick and long collagen fibers.



1. Laser irradiation angle can be adjusted

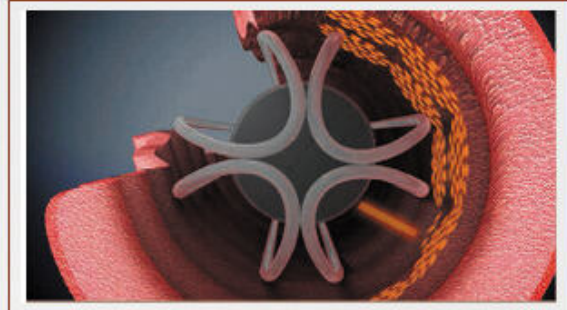

2. Laser irradiation can be rotated 360 degrees

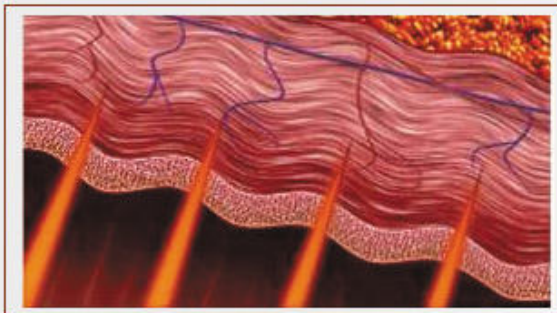


3. The area of the laser is compact edge contraction



4. vaginal walls shrink and tightening

WORKING PRINCIPLE

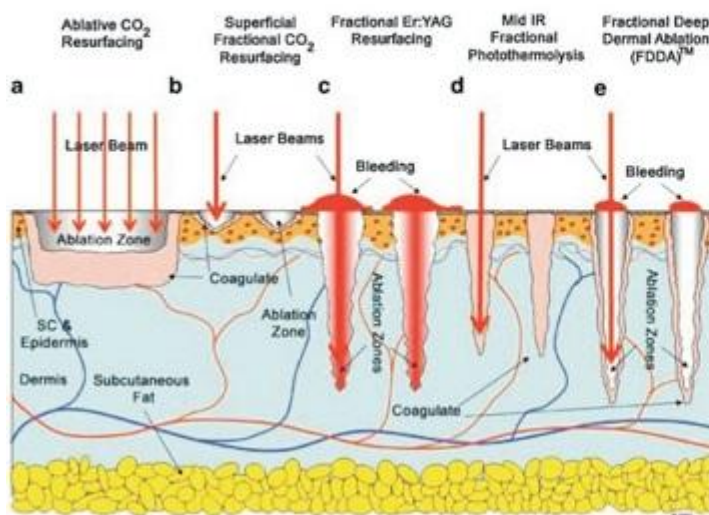

The CO2 laser uses a unique head piece which tracks the CO2 10.6 μm wavelength light as it passes light through its optical lens to penetrate the skin. We can control the depth of the penetration from only a few micrometers in depth (only as deep as a few sheets of paper) to much deeper with tiny thermal channels. This will also determine the length of healing, the number of treatments and the cost. Each thermal channel creates a small micro-injury but does not significantly disturb or disrupt the surrounding tissue.


Treatment effect comparison



before treatment



during treatment

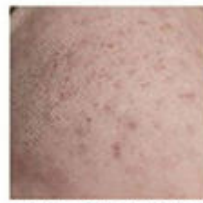

after treatment



after 30days

Acne Scars



Burn Scars



Hypertrophic Scars



Surgery Scars



Chicken Pox Scars



Accident Scars



Visualización de la pantalla

Pantalla táctil verdadera de 10,4 pulgadas, 6 tipos de piel para elegir. * Pantalla táctil grande de color verdadero de 10,4 pulgadas



* Experiencia táctil súper genial

* 6 idiomas para su elección, se puede agregar un idioma especial

* Se acepta el servicio OEM, como ajustar el parámetro, incluir energía / frecuencia / ancho de pulso

* 12 tipos de patrones de salida

SCREEN IMAGE

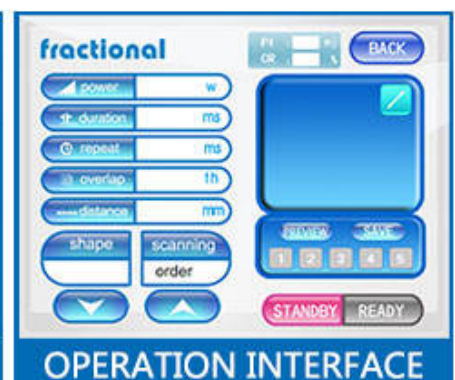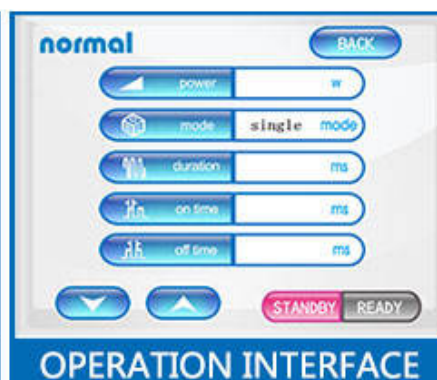

Tipo de láser

Láser fraccional de dióxido de carbono

Longitud de onda láser

1060 nm

Poder del laser

hasta 40W (opcional)

Sistema de luz

7 brazos articulados

Duración del pulso	100-5000us
Fácula	modo singular
Diámetro enfocado de la viga	0,25 mm
Área focal	0,05 mm ²
Formulario de salida	Ultra Pulse, fraccional
Modo de trabajo	Carga intermitente
Modo de escaneo	Secuencia, aleatoria, paralela (conmutable)
Escaneo de formas	Triángulo / cuadrado / rectángulo / redondo / ovalado / hexagonal / lineal
Área del diagrama	≤ 20 mm * 20 mm
Interfaz Pantalla táctil colorida	10,4 pulgadas
Sistema de refrigeración	Refrigeración por aire, refrigeración por agua
Potencia de entrada	CA 230V ± 10%, 50HZ / CA 110V ± 10% 60HZ
Tamaño de la mancha	≥0,2 mm en el foco
Tiempo de radiación / tiempo de intervalo	0,01 1 s
Haz de puntería	Rayo infrarrojo de 635nm
Fuente de alimentación	110/220 V 10% 60 Hz 6 A


**U.S. FOOD & DRUG
ADMINISTRATION**

[Follow FDA](#) | [En Español](#)

[SEARCH](#)

[Home](#) | [Food](#) | [Drugs](#) | [Medical Devices](#) | [Radiation-Emitting Products](#) | [Vaccines, Blood & Biologics](#) | [Animal & Veterinary](#) | [Cosmetics](#) | [Tobacco Products](#)

510(k) Premarket Notification

[FDA Home](#) | [Medical Devices](#) | [Databases](#)



[510\(k\)](#) | [DeNovo](#) | [Registration & Listing](#) | [Adverse Events](#) | [Recalls](#) | [PMA](#) | [HDE](#) | [Classification](#) | [Standards](#)
[CFR Title 21](#) | [Radiation-Emitting Products](#) | [X-Ray Assembler](#) | [Medsun Reports](#) | [CLIA](#) | [TPLC](#)

[New Search](#)
[Back To Search Results](#)

Device Classification Name	Powered Laser Surgical Instrument
510(K) Number	K200525
Device Name	Medical Diode Laser Hair Removal System
Applicant	Weifang Mingliang Electronics CO., LTD No.13426, Yuqing Street, High-Tech District Weifang, CN 261000
Applicant Contact	Li Mingliang
Correspondent	Beijing Believe-Med Technology Service Co., Ltd. Rm. 912, Building#15, XiYueHui, No.5, YiHe North Rd., FangShan District Beijing, CN 102401
Correspondent Contact	Ray Wang
Regulation Number	878.4810
Classification Product Code	GEX
Date Received	03/02/2020
Decision Date	05/27/2020
Decision	Substantially Equivalent (SESE)
Regulation Medical Specialty	General & Plastic Surgery
510k Review Panel	General & Plastic Surgery
Type	Traditional
Reviewed By Third Party	No
Combination Product	No

CERTIFICATE

Display

Medical CE FDA IOS TUV



**We can offer the door to door services by air or by sea
just depend on your actual request. Such as DHL, UPS, TNT, FEDEX.**

