



\* Láser de diodo de alta potencia de 1800w con tecnología de enfriamiento agradable, ¡para la depilación sin dolor!

\* El láser de diodo permite que la luz penetre más profundamente en la piel y sea más seguro que otros láseres. Debido a que puede evitar el pigmento de melanina en la epidermis de la piel, podemos usarlo para la depilación permanente de todos los vellos de color en los 6 tipos de piel.


\* Adecuado para cualquier vello no deseado en áreas como cara, brazos, axilas, pecho, espalda, bikini, piernas... También tiene la piel renovada.

\* Frecuencia 1-10 hz. ¡Tratamiento rápido!

Máquina para la depilación rápida y definitiva. ¡¡Sin dolor!!



### Parámetros del producto

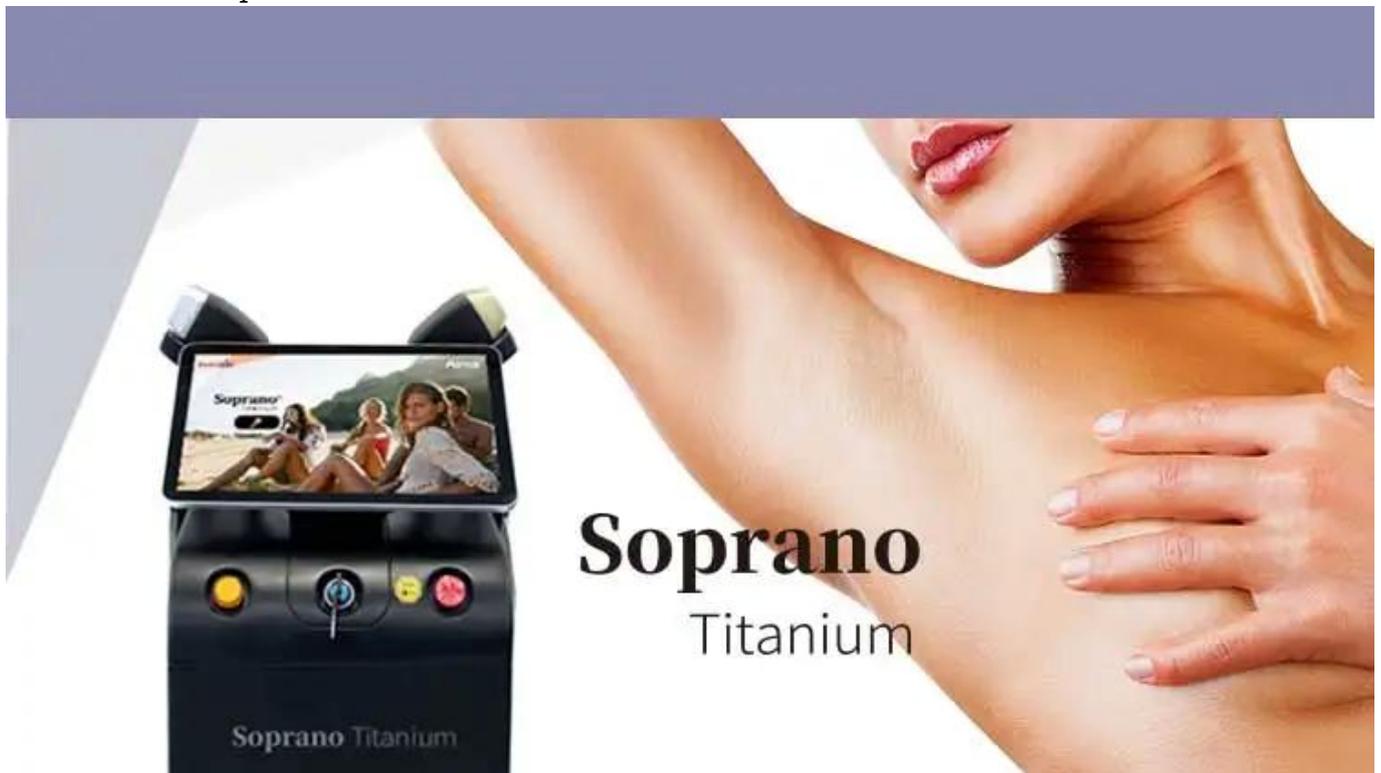

Modelo	808V19
Tipo de láser	Láser de diodo de 808nm o 755/808/1064nm 3 ondas combinadas
Mostrar	Pantalla táctil 4K de 14 pulgadas
Longitud de onda	755/808/1064
tiros	20-40 millones de disparos
Energía	10~150 j/cm <sup>2</sup> , ajustable
Frecuencia	1-10 HZ
Enfriamiento	Compresoraireagua
Fuerza	3500W
Tamaño del punto	12*24mm o 12*36mm para elegir
Voltaje	110V/ 60HZ o 220V/50HZ para elegir
Peso neto	95Kg

Peso bruto 105Kg  
Tamaño de la máquina 53\*40\*105cm  
Tamaño de caja 125\*56\*70,4  
Manejar pantalla

## Handle display

① Optional 12\*24mm/12\*36mm light spot size.

Different spot size meet different body parts hair removal needs .



② 10bars 1200w / 15bars 1800w. 10million—40million shots.  
Effective for permanent hair removal

③ 755nm and 808nm and 1064nm , suits for all skin and hair types.

## Cooling effect

The handle has a cooling effect that improve treatment comfort.



4cm<sup>2</sup>



## Three Simultaneous Wavelengths in One Applicator

Plus Exceptionally 4cm<sup>2</sup> Large Sport  
Size



The lowest handle  
temperature can reach -27°C



# For all skin types

**Triple wavelength** laser work together



755nm/808nm/1064nm

755nm  
808nm  
1064nm

**Waves laser combina 755nm 808nm 1064nm, trajes para todo tipo de tratamiento de piel y cabello.**


755nm para depilación de piel blanca (vello fino/dorado).


808nm para depilación de piel amarilla (natural).

1064nm para depilación de piel negra (pelo negro).


Antes y después de la máquina de depilación láser de diodo de platino con hielo

# working principle

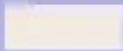
-  755 nm for white skin (fine, golden hair removal );
-  808nm for yellow neutral skin (brown hair removal);
-  1064nm for black skin (black hair removal)

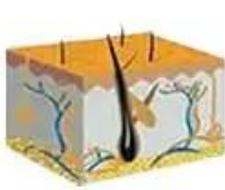

**A** natural

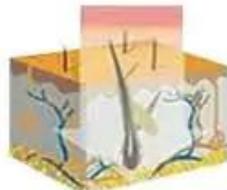


**B** energy absorbed by hair

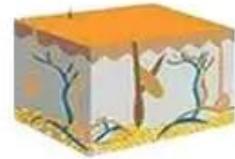

**C** hair follicle died

# working principle

Triple wavelength laser spots work together

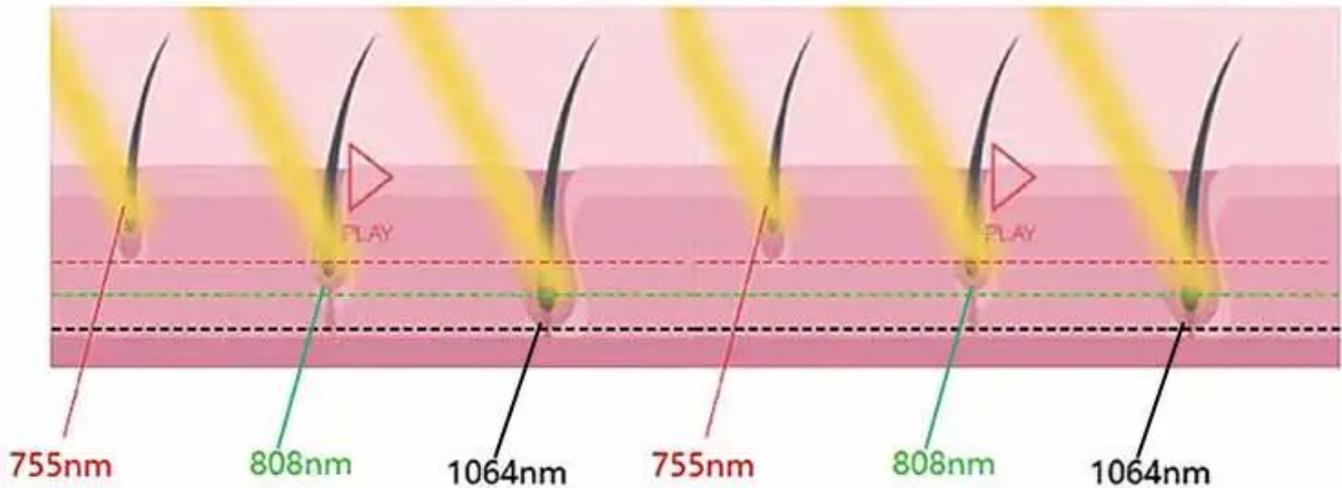

Comparación de efectos antes y después

## Scope of application

Suitable for any unwanted hair on areas like face, arms, armpits, chest, back, bikini, legs...










# We help you

Goodbye to the embarrassment



Visualización del sistema de pantalla

# System Function

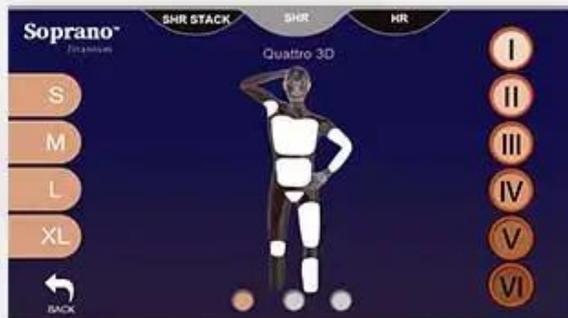

- 4k high definition screen system
- Different parts can be selected
- 6 skin type Any language could be added
- Logo could be added for free
- Easy to operate
- Stable operation

## The screen of Alma soprano titanium

---14 inch big screen, quick touch, easy operate

---Male & female, 6 body parts, 6 skin types

---6 language options, your native language can be added

## Our certificate

All the process of the producing is under ISO 13485 Quality system and match with CE certification request.



BV-France's most authoritative certification body BV Group certification



TUV-Germany's most authoritative certification body Rheinland certification



SGS-Switzerland's most authoritative certification body SGS certification

