

Venta caliente médico fraccional co2 láser aprobado por la fda fraccional co2 láser equipo



1, aplicación de láser co2 fraccional portátil médico:

- 1) Eliminar el acné, la cicatriz del acné, la cicatriz, etc.
- 2) disipar las arrugas alrededor de los ojos, las patas de gallo y las arrugas formadas por falta de agua;
- 3) reduce eficazmente las arrugas en la cara, la frente, las articulaciones y las estrías gravídicas;
- 4) disipar pecas, nevus zygomaticus y otras manchas formadas por cambios patológicos hipercrómicos;
- 5) Apriete la piel y levante la cara;
- 6) Elimina las estrías gravídicas y otras cicatrices profundas.
- 7) Eliminar todos los tatuajes de colores.
- 8) hueso cortado
- 9) función de ajuste vaginal opcional

TREATMENT EFFECT T



before treatment



during treatment



after treatment



after 30days

Acne Scars



Hypertrophic Scars



Chicken Pox Scars



Burn Scars



Surgery Scars



Accident Scars



RF treatment effect




2, profundidad de tratamiento del láser co2 fraccional portátil médico:

El tratamiento del láser de co2 fraccionado es de 50-2000 μm ajustable, Max es de 2 mm. Porque la luz infrarroja de 10600 μm

La longitud de onda cambiará las fibras elásticas en una profundidad de 2 mm, por lo que el láser de CO2 fraccional controla la profundidad de 2 mm para resolver el

Problema de la piel fotoenvejecida

WORKING PRINCIPLE

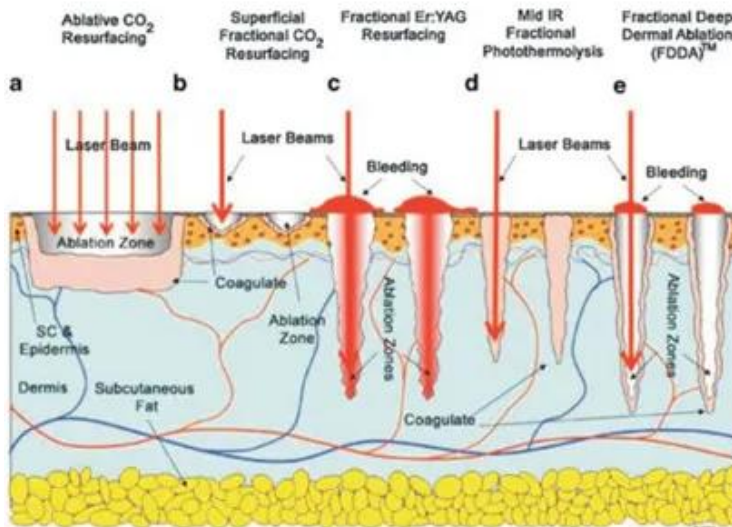

The CO2 laser uses a unique head piece which tracks the CO2 10.6 μm wavelength light as it passes light through its optical lens to penetrate the skin. We can control the depth of the penetration from only a few micrometers in depth (only as deep as a few sheets of paper) to much deeper with tiny thermal channels. This will also determine the length of healing, the number of treatments and the cost. Each thermal channel creates a small micro-injury but does not significantly disturb or disrupt the surrounding tissue.


These microscopic injuries caused by the laser (around 15-20% of the treated area) are the beginning of the healing process. By creating thousands of these perforations underneath the skin, your epidermis layer starts to heal from the edge of these microscopic perforations very quickly. By healing so fast it remodels, tightens and stimulates the collagen, your skin tightens, which in turn smooths out lines, and significantly improves your skin's tone and complexion.



3, Mujer Tratamiento privado de láser CO2 fraccional portátil médico --- endurecimiento y rejuvenecimiento vaginal.



Use an articulate arm probe with automatically 360° rotation technology, producing in 50-70° C at a controlled depth inside the vaginal mucosa - stimulates collagen contraction, restructuring and regeneration; promotes collagen fiber proliferating, remodeling; improves vaginal mucosa microcirculation; increases cell secretion and dynamic reaction function; corrects PH value of vaginal inside;

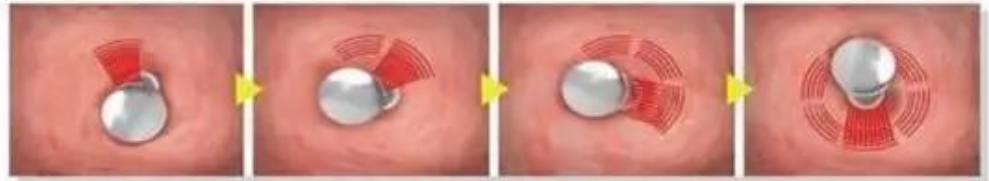

Therapeutic schemes

Improves the inside environment; achieve female private parts to significant lasting firming, nourishing and restoring harmonious sexual life. The laser has a photo thermal heating effect on collagen in both the vaginal walls and the urethra which causes restructuring and regrowth of the collagen. This results in thickening and tightening of the vaginal walls and urethra to improve atrophy and prevent urine loss.

4, detalles de la máquina del láser co2 fraccional portátil médico:



German import scanning head

• Longer life span

Imported scanning heads generally use for 3 - 5 years, with low failure rate, more accurate scanning and long service life.

• Strong energy, more accurate

Strong energy, uniform light emission, more accurate scanning, lower failure rate and long service life.

• Scanning accuracy

The scanning rate of import is more accurate



Section 7 light guide arm

• counter weight

Light guide arm adopts counter weight design, which makes it more flexible to use and convenient to operate.

• Aluminium material

The light guide arm is made of high-grade aluminum, which has high stability and is lighter.

• Tri - color optional

Equipped with silver, red and blue light guide arms, it can meet different preferences of customers.

Five therapeutic heads

Equipped with scanning head * 1 / cutting head * 1 / private head * 3

• Scanning head efficacy

Tender skin/shrink pores/remove striae gravidarum and chloasma

• Cutting head efficacy

Removing sarcoma / nevus

• Efficacy of private head

Tighten vagina / tender vulva / tender vulva




• Trachea

When working, gas is sprayed out, which has the functions of cooling, cooling and dust removal.




Adjustable dot shape and size

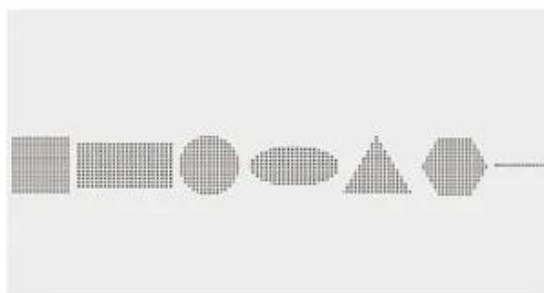

Shape display

5, pantalla táctil de color verdadero de 8,4 pulgadas de máquina láser fraccional co2 portátil:

SCREEN IMAGE

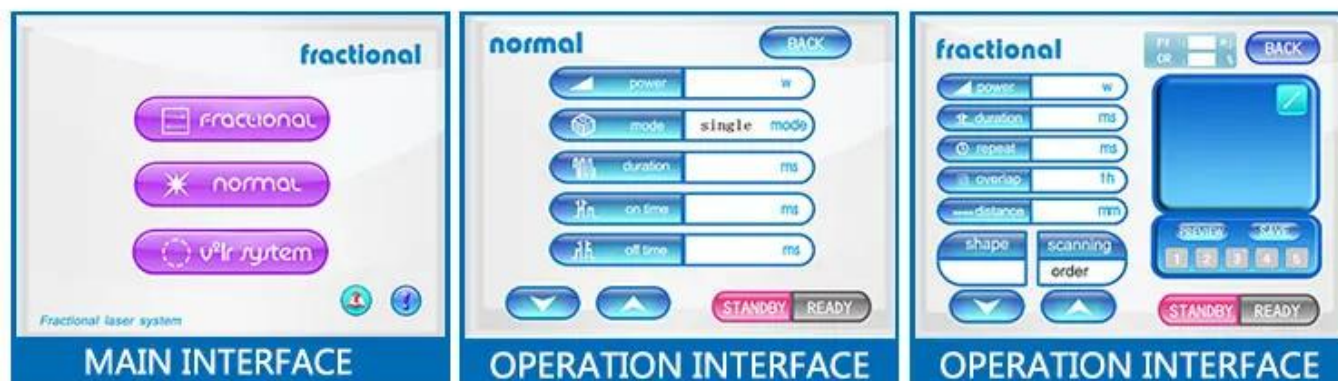

Información básica	Longitud de onda	10,6 μm , láser de infrarrojo lejano
	Radiofrecuencia pulsada	0,530W
	Ultra-pulso	1. Potencia máxima: 120W 2. Ancho de pulso: 200 a 500 μs es opcional
	Legumbres	Potencia media: 1-30W
modo matriz	Escanear gráficos	Gráficos cuadrados, rectangulares, redondos o personalizados
	Cantidad de puntos	400 puntos como máximo
	estado de trabajo	modo ultrapulsado
	Modo de escaneo	Escaneo de secuencia o escaneo aleatorio
	Energía de pulso	1mj a 100mj es opcional para cada punto.
Técnico especificación	aparato láser	Dispositivo láser sellado estimulado por corriente continua
	Foco del condensador	f=50 mm
	Ángulo de divergencia del haz	0,3 mrad
	Tamaño del punto	0,5-20 mm ajustable
	Tiempo de radiación / Tiempo de intervalo	0.01 1 seg
	Rayo de puntería	Menos de 2 mW, láser semiconductor rojo de 635 nm
	dispositivo de transporte de haz	Brazo articulado de seis segmentos y contrapeso

Nuestros servicios

1) Garantía

Ofrecemos 2 años de garantía a los clientes. Mantenimiento gratuito de por vida.

2) Entrenamiento

Ofrecemos a nuestros clientes capacitación profesional en frío, nos aseguramos de que cada cliente posea el conocimiento de operación profesional en

tiempo, DVD para entrenar o entrenar en línea directamente. Sin ningún cargo, igratis!

3) Servicio profesional de OEM y ODM

Como somos un fabricante profesional de máquinas de belleza en China, podemos ofrecer a cada distribuidor y comerciante el OEM/ODM

Servicio sin ningún cargo de diseño, cualquier consejo de nuestro cliente es bienvenido!

4) Logotipo gratuito, idioma, diseño de color.

Podemos agregar su logotipo en la pantalla de la máquina de forma gratuita.

Podemos diseñar su idioma en la pantalla de forma gratuita.

Puede elegir cualquier color que desee para la máquina.

5) Entrega

Entregaremos la máquina en 3 días.

Podemos entregar los productos a todo el mundo. DHL tarda de 3 a 5 días puerta a puerta.

Embalaje y envío

El tiempo de entrega	3-5 días hábiles después de pagar
Método de entrega	Ofrezca servicio puerta a puerta por aire, como DHL UPS TNT.
Embalaje	Caja fuerte de aluminio con espuma

ABOUT SHIPPING

3-5 businessdays delivery

support air cargo & sea cargo as your option !



--Máquinas de belleza que producimos

Láser de diodo de 808nm (usar barra láser de sinterización de estaño dorado, condensador TEC, lámpara importada de Italia)

Láser fraccionado de CO2 (40 W RF, cabezal de escaneo importado)

Láser de diodo 980 (remoción vascular especializada)

Luz/IPL (7 filtros, tamaño de punto grande de 15*50 mm)

láser nd yag (barra láser importada, 5 cabezales de tratamiento)

Láser de picosegundo (Seis cabezales de tratamiento)

Cavitación Vacío RF (RF tripolar, RF monopolar, RF bipolar)

SHR (súper depilación)

Certificat e



BV-France's most authoritative certification body BV Group certification



TUV-Germany's most authoritative certification body Rheinland certification



SGS-Switzerland's most authoritative certification body SGS certification



Italy ECM Certification



ISO 13485
NQA medical system certification



Preguntas más frecuentes

1. ¿Es una empresa confiable?

Weifang Mingliang Development Co., Ltd. se estableció en 2005, se dedica a I D, ventas y servicios posventa de

dispositivos estéticos y equipos láser médicos, incluso parte del área de TI y el sector inmobiliario.

tenemos un profesional

equipo que se integra con óptica, maquinaria, electricidad y medicina, para mantenernos a la vanguardia en este campo. cubiertas de fábrica

5000M2 y tiene más de 100 empleados.

2: ¿Qué pasa con la entrega?

Podemos ofrecer servicios puerta a puerta por aire o por mar, solo depende de su solicitud real. Como DHL, UPS, TNT,

FEDEX... por aire; y los transportes marítimos.

3: ¿Cuál es el tiempo de entrega?

3-5 días laborables. Gran stock.

4: ¿Qué es el paquete?

Caja fuerte y hermosa de aleación de aluminio/caja de cartón/caja de madera.

5: ¿Tiene algún soporte tecnológico oportuno?

Contamos con un equipo de soporte de tecnología profesional para sus servicios oportunos. Elaboramos los documentos técnicos

para usted, también puede contactarnos por teléfono, cámara web, chat en línea (googletalk, MSN, skype, yahoo...).

6: ¿Cuál es el método de pago?

T/T, WESTERN UNION, FIDEICOMISO, etc.

7: Si las máquinas se rompen durante el envío, ¿nos apoyarán?

En general, nuestro cliente comprará el seguro antes del envío, evitará la pérdida de dinero por el transporte brusco.

Te ayudaremos a resolver las reclamaciones con las compañías de seguros para recuperar tu dinero a tiempo.