

CO2




Fractional Laser

- ✓ skin rejuvenation
- ✓ remove scars
- ✓ get rid of stretch marks
- ✓ Remove acne scars
- ✓ Treatment of pigmented nevi
- ✓ private compact

CO2 FRACTIONAL LASER

- ✓ Six treatment heads
- ✓ Three treatment modes
- ✓ Professional medical beauty

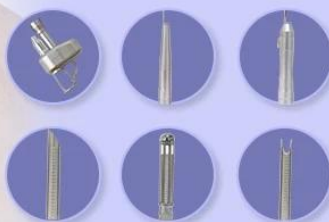

Co2 fractional laser vaginal tightening

Latest






Collagen contraction and remolding



Pigmentation removal

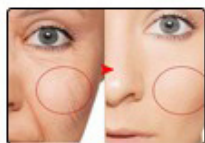

Skin tightening

up

Forehead

Eyelid / Brow

Nasolabial folds

Cheek

Double chin



Glabellum

Front face

Neck

down



Vaginal tightening



Scar removal



Stretch mark removal

SKIN RECONSTRUCTION



Five therapeutic heads

Equipped with scanning head * 1 / cutting head * 1 / private head * 3

- **Scanning head efficacy**



Tender skin/shrink pores/remove striae gravidarum and chloasma

- **Cutting head efficacy**


Removing sarcoma / nevus

- **Efficacy of private head**


Tighten vagina / tender vulva / tender vulva

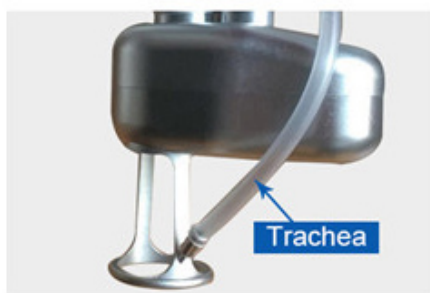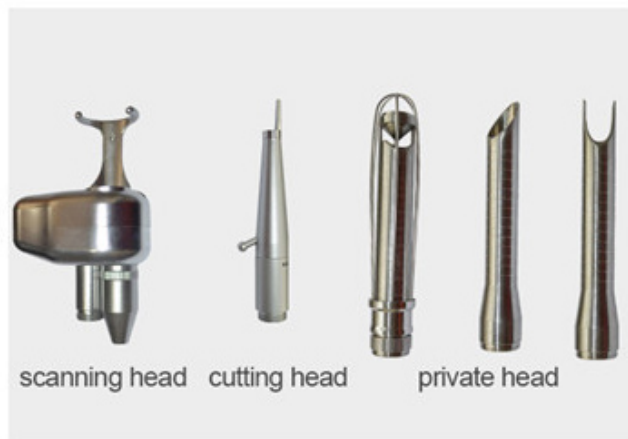

- **Trachea**

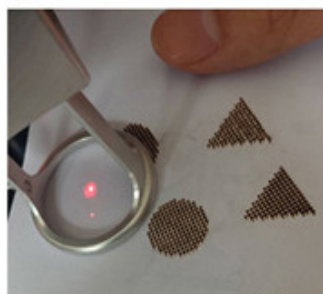

- **Adjustable dot shape and size**

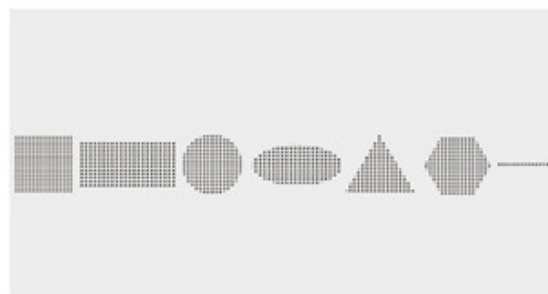

- **Shape display**

اطلاعات محصول

جراحی بازسازی با لیزر 2. جراحی حذف چین و چروک با لیزر 3. جراحی حذف اسکار با لیزر 4. بلفاروپلاستی با 1. لیزر 5. کاربردهای دیگر: حذف نایوس های رنگی، کلواسما، کک و مک، رنگدانه های سن، زگیل، کراتوز سیورثیک، سیرنگوم، آکنه، میلیا، بارداری؛ انقباض منافذ؛ سفت شدن پوست؛ کاشت مو با لیزر؛ بزرگ کردن سینه با لیزر و غیره

CO2: عملکرد دستگاه لیزر فرکشنال



CO2 FRACTIONAL LASER

CLEARLY DIFFERENT

BENEFITS



Shortest Pulse Duration,
Enabling High Peak Power



Improved ROI with Excellent Results in
Fewer Treatments



Unique Double Pulse Mode



Versatile Platform Enabling Multiple
Patient-Tailored Treatment Options



Supreme Feature-Set



I - VI Suitable for All Skin Types

CO2 FRACTIONAL LASER

vaginal tightening, skin resurfacing, scar removal




5 TREATMENT
HEADS



SHOW DETAILS

Pursue better in every detail

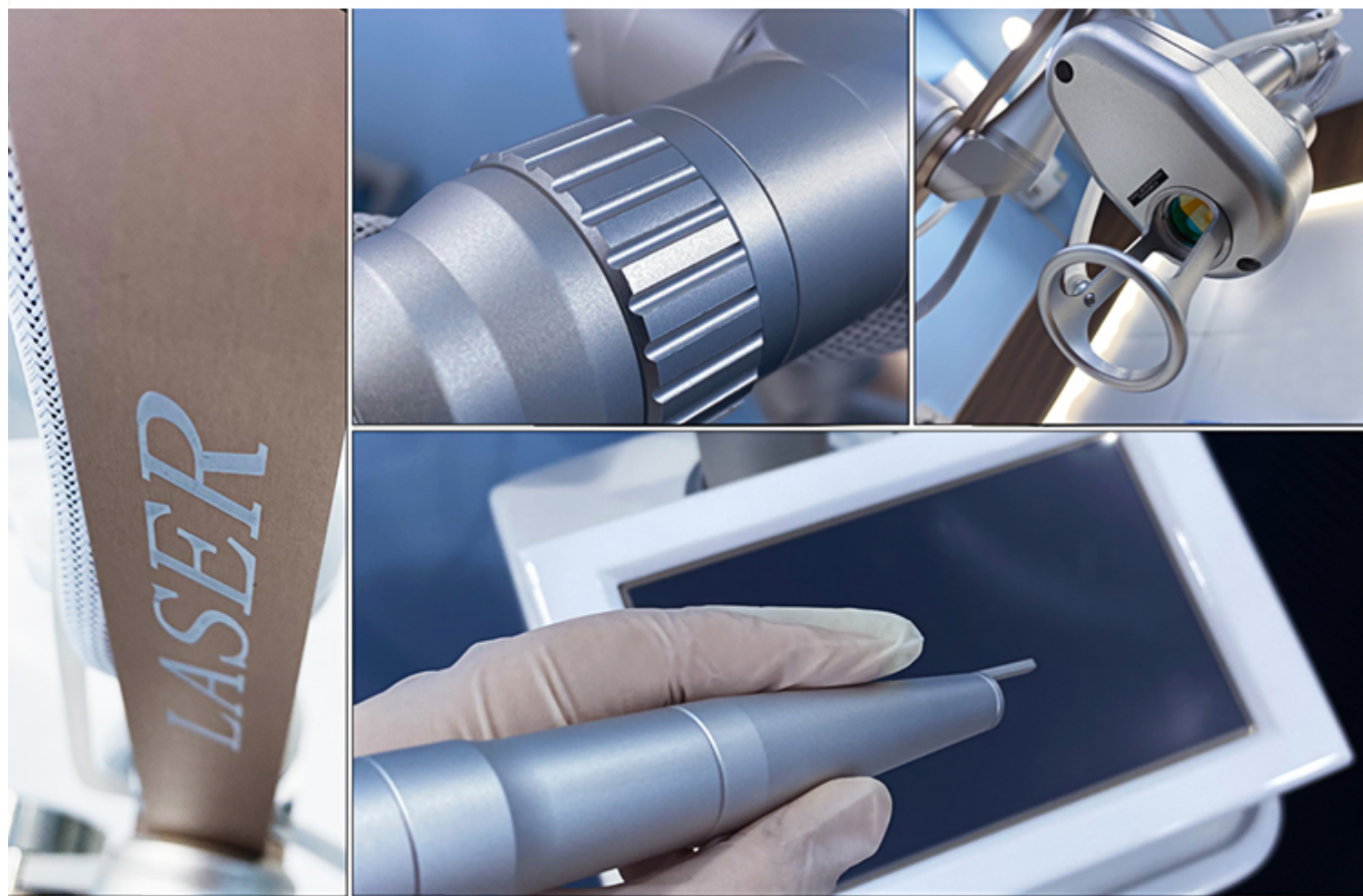


Work Theory


It concentrated thermal heating of the vaginal tissue inner layers induces collagen and elastin contraction and regeneration of these proteins in the longer term. These molecular signals activate the entire wound healing process of the body's local immune system. The treatment outcome is the complete remodeling of the vaginal tissue in addition to re-establishment of firm "young like" vaginal tissue embedded with string-like, thick and long collagen fibers.




1. Laser irradiation angle can be adjusted

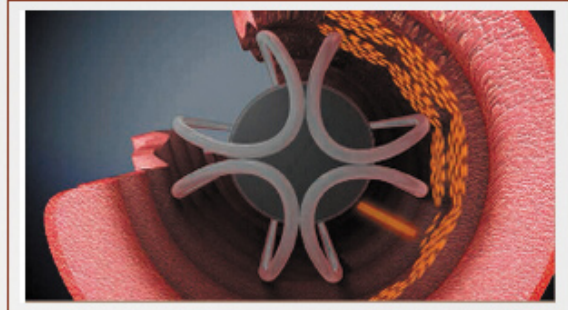

2. Laser irradiation can be rotated 360 degrees

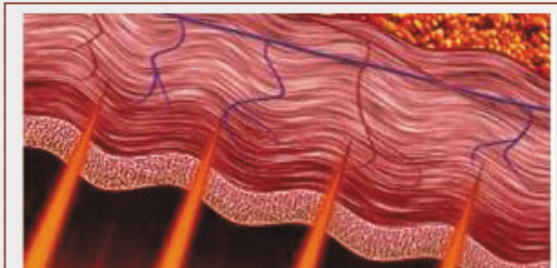

WORKING PRINCIPLE

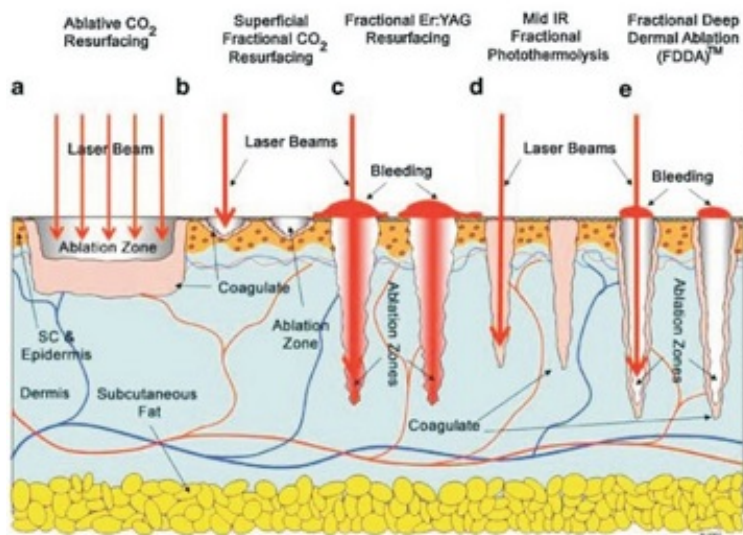

The CO₂ laser uses a unique head piece which tracks the CO₂ 10.6 μ m wavelength light as it passes light through its optical lens to penetrate the skin. We can control the depth of the penetration from only a few micrometers in depth (only as deep as a few sheets of paper) to much deeper with tiny thermal channels. This will also determine the length of healing, the number of treatments and the cost. Each thermal channel creates a small micro-injury but does not significantly disturb or disrupt the surrounding tissue.

Treatment effect comparison



before treatment



during treatment



after treatment



after 30days

Acne Scars



Burn Scars



Hypertrophic Scars



Surgery Scars



Chicken Pox Scars



Accident Scars



صفحه نمایش

صفحه نمایش لمسی بزرگ 14 اینچی رنگی واقعی *

* تجربه لمس فوق العاده جالب

* 6 زبان برای انتخاب شما، زبان خاصی را می توان اضافه کرد

پذیرفته می شود، مانند تنظیم پارامتر، شامل انرژی / فرکانس / عرض پالس OEM * سرویس

* 12 نوع الگوی خروجی

صفحه نمایش لمسی واقعی 14 اینچی، 6 نوع پوست برای انتخاب



14 inch 4K HD touch screen
One click start different function parameters
Easier system operation

نوع لیزر	واژینال	Co2 دستگاه لیزر واژینال لیزر
طول موج لیزر		نانومتر 1060
قدرت لیزر		(حداکثر 40 وات (اختیاری
سیستم نور		بارو مفصل 7
مدت زمان نبض		تومان 100-5000
فاکولا		حالت تک
قطر متمرکز پرتو		میلی متر 0.25
ناحیه کانونی		میلی متر مربع 0.05
فرم خروجی		اولترا پالس، کسری
حالت کار		بارگذاری متناوب
حالت اسکن		(دنباله، تصادفی، موازی (قابل تعویض
اسکن اشکال		مثلث / مربع / مستطیل / گرد / بیضی / شش ضلعی / خطی
مساحت نمودار		میلی متر 20*20 ≤
رابط صفحه نمایش لمسی رنگارنگ		اینچ 14
سیستم برودتی		هوا خنک کننده، آب خنک کننده
ورودی برق		ولت 10 ± 60 هرتز AC 110 / ولت 10 ± 50 هرتز AC 230
اندازه نقطه		در فوکوس ≥0.2mm
زمان تابش / زمان فاصله		ثانیه 1 0.01
پرتو نشانه گیری		اشعه مادون قرمز 635 نانومتر
منبع تغذیه		ولت 10 ± 60 هرتز 6 آمپر 110/220