



Épilation multifonctionnelle au laser à diode elight ipl 808nm et élimination des tatouages yag avec rf

| | |
|--------|---|
| Modèle | Elight laser à diode 808 nm laser nd yag RF |
|--------|---|

| | |
|-----------------------------|---|
| Application | 1) épilation, élimination des taches de rousseur 2) Rajeunissement de la peau 3) Traitement pigmentaire 4) Éliminer les rides 5) Élimination de l'acné 6) Suppression des paupières 7) Enlèvement de la broderie des sourcils 8) Détatouage 9) Suppression des taches de rousseur |
| Source de lumière | Lumière pulsée intense |
| Pièce à main | Une poignée Elight Une poignée laser à diode 808 nm Une poignée laser nd yag et une poignée RF |
| Longueur d'onde | IPL : 420/510/690 ~ 1 200 NM (norme IPL) 585/640/755 ~ 1200 nm (facultatif) SHR:640-690NM |
| Temps de retard d'impulsion | 1~50ms |
| Aisance | 2~15 ms |
| Écran | Écran tactile plus coloré de 8,4 pouces |
| Taille du spot | 12x20mm, 12x35mm, 15x50mm |
| Nd à commutation Q | ND : laser YAG |
| Longueur d'onde | 1064&532&1320nm |
| Énergie d'impulsion | 0-800mJ 0-300mJ |
| Énergie de SHR | 1-50J |
| Système de refroidissement | Circulation de l'air et de l'eau froide, tête de traitement avec température de refroidissement du semi-conducteur réglable |
| Pouvoir | 1600-3000W |
| Source électrique | -4----0 |
| Méthode d'emballage | Emballage en aluminium |
| Méthode d'emballage | Emballage en aluminium |

Épilation multifonctionnelle au laser à diode elight ipl 808nm et élimination des tatouages yag

Poignée laser à diode 808nm pour une épilation ultra rapide

Poignée e-light (IPLRF) pour le rajeunissement de la peau, le raffermissment de la peau, l'élimination de l'acné, l'épilation et les soins de la peau, etc.

poignée laser nd yag pour le détatouage, le retrait des paupières, etc.

tête rf pour amincissement du visage et du corps, rajeunissement de la peau, etc.

Advantage

- **Diode laser handle**

Painless hair removal, Permanent hair removal, Suitable for all skin tones.

- **Elight handle**

Elight for hair removal ,skin rejuvenation,vascular therapy ,pigmentation therapy,acne therapy.

- **ND YAG Laser handle**

ND Yag laser for tattoo removal, eyeline remova, eyebrow ,embroidery removal. freckle removal.

- **RF handle**

Skin tightening/lifting, wrinkle removal on bod



DIODE LASER

755/808/1064nm diode laser, for all type skin hair removal, painless

755 NM

The Power of Diversity



755nm

808 NM

Up To Speed



808nm

1064 NM

Dedicated to Darker Skin



1064nm





One minute cooling

Suitable for hair removal on any part of the body



Arms



Legs



Face



Armpits



Back




Chest

How does it work

E-light IPL for Hair removal/Skin rejuvenation/Vascular Job/Pigmentation treatment/Acne clearance

Face and body with big and small treatment head.

Through the scientific design of diode laser handle, the high-energy laser beam instantly penetrates the skin and reaches the hair follicle during treatment, output light is absorbed by melanin in the hair follicle, so destroying the hair follicle and reach permanent hair removal. The laser pulse width is set shorter than the time that human body's feeling time, a single shot of light is over, but the human body fell painless, then could achieve the painless treatment feeling, to improve the customer's comfortable experience

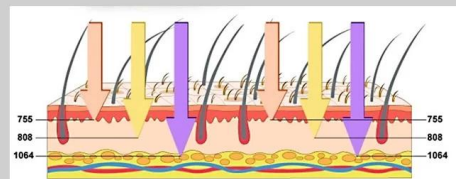

Refuse To Repeat And Leave No Scum



1 week-2 weeks
(2 times a week)

75% hair loss
Start to grow slowly
Smaller pores

3 week-4 weeks
(2 times a week)

Hair becomes thinner and less
Rejuvenate tender skin
Smooth body

5 week-8 weeks
(2 times a week)

Select according to hair growth status. Use it selectively, say goodbye Repeated hair removal.

IPL Handle

© **High-quality IPL**

Handpiece with super cooling system

© **Optional Spot Size**

15*50mm,15*35mm,12*30mm

© **Long shots time**

IPL:150,000 times

© **7 filters**

420/510/560/585/640/690/755nm

Standard:420/510/560/690nm



420nm

Acne removal
Vascular
treatment

510nm

Pigmentation
therapy,Remove
freckles

560nm

Skin
rejuvenation
wrinkle removal

585nm

Remove Red
blood silk

640nm

Hair removal
(light skin)

690nm

Hair removal
(brown skin)

755nm

Hair removal
(black skin)





ND YAG

5 Treatment Heads

532: Remove colored tattoos.
 755 honeycomb head: used to remove age spots, freckles, and chloasma. little damage to skin
 Adjustable parameter 1064: for tattoo removal, eyebrow clearing
 Non-adjustable parameter 1064: used for removing tattoos and clearing eyebrows
 1320: large area treatment, large spot, fast treatment speed and good effect




ND YAG ADUANTAGE

Imported crystal bonding laser rod, best quality , shot more than 1.5 million times
 Counter on the handle, more easy to get the total shot time
 LED red indicator, more easy to aim on the treatment area.
 5 treatment tips for multi fuctions: tattoo removal, skin rejuvenation, pigment removal, carbon peeling...



RF Handle

Suitable to 6 kinds of therapy area, to make sure the treatment on the corner of eye, and other area on face.

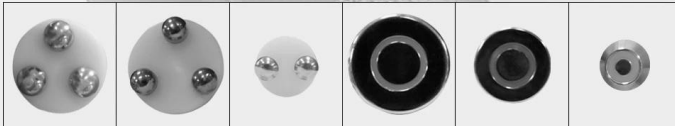

36mm big tripolar rf head


28mm small tripolar rf head

12mm eye-rf

38mm bipolar-rf

28mm bipolar-rf

14mm bipolar-rf

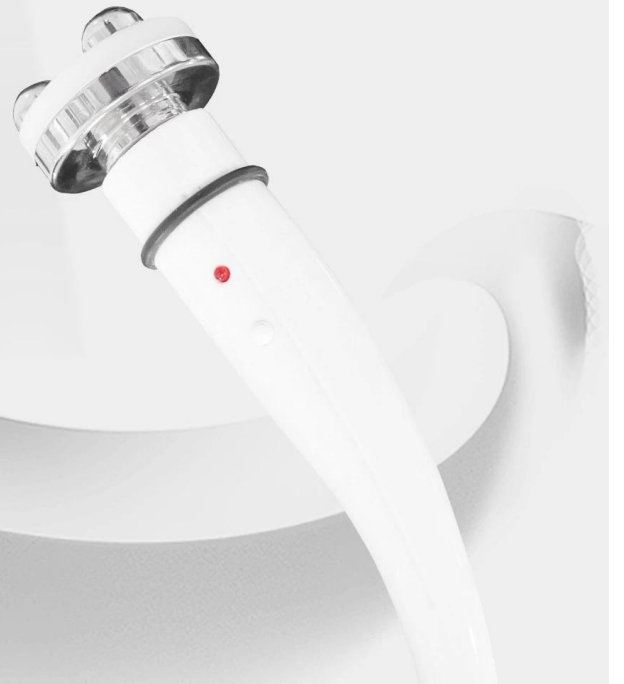

Épilation multifonctionnelle au laser à diode elight ipl 808nm et élimination des tatouages yag

Écran tactile couleur 14 pouces, peau homme et femme, 6 langues au choix.

Votre langue et votre logo peuvent être ajoutés librement.

14 inch true color touch screen

Professional Screen, Easy operation



Délai de livraison : 3 à 5 jours ouvrables après réception du paiement.

Conditions de paiement : T/T (virement bancaire), Western Union

Garantie : 2 ans pour la machine entière, 1 an pour la poignée

Manière d'expédition : service porte à porte par avion, DHL/UPS/TNT

Emballage : Boîte en aluminium avec mousse dure

Packing

safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,
one-year warranty.

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)
Can Keep You Operate It Easily.



3-5 business days delivery

Professional guide:
24 Hours Professional online customer service,