

CO2




Fractional Laser

- ✓ skin rejuvenation
- ✓ remove scars
- ✓ get rid of stretch marks
- ✓ Remove acne scars
- ✓ Treatment of pigmented nevi
- ✓ private compact

CO2 FRACTIONAL LASER

- ✓ Six treatment heads
- ✓ Three treatment modes
- ✓ Professional medical beauty

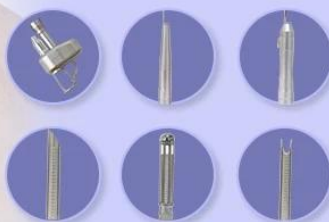

Co2 fractional laser vaginal tightening

Latest





Collagen contraction and remodeling



Pigmentation removal



Skin tightening

up

Forehead

Eyelid / Brow

Nasolabial folds

Cheek

Double chin



Glabellum

Front face

Neck

down



Vaginal tightening



Scar removal



Stretch mark removal

SKIN RECONSTRUCTION



Five therapeutic heads

Equipped with scanning head * 1 / cutting head * 1 / private head * 3

- **Scanning head efficacy**


Tender skin/shrink pores/remove striae gravidarum and chloasma

- **Cutting head efficacy**

Removing sarcoma / nevus

- **Efficacy of private head**


Tighten vagina / tender vulva / tender vulva

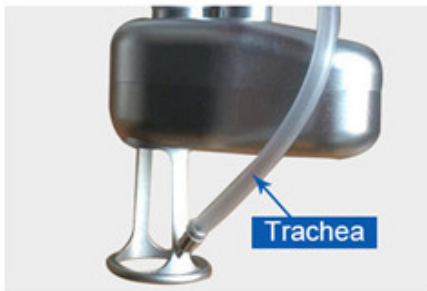

- **Trachea**



Adjustable dot shape and size

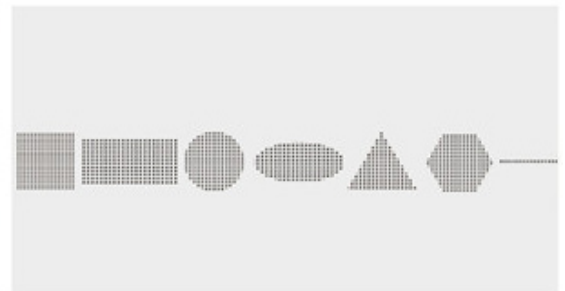

Shape display

Information produit

1. Chirurgie de resurfaçage au laser 2. Chirurgie d'élimination des rides au laser 3. Chirurgie d'élimination des cicatrices au laser 4. Blépharoplastie au laser 5. Autres applications : élimination des naevus pigmentés, des chloasmas, des taches de rousseur, des pigments d'âge, des verrues, de la kératose séborrhéique, du syringome, des acnés, des milia, des stries gravidarum ; rétrécissement des pores; Raffermisssement de la peau; Greffe de cheveux au laser ; Augmentation mammaire au laser et etc.

Fonction de la machine laser fractionnée CO2 :



CO2 FRACTIONAL LASER

CLEARLY DIFFERENT

BENEFITS



Shortest Pulse Duration,
Enabling High Peak Power



Improved ROI with Excellent Results in
Fewer Treatments



Unique Double Pulse Mode



Versatile Platform Enabling Multiple
Patient-Tailored Treatment Options



Supreme Feature-Set



I - VI Suitable for All Skin Types

CO2 FRACTIONAL LASER

vaginal tightening, skin resurfacing, scar removal




5 TREATMENT
HEADS



SHOW DETAILS

Pursue better in every detail

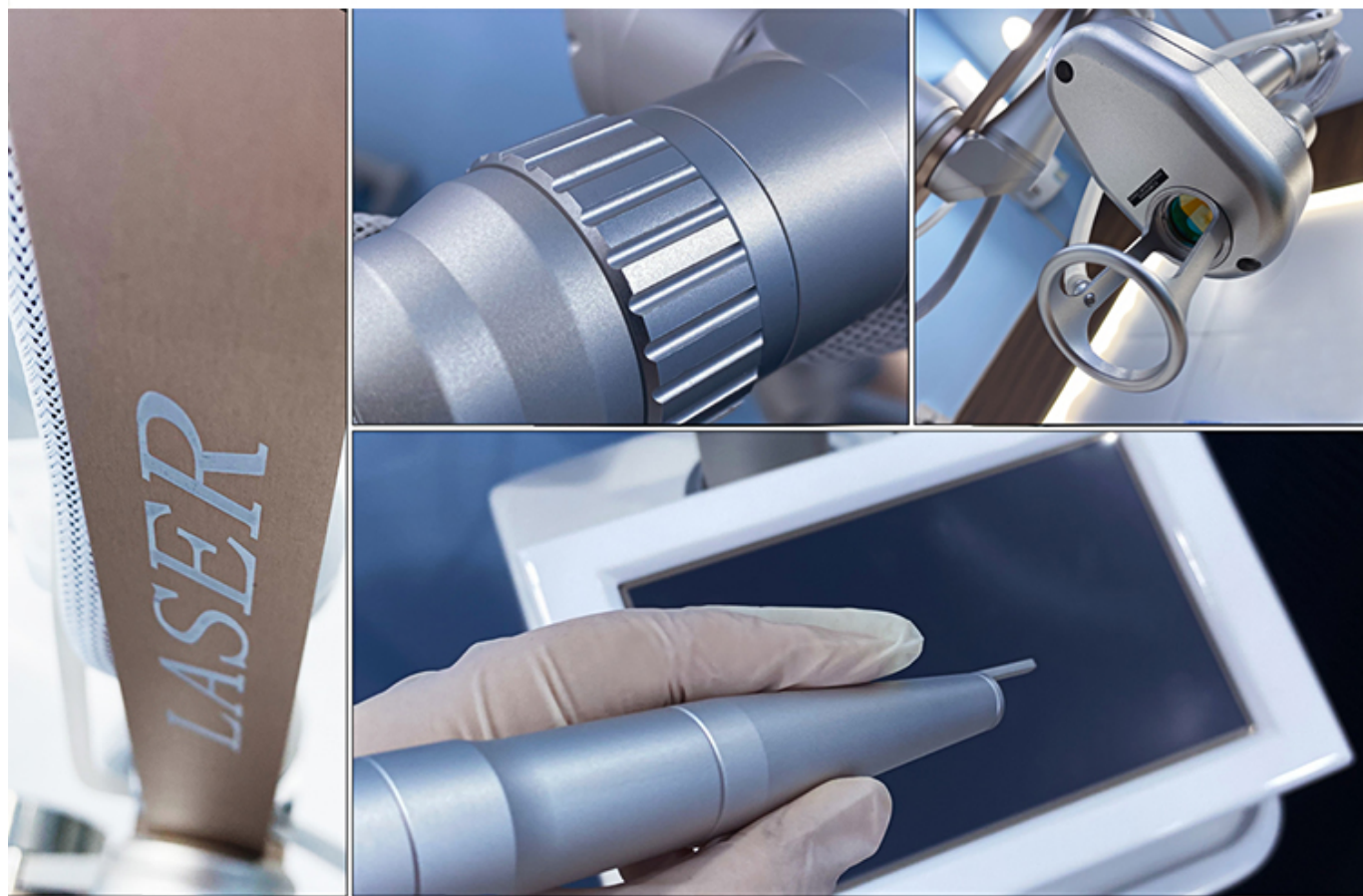


Work Theory


It concentrated thermal heating of the vaginal tissue inner layers induces collagen and elastin contraction and regeneration of these proteins in the longer term. These molecular signals activate the entire wound healing process of the body's local immune system. The treatment outcome is the complete remodeling of the vaginal tissue in addition to re-establishment of firm "young like" vaginal tissue embedded with string-like, thick and long collagen fibers.




1. Laser irradiation angle can be adjusted

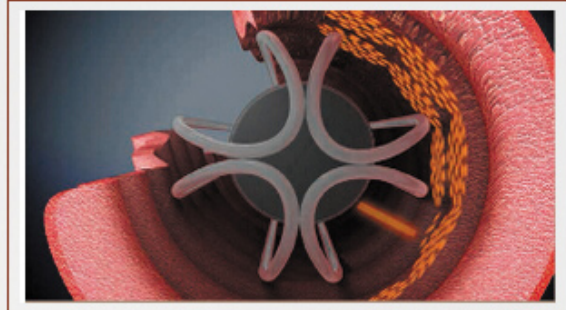

2. Laser irradiation can be rotated 360 degrees

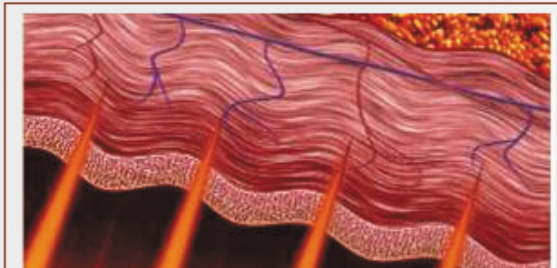

WORKING PRINCIPLE

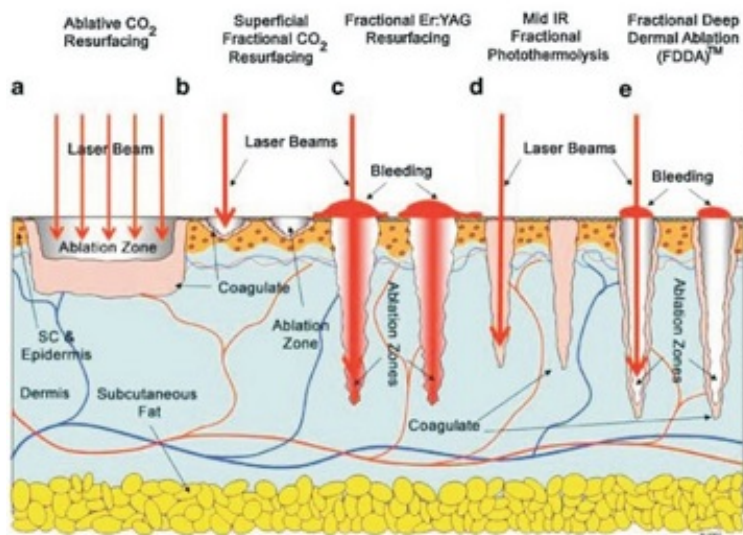

The CO₂ laser uses a unique head piece which tracks the CO₂ 10.6 μ m wavelength light as it passes light through its optical lens to penetrate the skin. We can control the depth of the penetration from only a few micrometers in depth (only as deep as a few sheets of paper) to much deeper with tiny thermal channels. This will also determine the length of healing, the number of treatments and the cost. Each thermal channel creates a small micro-injury but does not significantly disturb or disrupt the surrounding tissue.

Treatment effect comparison



before treatment



during treatment



after treatment



after 30days

Acne Scars



Burn Scars



Hypertrophic Scars



Surgery Scars



Chicken Pox Scars



Accident Scars



Écran d'affichage

- * Grand écran tactile couleur vraie de 14 pouces
- * Expérience tactile super cool
- * 6 langues pour votre choix, une langue spéciale peut être ajoutée
- * Les services OEM sont acceptés, tels que le paramètre de réglage, incluent l'énergie/la fréquence/la largeur d'impulsion
- * 12 types de modèles de sortie

Véritable écran tactile de 14 pouces, 6 types de type de peau au choix



14 inch 4K HD touch screen
One click start different function parameters
Easier system operation

Type de laser	Laser Vaginal Laser Co2 Vaginal Machine
Longueur d'onde laser	1060nm
Puissance laser	jusqu'à 40W (en option)
Système d'éclairage	7 bras articulés
Durée de pouls	100-5000us
Faculté	mode unique
Diamètre focalisé du faisceau	0,25 mm
Zone focale	0,05 mm ²
Formulaire de sortie	Ultra Pulse, fractionné
En mode travail	Chargement intermittent
Mode de numérisation	Séquence, aléatoire, parallèle (commutable)
Numérisation de formes	Triangle/carré/rectangle/rond/ovale/hexagone/linéaire
Zone du diagramme	≤20mm*20mm
Écran tactile coloré d'interface	14 pouces
Système de réfrigération	Refroidissement par air, refroidissement par eau
La puissance d'entrée	CA 230V±10%, 50HZ/ CA 110V±10% 60HZ
Taille du spot	≥0.2mm à la mise au point
Temps de rayonnement / Intervalle de temps	0,01 1 s
Faisceau de visée	Rayon infrarouge 635nm
Source de courant	110/220V10% 60HZ 6A