


Laser à impulsion courte : durée ≤ nanosecondes (10e-6 secondes)

Meilleur laser pour le détatouage

Caractéristiques:

- ☐ En utilisant l'effet de soufflage mécanique de la pression acoustique de la lumière, une seule durée d'émission est courte, haute énergie et puissance maximale ;
- ☐ La largeur d'impulsion n'est généralement pas réglable ;
- ☐ L'impulsion courte est réalisée par la technologie Q-switching

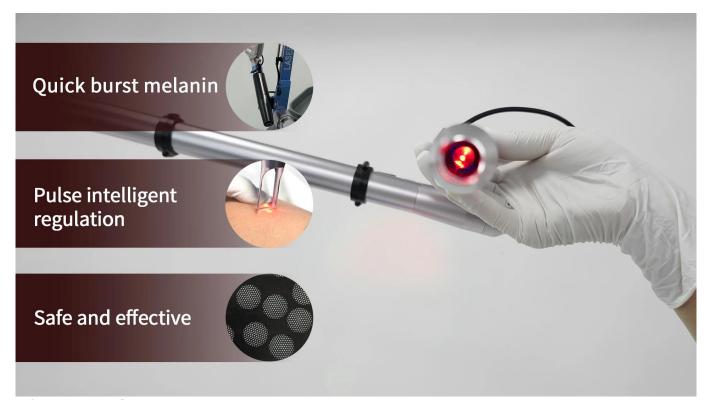

Information produit




Avec 7 bras de lumière guides, la lumière est plus symétrique! La densité énergétique (J/cm2) est le paramètre décisif de la thérapie laser Q-switched. Le laser à commutation Q ne peut généralement pas ajuster la largeur d'impulsion, définir la même valeur d'énergie lumineuse (mJ), si plus la zone d'action est petite (plus le diamètre du point est petit), plus la densité d'énergie est grande, plus la réaction cutanée est intense, quel est le sens de "se concentrer"

À propos de la poignée

Product advantage Fast and scar-less Spots no longer appear (A) imported 7 joint articulated arm 360 treatment without dead angle and ensuresthe highest energy output minimum energy loss during laser transmission. 2-10mm adjustable spot size Different treatment areas are applicable Energy density is automatically adjusted with spot size. (A) The combination different laser pulse durations, Provide an optimal method for shattering all sizes of pigment particles.

Effet du traitement

Caractéristiques: 1. Haute performance: Le système laser Ruby a un rendement énergétique élevé et une densité de puissance élevée, permettant une chirurgie et un traitement rapides et efficaces. 2. Sécurité: Le système utilise une technologie laser avancée pour contrôler avec précision la profondeur et l'intensité du faisceau laser, minimisant ainsi les dommages aux tissus environnants. 3. Multifonctionnel: le système laser Ruby peut être utilisé pour une variété de chirurgies et de traitements, y compris l'élimination de la peau, le traitement des maladies vasculaires, la réparation des cicatrices, etc. 4. Haute précision: le système dispose de fonctions de positionnement et de contrôle du faisceau laser de haute précision, peut manipuler avec précision le tissu cible, améliorer le taux de réussite de la chirurgie et l'effet du traitement. 5. Portabilité: Le système Ruby Laser adopte une conception compacte, facile à transporter et à déplacer, adaptée à différents environnements cliniques.

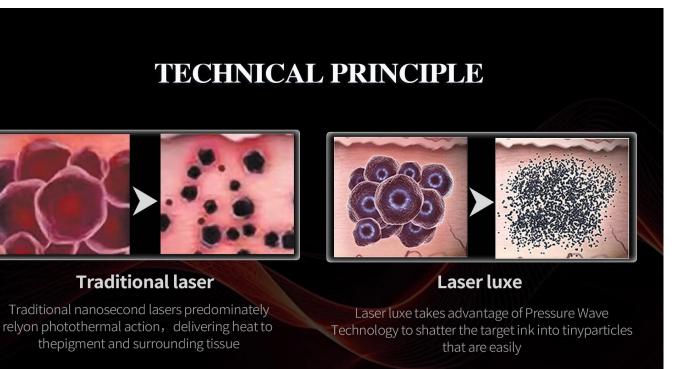

755 longueurs d'onde utilisées pour blanchir et jaunir éliminent rapidement les pigments de poussière et restaurent facilement votre peau blanche. Le laser picoseconde de 532 nm a le meilleur effet sur les tatouages jaunes, suivis des tatouages rouges. Le laser picoseconde de 1 064 nm fonctionne mieux pour les tatouages noirs. 532 Wavelength est utilisé pour traiter les taches épidermiques telles que les taches de rousseur, les taches de café, les taches de photovieillissement, les marques d'acné et les rides, ainsi que les tatouages rouges et jaunes. 1064 utilisé pour traiter les taches cutanées telles que les cyanmoles brunes, les otamoles, le chloasma, la pigmentation, le blanchiment et l'éclaircissement pour éliminer les tatouages jaunes, noirs et bleus peuvent être lavés, utilisés pour traiter l'acné, réduire les pores et resserrer la peau, pour obtenir l'effet de rajeunissement de la peau.

Before & After




Parameters Table		
Device Name	Laser luxe	
Wavelength	1064nm 755nm 532nm	
Screen Size	12 inch 4K Style touch screen	
Pulse Duration	~7ns@1064nm ~6.5ns@532nm	
Frequency	1-10hz	
Spot size	2-10mm adjustable	
Energy	1064/1000mj 755/1000mj 532/1000mj	
Beam of light transmission	7 articular-arm of light guide transmitting	
Indicator of aiming light	650 red diode laser	
Cooling	Water cooling+Air cooling	
Voltage	AC220V/110V 50HZ/60HZ	
Demension of machine	93.6*92.7*39cm	
Package	Aluminum box	
Warranty	2 years	

Accessoires de la machine de détatouage au laser Nd Yag à commutation Q au laser picoseconde pour blanchiment de la peau : De plus, nous disposons également de divers accessoires afin d'offrir à nos clients un excellent service.

Laser q-switch nanoseconde impulsion courte 755 532 1064, thérapie vasculaire, réparation des cicatrices, machine de détatouage au laser picoseconde





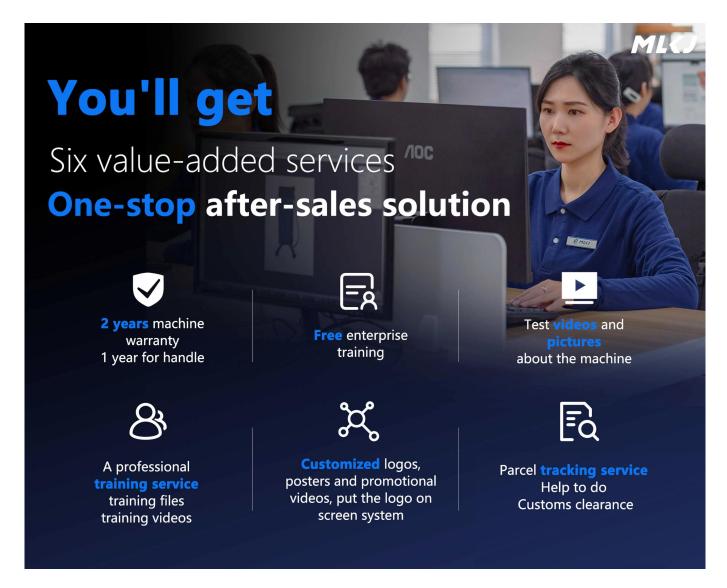

Service après vente:

- * Compte tenu de la longue distance qui nous sépare de nos clients et afin de mieux servir nos clients, * Notre société construit une équipe de service après-vente technologique professionnelle.
- *Notre technicien fournira une solution rapide à tout problème de machine et préparera les documents pour vous dans les 24 heures.
- *Vous pouvez également nous contacter par téléphone, en ligne, etc.

Apprenez-en plus sur les produits et les connaissances en matière de beauté, n'hésitez pas à nous consulter! Service en ligne 7*24 heures!