

Vente chaude laser co2 fractionné médical approuvé par la fda équipement laser co2 fractionné



1, application du laser co2 fractionnaire portable médical :

- 1) Enlevez l'acné, la cicatrice d'acné, la cicatrice, etc.
- 2) Dissiper les rides autour des yeux, les pattes d'oie et les rides formées par le manque d'eau ;
- 3) réduire efficacement les rides sur le visage, le front, les articulations et les stries gravidiques ;
- 4) Dissiper les taches de rousseur, les naevus zygomatiques et autres taches formées par des changements pathologiques hyperchromes ;
- 5) Resserrer la peau et soulever le visage ;
- 6) Enlevez les stries gravidiques et autres cicatrices profondes
- 7) Enlevez le tatouage de toutes les couleurs
- 8) os coupé
- 9) fonction de serrage vaginal en option

TREATMENT EFFECT T



before treatment



during treatment



after treatment



after 30days

Acne Scars



Hypertrophic Scars



Chicken Pox Scars



Burn Scars



Surgery Scars



Accident Scars



RF treatment effect



Acne Removal

Skin Rejuvenation

Skin lift

Wrinkle Removal

Speckle Removal


2, profondeur de traitement du laser co2 fractionnaire portable médical :

Le traitement du laser co2 fractionné est réglable de 50 à 2000 μm , Max est de 2 mm. Parce que la lumière infrarouge de 10600 μm

La longueur d'onde changera les fibres élastiques à une profondeur de 2 mm, de sorte que le laser co2 fractionnaire contrôle la profondeur de 2 mm pour résoudre le

Problème de peau photovieillie

WORKING PRINCIPLE

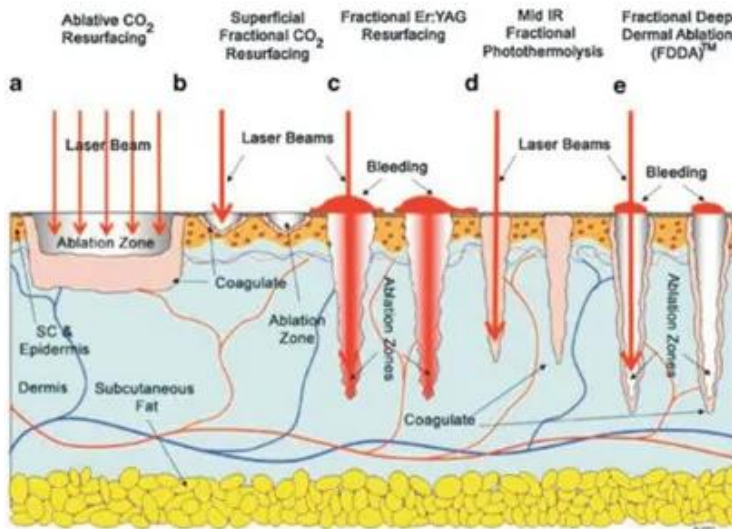

The CO₂ laser uses a unique head piece which tracks the CO₂ 10.6 μ m wavelength light as it passes light through its optical lens to penetrate the skin. We can control the depth of the penetration from only a few micrometers in depth (only as deep as a few sheets of paper) to much deeper with tiny thermal channels. This will also determine the length of healing, the number of treatments and the cost. Each thermal channel creates a small micro-injury but does not significantly disturb or disrupt the surrounding tissue.


These microscopic injuries caused by the laser (around 15-20% of the treated area) are the beginning of the healing process. By creating thousands of these perforations underneath the skin, your epidermis layer starts to heal from the edge of these microscopic perforations very quickly. By healing so fast it remodels, tightens and stimulates the collagen, your skin tightens, which in turn smooths out lines, and significantly improves your skin's tone and complexion.



3, Femme Traitement privé du laser co2 fractionnaire portable médical --- resserrement vaginal et rajeunissement.




Use an articulate arm probe with automatically 360° rotation technology, producing in 50-70° C at a controlled depth inside the vaginal mucosa - stimulates collagen contraction, restructuring and regeneration; promotes collagen fiber proliferating, remodeling; improves vaginal mucosa microcirculation; increases cell secretion and dynamic reaction function; corrects PH value of vaginal inside;

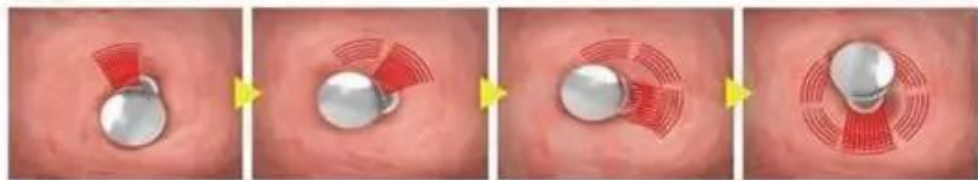

Therapeutic schemes

Improves the inside environment; achieve female private parts to significant lasting firming, nourishing and restoring harmonious sexual life. The laser has a photo thermal heating effect on collagen in both the vaginal walls and the urethra which causes restructuring and regrowth of the collagen. This results in thickening and tightening of the vaginal walls and urethra to improve atrophy and prevent urine loss.

4, détails de la machine du laser co2 fractionnaire portable médical :

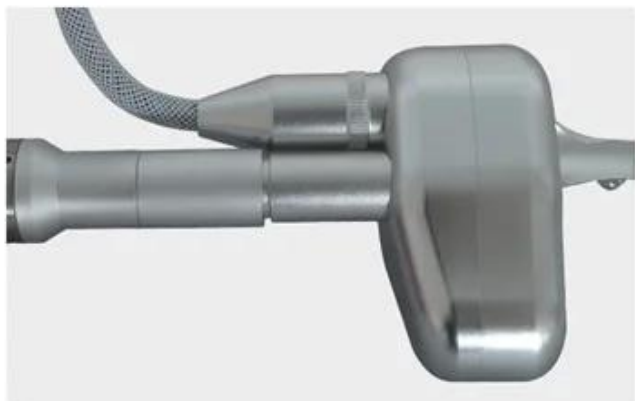

German import scanning head

• Longer life span

Imported scanning heads generally use for 3 - 5 years, with low failure rate, more accurate scanning and long service life.

• Strong energy, more accurate

Strong energy, uniform light emission, more accurate scanning, lower failure rate and long service life.

• Scanning accuracy

The scanning rate of import is more accurate



Section 7 light guide arm

• counter weight

Light guide arm adopts counter weight design, which makes it more flexible to use and convenient to operate.

• Aluminium material

The light guide arm is made of high-grade aluminum, which has high stability and is lighter.

• Tri - color optional

Equipped with silver, red and blue light guide arms, it can meet different preferences of customers.

Five therapeutic heads

Equipped with scanning head * 1 / cutting head * 1 / private head * 3

• Scanning head efficacy

Tender skin/shrink pores/remove striae gravidarum and chloasma

• Cutting head efficacy

Removing sarcoma / nevus

• Efficacy of private head

Tighten vagina / tender vulva / tender vulva




• Trachea

When working, gas is sprayed out, which has the functions of cooling, cooling and dust removal.




Adjustable dot shape and size

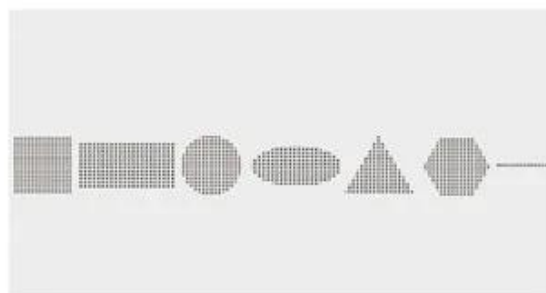

Shape display

5, écran tactile couleur véritable de 8,4 pouces de la machine laser fractionnaire portable co2:

SCREEN IMAGE

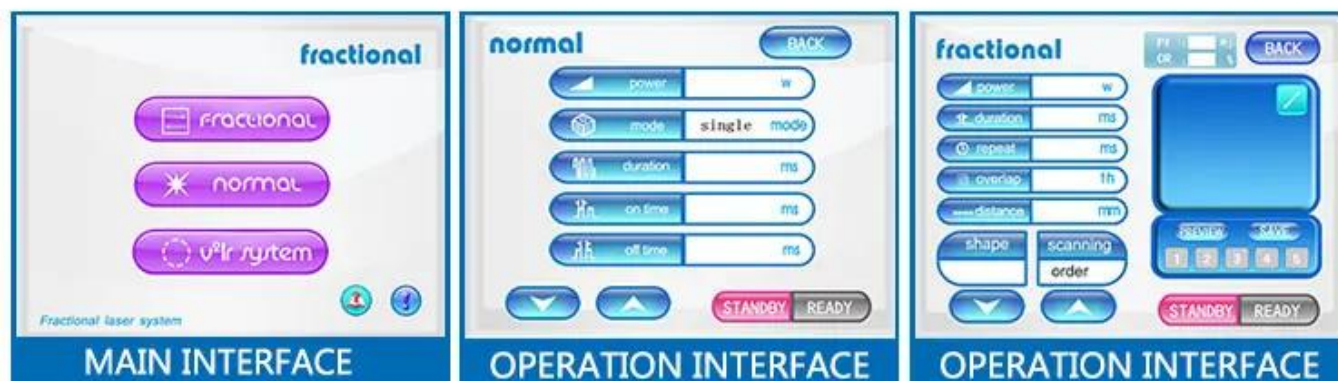

Informations de base	Longueur d'onde	10,6 μm , laser infrarouge lointain
	Radiofréquence pulsée	0,530 W
	Ultra-impulsion	1. Puissance maximale : 120 W largeur 2.Impulsion : 200 à 500 μs est facultatif
	Pulse	Puissance moyenne : 1-30W
Mode matriciel	Numériser des graphiques	Graphiques carrés, rectangles, ronds ou personnalisés
	Quantité de points	400 points maximum
	État de fonctionnement	mode ultra-pulsé
	Mode de balayage	Balayage de séquence ou balayage aléatoire
	Énergie d'impulsion	1mj à 100mj est facultatif pour chaque point.
Technique spécification	Appareil laser	Dispositif laser étanche stimulé par courant continu
	Mise au point du condenseur	f=50mm
	Angle de divergence du faisceau	0,3 mrad
	Taille du spot	0.5-20mm réglable
	Temps de rayonnement / Intervalle de temps	0,01 1 s
	Faisceau de visée	Moins de 2 mW, laser à semi-conducteur rouge 635 nm
	Dispositif de transport de faisceau	Bras articulé à six segments et contrepoids

Nos services

1) Garantie

Nous offrons une garantie de 2 ans aux clients. Entretien gratuit à vie.

2) Formation

Nous offrons à nos clients une formation professionnelle à froid, veillons à ce que chaque client possède les connaissances de fonctionnement professionnelles dans

temps, DVD pour la formation ou la formation en ligne directement. Pas de frais, gratuitement!

3) Service professionnel d'OEM et d'ODM

Comme nous sommes une fabrication professionnelle de machines de beauté en Chine, nous pouvons

offrir à chaque distributeur et revendeur l'OEM/ODM

Service sans frais de conception, tout conseil de notre client est le bienvenu !

4) logo gratuit, langage, conception de couleur

Nous pouvons ajouter votre logo sur l'écran de la machine gratuitement.

Nous pouvons concevoir votre langage à l'écran gratuitement.

Vous pouvez choisir n'importe quelle couleur que vous aimez pour la machine.

5) Livraison

Nous livrerons la machine dans les 3 jours.

Nous pouvons livrer les marchandises partout dans le monde. Cela prend 3 à 5 jours par DHL porte à porte.

Emballage et expédition

Délai de livraison	3-5 jours ouvrables après avoir payé
Méthode de livraison	Offrir un service porte à porte par avion, tel que DHL UPS TNT.
Emballage	Boîte en aluminium solide avec mousse

ABOUT SHIPPING

3-5 businessdays delivery

support air cargo & sea cargo as your option !



--Machines de beauté que nous produisons

Laser à diodes 808nm (utiliser une barre laser de frittage d'étain doré, un condensateur TEC, une lampe importée d'Italie)

Laser CO2 fractionné (40W RF, tête de balayage importée)

Laser à 980 diodes (ablation vasculaire spécialisée)

Elight/IPL (7 filtres, grande taille de spot 15*50mm)

laser nd yag (barre laser importée, 5 têtes de traitement)

Laser picoseconde (Six têtes de traitement)

CavitationvideRF (RF tripolaire, RF monopolaire, RF bipolaire)

SHR (super épilation)

Certificat e



BV-France's most authoritative certification body BV Group certification



TUV-Germany's most authoritative certification body Rheinland certification



SGS-Switzerland's most authoritative certification body SGS certification



Italy ECM Certification



ISO 13485

NQA medical system certification



FAQ

1. Est-ce une entreprise fiable ?

Weifang Mingliang Development Co., Ltd. est créée en 2005, engagée dans la R&D, les ventes et les services après-vente de

appareils esthétiques et équipements laser médicaux, même une partie du domaine informatique et

du secteur immobilier. Nous avons un professionnel

équipe intégrant l'optique, les machines, l'électricité et la médecine, pour nous garder en tête dans ce domaine. couvertures d'usine

5000M2 et compte plus de 100 employés.

2 : Qu'en est-il de la livraison ?

Nous pouvons offrir les services porte à porte par voie aérienne ou maritime, en fonction de votre demande réelle. Tels que DHL, UPS, TNT,

FEDEX... par voie aérienne ; et les transports maritimes.

3 : quel est le délai de livraison ?

3-5 jours ouvrables. Énorme stock.

4 : Quel est le forfait ?

Boîtier en alliage d'aluminium solide et beau/boîtier en carton/caisse en bois.

5 : Avez-vous des supports technologiques opportuns ?

Nous avons une équipe de soutien technologique professionnelle pour vos services en temps opportun. Nous préparons les documents techniques

pour vous, vous pouvez également nous contacter par téléphone, webcam, chat en ligne (googletalk, MSN, skype, yahoo...).

6 : Quel est le mode de paiement ?

T/T, WESTERN UNION, engagement et etc.

7 : Si les machines sont cassées pendant l'expédition, nous soutiendrez-vous ?

Généralement, notre client achètera l'assurance avant l'expédition, évitera toute perte d'argent due au transport difficile.

Nous vous aiderons à résoudre les réclamations auprès des compagnies d'assurance pour récupérer votre argent à temps.