



**Depilazione multifunzionale elight ipl laser a diodi 808nm e rimozione del tatuaggio yag con rf**

Modello	Elightlaser a diodi 808nmlaser nd yagRF
Applicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Depilazione, rimozione delle lentiggini</li> <li>2) Ringiovanimento della pelle</li> <li>3)Trattamento della pigmentazione</li> <li>4)Eliminare le rughe</li> <li>5) Eliminazione dell'acne</li> <li>6)Rimozione del contorno occhi</li> <li>7)Rimozione del ricamo del sopracciglio</li> <li>8)Rimozione del tatuaggio</li> <li>9)Rimozione delle lentiggini</li> </ul>

Fonte di luce	Luce pulsata intensa
Manipolo	Una maniglia Elight Una maniglia laser a diodi 808 nm Una maniglia laser nd yag e una maniglia RF
Lunghezza d'onda	IPL: 420/510/690~1200NM (standard IPL) 585/640/755~1200 nm (opzionale) SHR: 640-690NM
Tempo di ritardo dell'impulso	1~50ms
Fluidità	2~15ms
Schermo	Touchscreen a colori da 8,4 pollici
Dimensione del punto	12x20 mm, 12x35 mm, 15x50 mm
Q-Switched Nd	ND: laser YAG
Lunghezza d'onda	1064, 532 e 1320 nm
Energia impulsiva	0-800mJ 0-300mJ
Energia di SHR	1-50J
Sistema di raffreddamento	Circolazione dell'aria e dell'acqua fredda, testata di trattamento con temperatura di raffreddamento a semiconduttore regolabile
Energia	1600-3000 W
Fonte elettrica	-4----0
Metodo di imballaggio	Imballaggio in alluminio
Metodo di imballaggio	Imballaggio in alluminio

## **Depilazione laser a diodi ipl multifunzionale elight 808nm e rimozione del tatuaggio yag**

**Maniglia laser a diodi 808 nm** per una depilazione super veloce

**Maniglia e-luce (IPLRF)**. per il ringiovanimento della pelle, il rafforzamento della pelle, la rimozione dell'ance, la depilazione e la cura della pelle, ecc.

**impugnatura laser nd yag** per la rimozione del tatuaggio, la rimozione del contorno occhi, ecc

**testa rf** per dimagrimento del viso e del corpo, ringiovanimento della pelle, ecc.

# Advantage

- **Diode laser handle**

Painless hair removal, Permanent hair removal, Suitable for all skin tones.

- **Elight handle**

Elight for hair removal ,skin rejuvenation,vascular therapy ,pigmentation therapy,acne therapy.

- **ND YAG Laser handle**

ND Yag laser for tattoo removal, eyeline remova, eyebrow ,embroidery removal. freckle removal.

- **RF handle**

Skin tightening/lifting, wrinkle removal on bod



# DIODE LASER

755/808/1064nm diode laser, for all type skin hair removal, painless

**755** NM

The Power of Diversity



755nm

**808** NM

Up To Speed



808nm

**1064** NM

Dedicated to Darker Skin



1064nm





## One minute cooling

Suitable for hair removal on any part of the body



Arms



Legs



Face



Armpits



Back



Chest




## How does it work

E-light IPL for Hair removal/Skin rejuvenation/Vascular Job/Pigmentation treatment/Acne clearance

Face and body with big and small treatment head.

Through the scientific design of diode laser handle, the high-energy laser beam instantly penetrates the skin and reaches the hair follicle during treatment, output light is absorbed by melanin in the hair follicle, so destroying the hair follicle and reach permanent hair removal. The laser pulse width is set shorter than the time that human body's feeling time, a single shot of light is over, but the human body fell painless, then could achieve the painless treatment feeling, to improve the customer's comfortable experience

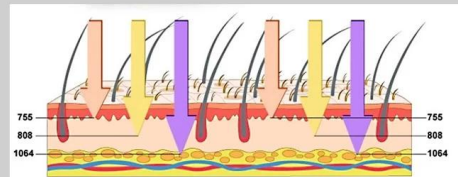

Refuse To Repeat And Leave No Scum



1 week-2 weeks  
(2 times a week)

75% hair loss  
Start to grow slowly  
Smaller pores

3 week-4 weeks  
(2 times a week)

Hair becomes thinner and  
less  
Rejuvenate tender  
skin  
Smooth body

5 week-8 weeks  
(2 times a week)

Select according to hair  
growth status. Use it  
selectively, say goodbye  
Repeated hair removal.

# IPL Handle

- © **High-quality IPL**  
Handpiece with super cooling system
- © **Optional Spot Size**  
15\*50mm,15\*35mm,12\*30mm
- © **Long shots time**  
IPL:150,000 times
- © **7 filters**  
420/510/560/585/640/690/755nm  
Standard:420/510/560/690nm



**420nm**

Acne removal  
Vascular  
treatment

**510nm**

Pigmentation  
therapy,Remove  
freckles

**560nm**

Skin  
rejuvenation  
wrinkle removal

**585nm**

Remove Red  
blood silk

**640nm**

Hair removal  
(light skin)

**690nm**

Hair removal  
(brown skin)

**755nm**

Hair removal  
(black skin)





# ND YAG

## 5 Treatment Heads

532: Remove colored tattoos.  
 755 honeycomb head: used to remove age spots, freckles, and chloasma. little damage to skin  
 Adjustable parameter 1064: for tattoo removal, eyebrow clearing  
 Non-adjustable parameter 1064: used for removing tattoos and clearing eyebrows  
 1320: large area treatment, large spot, fast treatment speed and good effect




## ND YAG ADUANTAGE

Imported crystal bonding laser rod, best quality , shot more than 1.5 million times  
 Counter on the handle, more easy to get the total shot time  
 LED red indicator, more easy to aim on the treatment area.  
 5 treatment tips for multi fuctions: tattoo removal, skin rejuvenation, pigment removal, carbon peeling...



# RF Handle

Suitable to 6 kinds of therapy area, to make sure the treatment on the corner of eye, and other area on face.

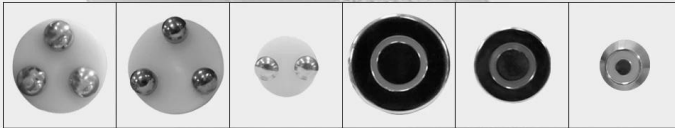

36mm big tripolar rf head


28mm small tripolar rf head

12mm eye-rf

38mm bipolar-rf

28mm bipolar-rf

14mm bipolar-rf

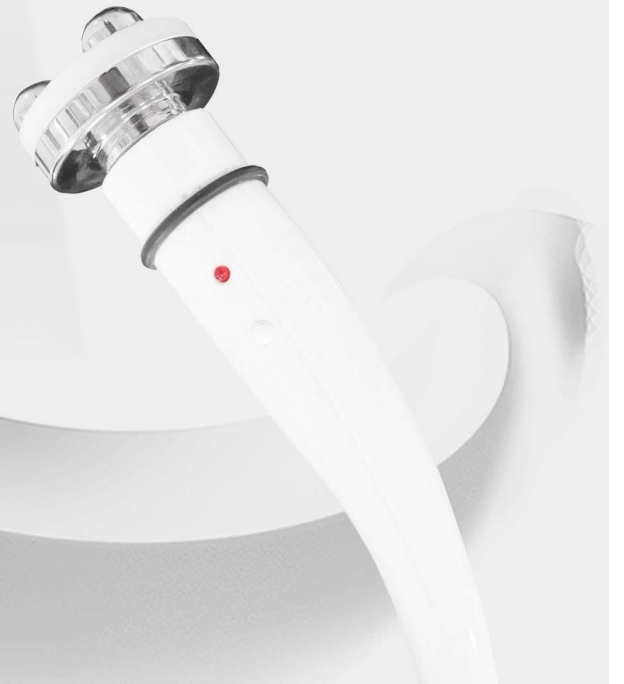

Depilazione laser a diodi ipl multifunzionale elight 808nm e rimozione del tatuaggio yag

Touch screen a colori da 14 pollici, skin uomo e donna, 6 lingue a scelta.

La tua lingua e il tuo logo possono essere aggiunti liberamente.

## 14 inch true color touch screen

Professional Screen, Easy operation



Tempi di consegna: 3-5 giorni lavorativi dalla ricezione del pagamento.

Termini di pagamento: T/T (bonifico bancario), Western Union

Garanzia: 2 anni per l'intera macchina, 1 anno per la maniglia

Modo di spedizione: servizio porta a porta via aerea, DHL/UPS/TNT

Confezione: scatola di alluminio con schiuma rigida

## Packing

safe and thoughtful packaging service



### Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,  
one-year warranty.

**OEM&ODM service for distributor.**

### Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)  
Can Keep You Operate It Easily.



### 3-5 business days delivery

Professional guide:

24 Hours Professional online customer service,