



EXFU

CO2 laser beauty

Gynecology

Fractional

Cutting

3 in1 multifunctional
CO2 laser beauty equipment
power reaches 40w
professional medical level



Korea 7 joints light guiding arm

360°, smooth operation
100% korea import reliable quatity
7 joins articulated light guiding arm
Greatly reducing energy loss
Convenient and flexible in operation
Stylish appearance and excellient use feeling



Molteplici modalità di funzionamento Continuo, super impulso, diverse modalità operative frazionarie.


Regolabile Il diametro e l'intervallo della macchia focale sono regolabili.

Importazioni USA Il miglior tubo laser USA RF, importato da CONHERENT, prestazioni stabili, alta efficacia

Semplice Facile da smontare il manipolo e appenderlo alla macchina.

South Korea imported light guide arm

7 joins articulated light guiding arm

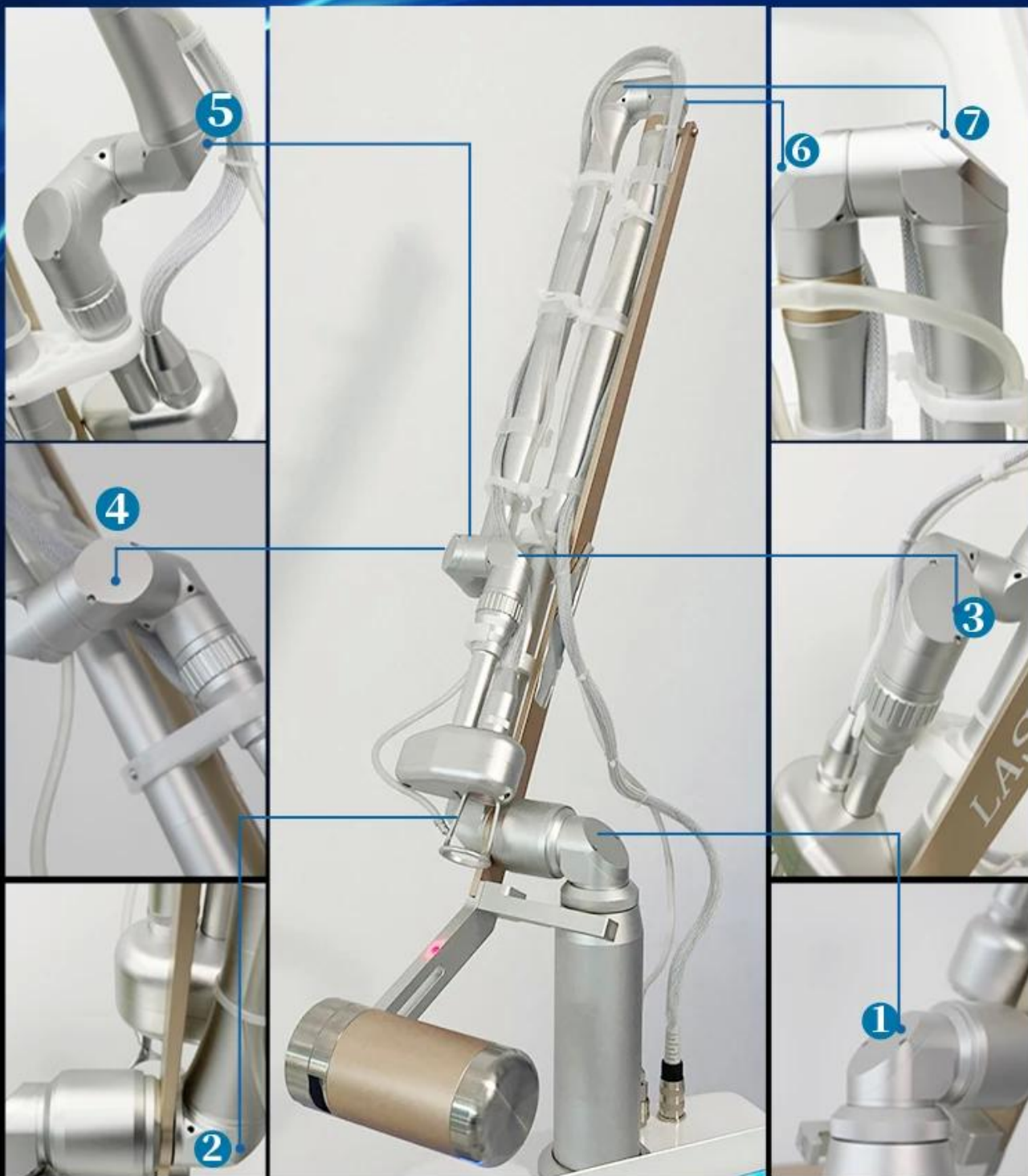

Blando Nessuna pigmentazione e depigmentazione della pelle, non necessita di consumabili extra.
 Protezione di sicurezza Sicurezza Protezione con allarme automatico
 Scorciatoia Trattamento facile e veloce, nessun tempo morto.
 Facile da usare Condotta luce braccio snodato
 Ampia gamma di applicazioni Vari volumi spot sono adatti a diverse aree del corpo

PRODUCT EFFICACY

Skin renewal and regeneration	All colors tattoo removal
Remove acne and scars	Remove all kinds of wrinkles
Remove neplasms	Remove pigment: chloasmas Age spots blemishes, speckle, nevus, birth mark, ect
Treat telangiectasis	Sun damage recovery and skin renewing
Eliminates scrub	Pierce ears
Tighten and whiten skin, pore missing	Effective treatment with skin hydroponic, skin rough



Scann Mode
 Random Sen-
 quential Max dot
 distance
 (Adjustable dot
 shape and size)



Cutting Mode
 CW
 Single
 Pulse

A proposito di Maniglie




• Trachea

When working, gas is sprayed out, which has the functions of cooling, cooling and dust removal.



Adjustable dot shape and size

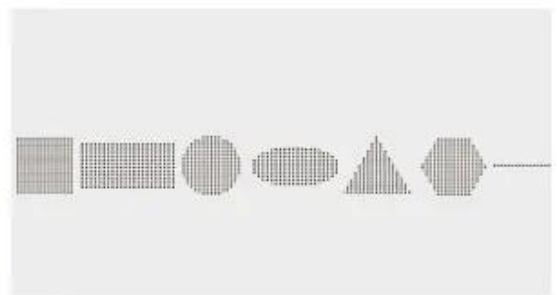

Shape display



• Rf tube

Good stability and high safety



• Metal frame


In addition to the shell, the all-metal internal structure is firmer and has long service life.

Le testine di scansione importate vengono generalmente utilizzate per 3-5 anni, con un basso tasso di guasti, una scansione più accurata e una lunga durata.

Il laser da 40 W ha un'elevata potenza e un'energia sufficiente e può funzionare ininterrottamente per lungo tempo.

Energia forte, emissione di luce uniforme, scansione più accurata, minore percentuale di guasti e lunga durata.

WORKING PRINCIPLE

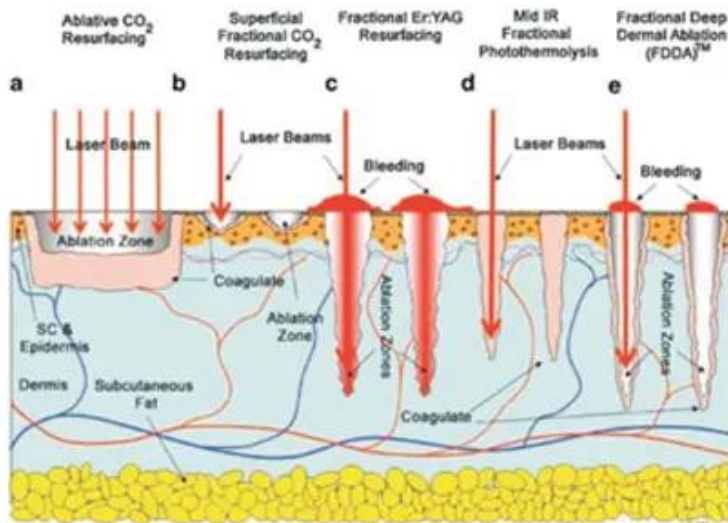

The CO₂ laser uses a unique head piece which tracks the CO₂ 10.6 μ m wavelength light as it passes light through its optical lens to penetrate the skin. We can control the depth of the penetration from only a few micrometers in depth (only as deep as a few sheets of paper) to much deeper with tiny thermal channels. This will also determine the length of healing, the number of treatments and the cost. Each thermal channel creates a small micro-injury but does not significantly disturb or disrupt the surrounding tissue.

These microscopic injuries caused by the laser (around 15-20% of the treated area) are the beginning of the healing process. By creating thousands of these perforations underneath the skin, your epidermis layer starts to heal from the edge of these microscopic perforations very quickly. By healing so fast it remodels, tightens and stimulates the collagen, your skin tightens, which in turn smooths out lines, and significantly improves your skin's tone and complexion.



Confronto degli effetti

TREATMENT EFFECT T



before treatment



during treatment



after treatment



after 30days

Acne Scars



Burn Scars



Hypertrophic Scars



Surgery Scars



Chicken Pox Scars



Accident Scars



Visualizzazione sullo schermo



Simple and practical operation interface

Fractional cutting private multi-function multiple modes of operation
4 scan modes, sequence, random, continue and ultra pulse

Fractional

Normal

Vlr system

Shape

Duration

W

skin rejuvenation

hypertrophic scar

Acne Vulgaris

Body Exfoliants

striae of pregnancy

senile plaques

skin rejuvenation

hypertrophic scar

Acne Vulgaris

Body Exfoliants

senile plaques

Grande touch screen a colori da 14 pollici

Esperienza tocco super cool

6 lingue a scelta, è possibile aggiungere una lingua speciale

Il servizio OEM è accettato, come la regolazione dei parametri, include l'ambito di energia/frequenza/tempo

12 tipi Modelli di uscita.

Tipo laser	Macchina vaginale laser laser CO2 vaginale Laser frazionato a CO2
Lunghezza d'onda laser	1060 nm
Potenza laser	fino a 40 W (opzionale)
Sistema di illuminazione	7 braccia articolate
Durata dell'impulso	100-5000 us
Facula	modalità singola
Diametro focalizzato del raggio	0,25 mm
Zona focale	0,05 mm ²
Modulo di uscita	Ultra Pulse, frazionato
Modalità Lavoro	Caricamento intermittente
Modalità di scansione	Sequenza, casuale, parallelo (commutabile)
Forme di scansione	Triangolo/quadrato/rettangolo/rotondo/ovale/esagono/lineare
Area del diagramma	≤20mm*20mm
Interfaccia touch screen colorato	14 pollici
Sistema di refrigerazione	Raffreddamento ad aria, raffreddamento ad acqua
Potenza di ingresso	CA 230 V ± 10%, 50 Hz/ CA 110 V ± 10% 60 Hz
Dimensione del punto	≥0,2 mm al fuoco
Tempo di radiazione / Tempo di intervallo	0,01 1 s
Fascio di puntamento	Raggio infrarosso 635nm
Alimentazione elettrica	110/220V10% 60Hz 6A