

Apparecchiature laser a co2 frazionarie approvate dalla fda del laser co2 medico medico di vendita caldo



1, Applicazione del laser co2 frazionato portatile medico:

- 1) Rimuovere l'acne, la cicatrice dell'acne, la cicatrice e così via;
- 2) Dissolvi le rughe intorno agli occhi, le zampe di gallina e le rughe formate dalla mancanza di acqua;
- 3) Ridurre efficacemente le rughe del viso, della fronte, delle articolazioni e delle strie gravidе;
- 4) Dissolvi lentiggini, nevo zigomatico e altre macchie formate da alterazioni patologiche ipercromiche;
- 5) Stringere la pelle e sollevare il viso;
- 6) Rimuovere le strie gravidarum e altre cicatrici profonde
- 7) Rimuovere tutti i colori del tatuaggio
- 8) osso tagliato
- 9) funzione di serraggio vaginale opzionale

TREATMENT EFFECT T



before treatment



during treatment



after treatment



after 30days

Acne Scars



Hypertrophic Scars



Chicken Pox Scars



Burn Scars



Surgery Scars



Accident Scars



RF treatment effect




2, profondità di trattamento del laser co2 frazionale portatile medico:

Il trattamento del laser co2 frazionato è regolabile da 50 a 2000 μm , il massimo è di 2 mm. Perché la luce infrarossa di 10600 μm

la lunghezza d'onda cambierà le fibre elastiche con una profondità di 2 mm, quindi il laser co2 frazionato controlla la profondità di 2 mm per risolvere il

Problema della pelle fotoinvecchiata

WORKING PRINCIPLE

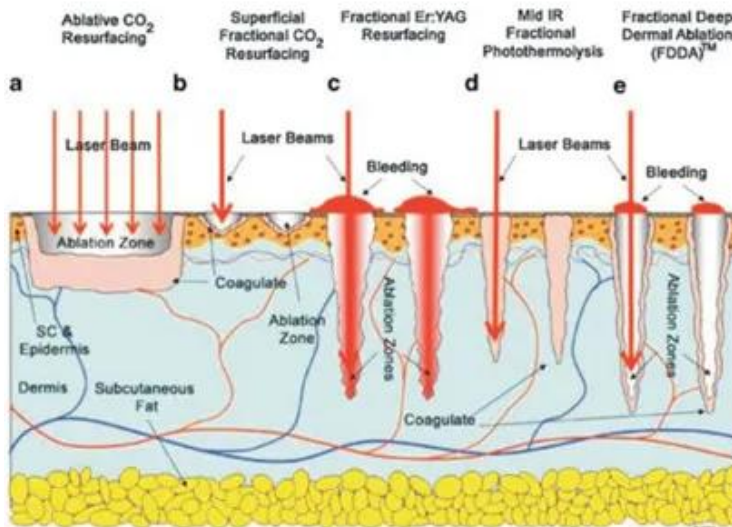

The CO₂ laser uses a unique head piece which tracks the CO₂ 10.6 μ m wavelength light as it passes light through its optical lens to penetrate the skin. We can control the depth of the penetration from only a few micrometers in depth (only as deep as a few sheets of paper) to much deeper with tiny thermal channels. This will also determine the length of healing, the number of treatments and the cost. Each thermal channel creates a small micro-injury but does not significantly disturb or disrupt the surrounding tissue.


These microscopic injuries caused by the laser (around 15-20% of the treated area) are the beginning of the healing process. By creating thousands of these perforations underneath the skin, your epidermis layer starts to heal from the edge of these microscopic perforations very quickly. By healing so fast it remodels, tightens and stimulates the collagen, your skin tightens, which in turn smooths out lines, and significantly improves your skin's tone and complexion.



3, donna Trattamento privato del laser co2 frazionale portatile medico --- rafforzamento e ringiovanimento vaginale.



Use an articulate arm probe with automatically 360° rotation technology, producing in 50-70° C at a controlled depth inside the vaginal mucosa - stimulates collagen contraction, restructuring and regeneration; promotes collagen fiber proliferating, remodeling; improves vaginal mucosa microcirculation; increases cell secretion and dynamic reaction function; corrects PH value of vaginal inside;

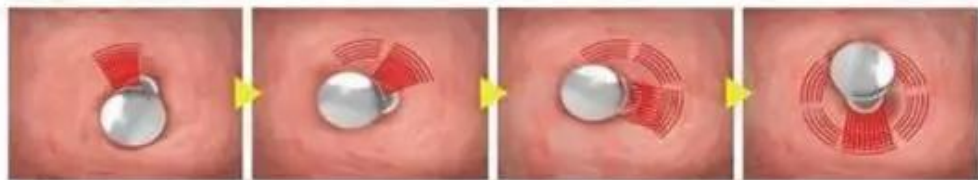

Therapeutic schemes

Improves the inside environment; achieve female private parts to significant lasting firming, nourishing and restoring harmonious sexual life. The laser has a photo thermal heating effect on collagen in both the vaginal walls and the urethra which causes restructuring and regrowth of the collagen. This results in thickening and tightening of the vaginal walls and urethra to improve atrophy and prevent urine loss.

4, dettagli macchina del laser co2 frazionale portatile medico:



German import scanning head

• Longer life span

Imported scanning heads generally use for 3 - 5 years, with low failure rate, more accurate scanning and long service life.

• Strong energy, more accurate

Strong energy, uniform light emission, more accurate scanning, lower failure rate and long service life.

• Scanning accuracy

The scanning rate of import is more accurate



Section 7 light guide arm

• counter weight

Light guide arm adopts counter weight design, which makes it more flexible to use and convenient to operate.

• Aluminium material

The light guide arm is made of high-grade aluminum, which has high stability and is lighter.

• Tri - color optional

Equipped with silver, red and blue light guide arms, it can meet different preferences of customers.

Five therapeutic heads

Equipped with scanning head * 1 / cutting head * 1 / private head * 3

• Scanning head efficacy

Tender skin/shrink pores/remove striae gravidarum and chloasma

• Cutting head efficacy

Removing sarcoma / nevus

• Efficacy of private head

Tighten vagina / tender vulva / tender vulva



scanning head

cutting head

private head




• Trachea

When working, gas is sprayed out, which has the functions of cooling, cooling and dust removal.



Adjustable dot shape and size

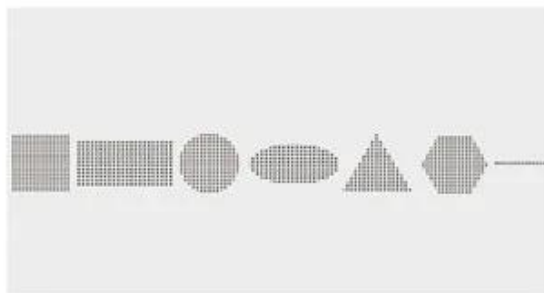

Shape display

Touch screen a colori da 5, 8,4 pollici della macchina laser frazionale portatile a co2:

SCREEN IMAGE



Informazioni di base	Lunghezza d'onda	Laser a infrarossi lontani da 10,6 μm
	Radiofrequenza pulsata	0,530 W
	Ultra-Polso	1. Potenza massima: 120 W 2. Larghezza dell'impulso: da 200 a 500 μs è opzionale
	Pulse	Potenza media: 1-30 W
Modalità matrice	Scansione grafica	Grafiche quadrate, rettangolari, tonde o personalizzate
	Quantità di punti	400 punti al massimo
	Stato di lavoro	modalità ultra pulsata
	Modalità di scansione	Scansione in sequenza o Scansione casuale
	Energia pulsata	Da 1 mj a 100 mj è opzionale per ogni punto.
Tecnico specifica	Apparecchio laser	Dispositivo laser sigillato stimolato da corrente continua
	Messa a fuoco del condensatore	f=50 mm
	Angolo di divergenza del fascio	0,3 mrad
	Dimensione del punto	0,5-20 mm regolabile
	Tempo di radiazione / Tempo di intervallo	0,01 1 sec
	Fascio di puntamento	Laser a semiconduttore rosso inferiore a 2 mW, 635 nm
	Dispositivo di trasporto del raggio	Braccio articolato a sei segmenti e contrappeso

I nostri servizi

1) Garanzia

Forniamo 2 anni di garanzia ai clienti. Manutenzione gratuita per tutta la vita.

2) Formazione

Offriamo freddamente ai nostri clienti una formazione professionale, assicuriamo che ogni cliente possieda le conoscenze operative professionali in

tempo, DVD per la formazione o la formazione online direttamente. Nessun addebito, gratis!

3) Servizio professionale dell'OEM e del ODM

Poiché siamo una produzione professionale di macchine per la bellezza in Cina, possiamo offrire a

ogni distributore e rivenditore l'OEM/ODM

Servizio senza alcun costo di progettazione, qualsiasi consiglio del nostro cliente è un caldo benvenuto!

4) Logo, linguaggio, design a colori gratuiti

Possiamo aggiungere gratuitamente il tuo logo sullo schermo della macchina.

Possiamo progettare il tuo linguaggio sullo schermo gratuitamente.

Puoi scegliere qualsiasi colore che ti piace per la macchina.

5) Consegna

Consegneremo la macchina entro 3 giorni.

Siamo in grado di consegnare la merce in tutto il mondo. Ci vogliono 3 ~ 5 giorni da DHL porta a porta.

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	3-5 giorni lavorativi dopo aver pagato
Metodo di consegna	Offri un servizio porta a porta per via aerea, come DHL UPS TNT..
Imballaggio	Robusta scatola in alluminio con schiuma

ABOUT SHIPPING

3-5 businessdays delivery

support air cargo & sea cargo as your option !



--Macchine di bellezza che produciamo

Laser a diodi 808 nm (utilizzare la barra laser di sinterizzazione dello stagno d'oro, il condensatore

TEC, la lampada importata dall'Italia)

Laser frazionato CO2 (40 W RF, testina di scansione importata)

Laser a diodi 980 (asportazione vascolare specializzata)

Luce/IPL (7 filtri, dimensione del punto grande 15 * 50 mm)

Laser Nd Yag (barra laser importata, 5 testine di trattamento)

Laser a picosecondi (Sei testine di trattamento)

CavitazioneVuotoRF (RF tripolare, RF monopolare, RF bipolare)

SHR (super epilazione)

Certificat e



BV-France's most authoritative
certification body BV Group certification



TUV-Germany's most authoritative
certification body Rheinland certification



SGS-Switzerland's most authoritative
certification body SGS certification



Italy ECM Certification



ISO 13485

NQA medical system
certification



FAQ

1. È un'azienda affidabile?

Weifang Mingliang Development Co., Ltd. è stata fondata nel 2005, impegnata in ricerca e sviluppo, vendita e servizi post-vendita di

dispositivi estetici e apparecchiature laser medicali, anche facenti parte dell'area IT e del settore immobiliare. Abbiamo un professionista

team che si integra con ottica, macchinari, elettricità e medicina, per mantenerci all'avanguardia in questo campo. coperture di fabbrica

5000M2 e ha più di 100 dipendenti.

2: E la consegna?

Possiamo offrire i servizi porta a porta via aerea o via mare, dipende solo dalla tua effettiva richiesta. Come DHL, UPS, TNT,

FEDEX... per via aerea; e i trasporti marittimi.

3: qual è il tempo di consegna?

3-5 giorni lavorativi. Azione enorme.

4: Qual è il pacchetto?

Robusta e bella custodia in lega di alluminio/custodia in cartone/custodia in legno.

5: Avete dei supporti tecnologici tempestivi?

Abbiamo un team di supporto tecnologico professionale per i tuoi servizi tempestivi. Prepariamo i documenti tecnici

per te, inoltre, puoi contattarci tramite telefono, webcam, chat online (googletalk, MSN, skype, yahoo...).

6: Qual è il metodo di pagamento?

T/T, WESTERN UNION, IMPEGNO ed ecc.

7: Se le macchine si rompono durante la spedizione, ci sosterrete?

Generalmente il nostro cliente acquisterà l'assicurazione prima della spedizione, evitando la perdita di denaro a causa di un trasporto irregolare.

Ti aiuteremo a risolvere i reclami con le compagnie assicurative per riscuotere i tuoi soldi indietro nel tempo.