



# 4IN1 MACHINE

- Diode laser
- E-light
- ND YAG
- RF



**Wielofunkcyjny laser diodowy elight ipl 808nm usuwanie włosów i usuwanie tatuażu yag za pomocą RF**

Model	Lasery diodowy Elight808nm Laser nd-yag RF
-------	--

Aplikacja	1) Depilacja, usuwanie piegów 2) Odmłodzenie skóry 3) Leczenie pigmentacją 4) Wyeliminuj zmarszczki 5) Usuwanie trądziku 6) Usuwanie linii oczu 7) Usunięcie haftu z brwi 8) Usunięcie tatuażu 9) Usuwanie piegów
Źródło światła	Intensywne światło pulsacyjne
Rękojeść	Jeden uchwyt Elight Jedna rękojeść lasera diodowego 808 nm Jedna rękojeść lasera Yag i jedna rękojeść RF
Długość fali	IPL: 420/510/690~1200NM (standard IPL) 585/640/755 ~ 1200 nm (opcjonalnie) SHR:640-690NM
Czas opóźnienia impulsu	1 ~ 50 ms
Płynność	2 ~ 15 ms
Ekran	Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 8,4 cala
Rozmiar plamki	12x20mm, 12x35mm, 15x50mm
Q-Switch Nd	ND: Laser YAG
Długość fali	1064 i 532 i 1320 nm
Energia pulsu	0-800mj 0-300mj
Energia SHR	1-50J
System chłodzenia	Cyrkulacja powietrza i zimnej wody, głowica zabiegowa z regulowaną temperaturą chłodzenia półprzewodników
Moc	1600-3000W
Źródło elektryczne	-4----0
Metoda pakowania	Opakowanie aluminiowe
Metoda pakowania	Opakowanie aluminiowe

## **Wielofunkcyjny laser diodowy elight ipl 808nm do usuwania włosów i usuwania tatuażu Yag**

**Rękojeść lasera diodowego 808nm** do superszybkiego usuwania włosów

**Uchwyt e-light (IPLRF)**. do odmładzania skóry, napinania skóry, usuwania włosów, usuwania włosów i pielęgnacji skóry itp.

**rękojeść lasera II Yag** do usuwania tatuaży, usuwania linii oczu itp

**rf udaj się do** wyszczuplanie twarzy i ciała, odmładzanie skóry itp.

# Advantage

- **Diode laser handle**

Painless hair removal, Permanent hair removal, Suitable for all skin tones.

- **Elight handle**

Elight for hair removal ,skin rejuvenation,vascular therapy ,pigmentation therapy,acne therapy.

- **ND YAG Laser handle**

ND Yag laser for tattoo removal, eyeline remova, eyebrow ,embroidery removal. freckle removal.

- **RF handle**

Skin tightening/lifting, wrinkle removal on bod



# DIODE LASER

755/808/1064nm diode laser, for all type skin hair removal, painless

**755** NM

The Power of Diversity



755nm

**808** NM

Up To Speed



808nm

**1064** NM

Dedicated to Darker Skin



1064nm





## One minute cooling

Suitable for hair removal on any part of the body



Arms



Legs



Face



Armpits



Back



Chest




## How does it work

E-light IPL for Hair removal/Skin rejuvenation/Vascular Job/Pigmentation treatment/Acne clearance

Face and body with big and small treatment head.

Through the scientific design of diode laser handle, the high-energy laser beam instantly penetrates the skin and reaches the hair follicle during treatment, output light is absorbed by melanin in the hair follicle, so destroying the hair follicle and reach permanent hair removal. The laser pulse width is set shorter than the time that human body's feeling time, a single shot of light is over, but the human body fell painless, then could achieve the painless treatment feeling, to improve the customer's comfortable experience

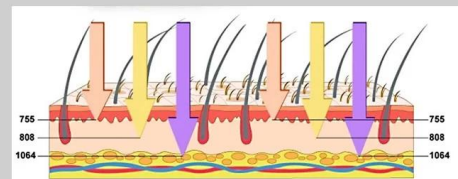

Refuse To Repeat And Leave No Scum



1 week-2 weeks  
(2 times a week)

75% hair loss  
Start to grow slowly  
Smaller pores

3 week-4 weeks  
(2 times a week)

Hair becomes thinner and less  
Rejuvenate tender skin  
Smooth body

5 week-8 weeks  
(2 times a week)

Select according to hair growth status. Use it selectively, say goodbye Repeated hair removal.

# IPL Handle

© **High-quality IPL**

Handpiece with super cooling system

© **Optional Spot Size**

15\*50mm,15\*35mm,12\*30mm

© **Long shots time**

IPL:150,000 times

© **7 filters**

420/510/560/585/640/690/755nm

Standard:420/510/560/690nm



**420nm**

Acne removal  
Vascular  
treatment

**510nm**

Pigmentation  
therapy,Remove  
freckles

**560nm**

Skin  
rejuvenation  
wrinkle removal

**585nm**

Remove Red  
blood silk

**640nm**

Hair removal  
(light skin)

**690nm**

Hair removal  
(brown skin)

**755nm**

Hair removal  
(black skin)





# ND YAG

## 5 Treatment Heads

532: Remove colored tattoos.  
 755 honeycomb head: used to remove age spots, freckles, and chloasma. little damage to skin  
 Adjustable parameter 1064: for tattoo removal, eyebrow clearing  
 Non-adjustable parameter 1064: used for removing tattoos and clearing eyebrows  
 1320: large area treatment, large spot, fast treatment speed and good effect




## ND YAG ADUANTAGE

Imported crystal bonding laser rod, best quality , shot more than 1.5 million times  
 Counter on the handle, more easy to get the total shot time  
 LED red indicator, more easy to aim on the treatment area.  
 5 treatment tips for multi fuctions: tattoo removal, skin rejuvenation, pigment removal, carbon peeling...



# RF Handle

Suitable to 6 kinds of therapy area, to make sure the treatment on the corner of eye, and other area on face.

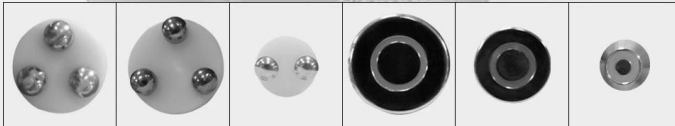

36mm big tripolar rf head


28mm small tripolar rf head

12mm eye-rf

38mm bipolar-rf

28mm bipolar-rf

14mm bipolar-rf

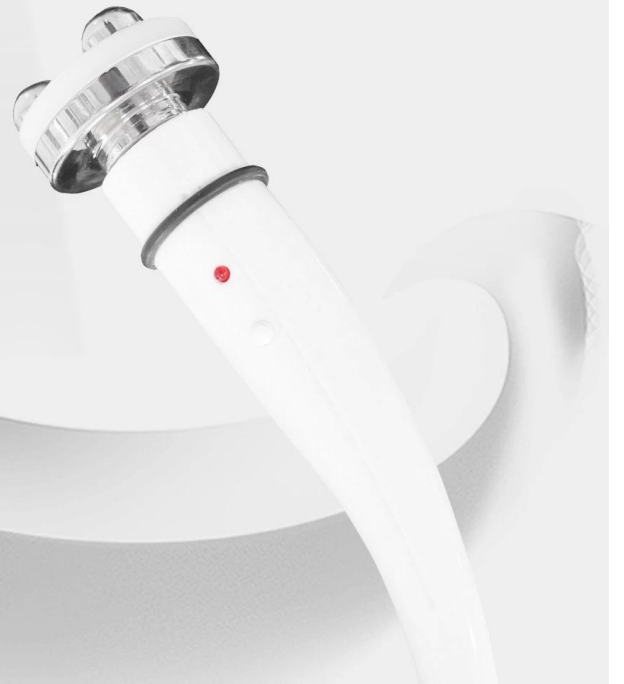

Wielofunkcyjny laser diodowy elight ipl 808nm do usuwania włosów i usuwania tatuażu Yag  
Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 14 cali, skóra mężczyzny i kobiety, 6 języków do wyboru.  
Możesz dowolnie dodać swój język i logo.

## 14 inch true color touch screen

Professional Screen, Easy operation



Czas dostawy: 3-5 dni roboczych po otrzymaniu płatności.

Warunki płatności: T/T (przelew bankowy), Western Union

Gwarancja: 2 lata na całą maszynę, 1 rok na uchwyt

Sposób wysyłki: Usługa od drzwi do drzwi drogą powietrzną, DHL/UPS/TNT

Opakowanie: Aluminiowe pudełko z twardą pianką

## Packing

safe and thoughtful packaging service



### Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,  
one-year warranty.

**OEM&ODM service for distributor.**

### Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)  
Can Keep You Operate It Easily.



### 3-5 business days delivery

Professional guide:  
24 Hours Professional online customer service,