



CO2 laser beauty

Gynecology

Fractional

Cutting

3 in1 multifunctional
CO2 laser beauty equipment
power reaches 40w
professional medical level





Korea 7 joints light guiding arm

360°, smooth operation

100% korea import reliable quatity

7 joins articulated light guiding arm

Greatly reducing energy loss

Convenient and flexible in operation

Stylish appearance and excellient use feeling



Wiele trybów działania Ciągłe, superpulsowe, ułamkowe różne tryby pracy.


Nastawny Średnica plamki ogniskowej i interwał są regulowane.

import USA Najlepsza tuba laserowa RF USA, importowana z CONHERENT, stabilna wydajność, wysoka skuteczność

Prosty Łatwy demontaż rękojeści i zawieszenie w maszynie.

South Korea imported light guide arm

7 joins articulated light guiding arm

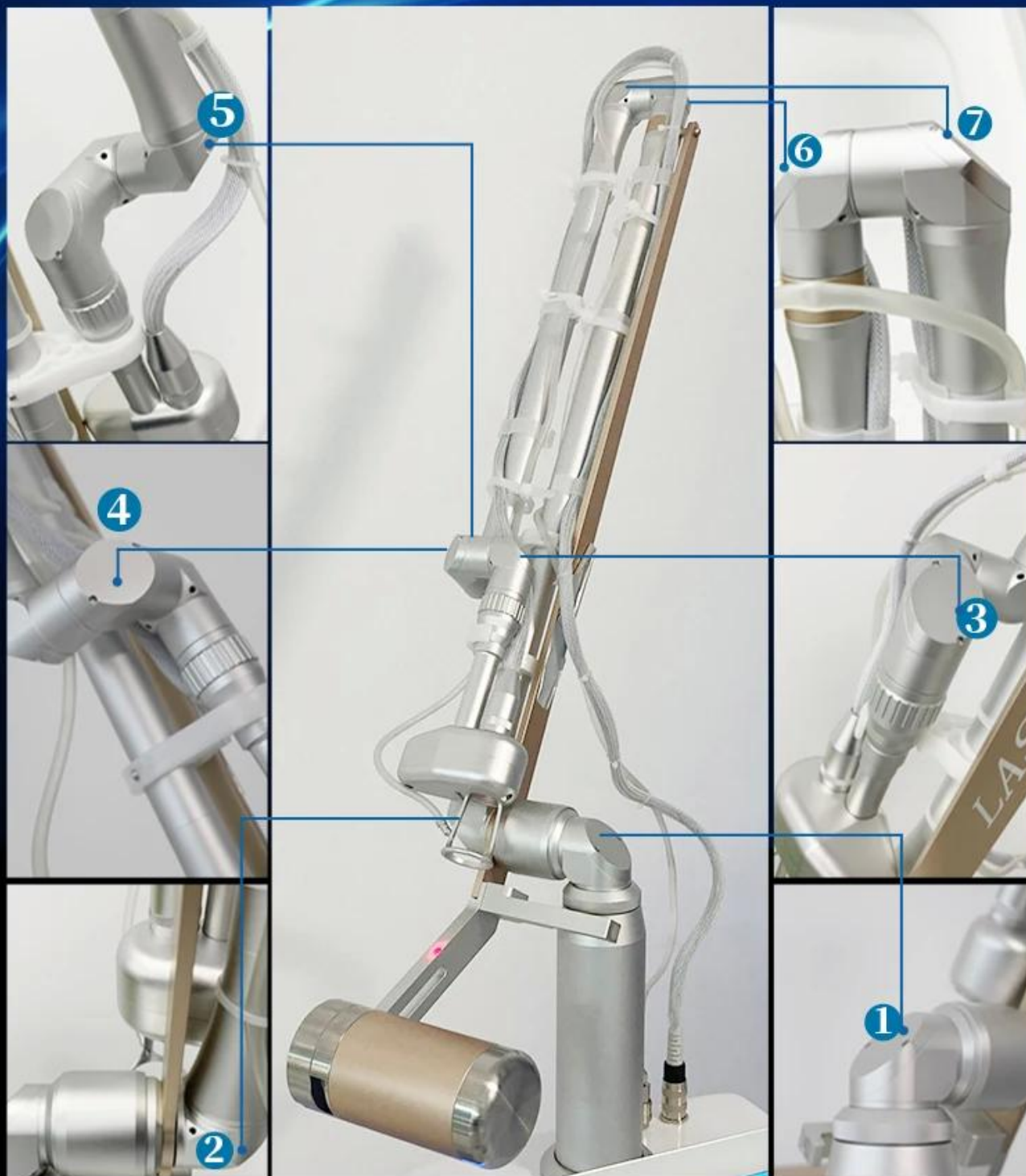

Łagodny Brak pigmentacji i depigmentacji skóry, nie wymaga dodatkowych materiałów eksploatacyjnych.

Ochrona bezpieczeństwa Ochrona bezpieczeństwa z automatycznym alarmem
 Skrót Łatwe i szybkie leczenie, bez przestojów.
 Łatwy w użyciu Przewodnictwo świetlne ramienia przegubowego
 Szeroki zakres zastosowań Różne objętości punktowe są odpowiednie dla różnych
 obszarów ciała

PRODUCT EFFICACY

Skin renewal and regeneration	All colors tattoo removal
Remove acne and scars	Remove all kinds of wrinkles
Remove neplasms	Remove pigment:chloasmas Age spots blemishes, speckle,nevus,birth mark,ect
Treat telangiectasis	Sun damage recovery and skin renewing
Eliminates scrub	Pierce ears
Tighten and whiten skin,pore missing	Effective treatment with skin hydroponic,skin rough



Scann Mode
 Random Sen-
 quential Max dot
 distance
 (Adjustable dot
 shape and size)




Cutting Mode
 CW
 Single
 Pulse

O uchwytach




• Trachea

When working, gas is sprayed out, which has the functions of cooling, cooling and dust removal.

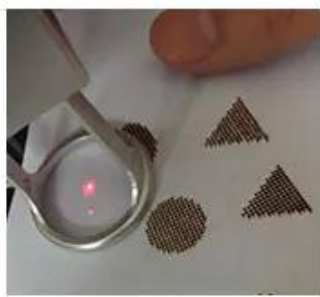

Adjustable dot shape and size

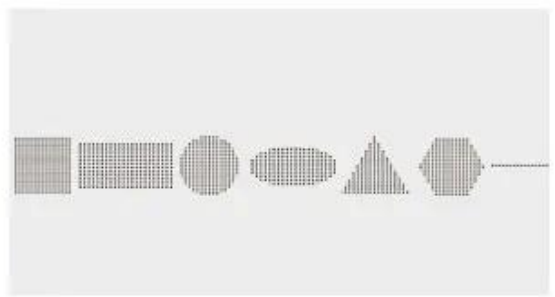

Shape display



• Rf tube

Good stability and high safety



• Metal frame


In addition to the shell, the all-metal internal structure is firmer and has long service life.

Importowane głowice skanujące są zwykle używane przez 3 - 5 lat, z niskim wskaźnikiem awaryjności, dokładniejszym skanowaniem i długą żywotnością.

Laser 40w ma dużą moc i wystarczającą energię i może pracować nieprzerwanie przez długi czas.

Silna energia, równomierna emisja światła, dokładniejsze skanowanie, niższa awaryjność i długa żywotność.

WORKING PRINCIPLE

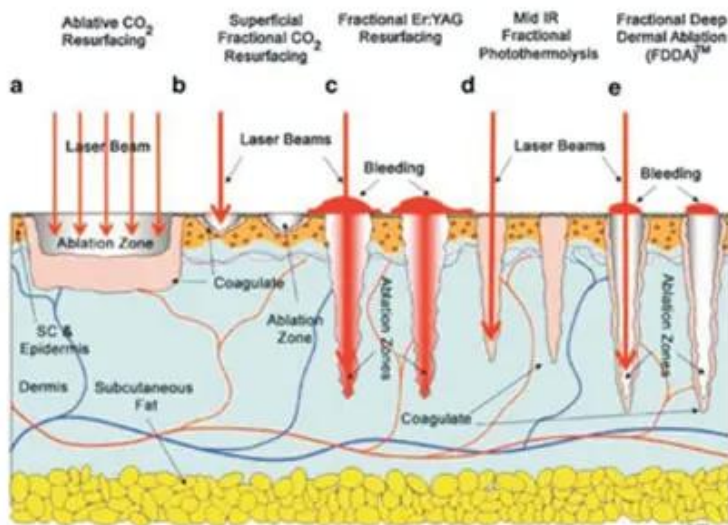

The CO₂ laser uses a unique head piece which tracks the CO₂ 10.6 μ m wavelength light as it passes light through its optical lens to penetrate the skin. We can control the depth of the penetration from only a few micrometers in depth (only as deep as a few sheets of paper) to much deeper with tiny thermal channels. This will also determine the length of healing, the number of treatments and the cost. Each thermal channel creates a small micro-injury but does not significantly disturb or disrupt the surrounding tissue.

These microscopic injuries caused by the laser (around 15-20% of the treated area) are the beginning of the healing process. By creating thousands of these perforations underneath the skin, your epidermis layer starts to heal from the edge of these microscopic perforations very quickly. By healing so fast it remodels, tightens and stimulates the collagen, your skin tightens, which in turn smooths out lines, and significantly improves your skin's tone and complexion.



Porównanie efektów

TREATMENT EFFECT T



before treatment



during treatment



after treatment



after 30days

Acne Scars



Burn Scars



Hypertrophic Scars



Surgery Scars



Chicken Pox Scars



Accident Scars



Wyświetlacz



Simple and practical operation interface

Fractional cutting private multi-function multiple modes of operation
4 scan modes, sequence, random, continue and ultra pulse



Duży, dotykowy ekran o przekątnej 14 cali
 Super fajne wrażenia dotykowe
 6 języków do wyboru, można dodać język specjalny
 Akceptowane są usługi OEM, takie jak regulacja parametrów, w tym zakres energii/wolności/czasu
 12 rodzajów wzorców wyjściowych.

Typ lasera	Laserowa maszyna dopochwowa Co2 Laser dopochwowa Laser frakcyjny CO2
Długość fali lasera	1060nm
Moc lasera	do 40 W (opcjonalnie)
Układ świetlny	7 wspólnych ramion
Czas trwania impulsu	100-5000us
Fakula	tryb pojedynczy
Skupiona średnica wiązki	0,25 mm
Obszar ogniskowy	0,05 mm ²
Formularz wyjściowy	Ultra Puls, ułamkowy
Tryb pracy	Przerywane ładowanie
Tryb skanowania	Sekwencja, losowa, równoległa (przełączana)
Skanowanie kształtów	Trójkąt/kwadrat/prostokąt/okrągły/owalny/sześciokąt/liniowy
Obszar diagramu	≤20mm * 20mm
Kolorowy ekran dotykowy interfejsu	14 cali
Układ chłodniczy	Chłodzenie powietrzem, chłodzenie wodą
Moc wejściowa	AC 230V±10%,50HZ/ AC 110V±10% 60HZ
Rozmiar plamki	≥0,2 mm w ognisku
Czas promieniowania / Czas przerwy	0,01 1 sek
Wiązka celująca	Promieniowanie podczerwone 635nm
Zasilacz	110/220 V 10% 60 HZ 6A