




Laser krótkoimpulsowy: czas trwania $\leq$ nanosekund ($10e-6$ sekund)

[Najlepszy laser do usuwania tatuaży](#)

Cechy:

- ☐ Wykorzystując mechaniczny efekt wybuchu światła, pojedynczy czas trwania emisji jest krótki, ma wysoką energię i moc szczytową;
- ☐ Szerokość impulsu zasadniczo nie jest regulowana;
- ☐ Krótki impuls realizowany jest poprzez technologię Q-switching

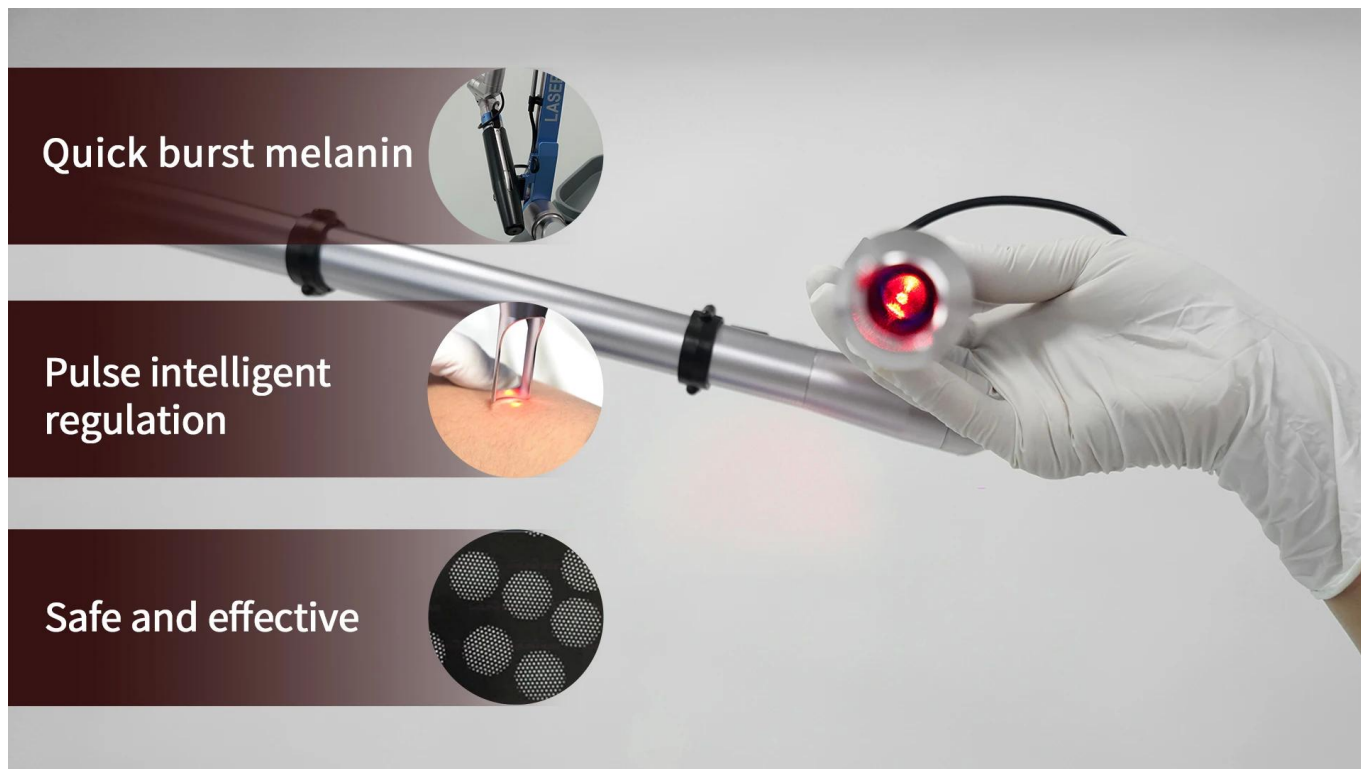

Quick burst melanin

Pulse intelligent regulation

Safe and effective

Informacje o produkcie

Light guide arm imported from South Korea

- **Life can reach 5 million times**

Long service life, up to 5 million exposures, to better meet customer needs.

- **Aluminum**

Equipped with high-quality aluminum light guide arm, quality is guaranteed

- **Counterweight**

The light guide arm adopts a counterweight design, which makes the operation more flexible and convenient



Dzięki 7 prowadzącym ramionom świetlnym światło jest bardziej symetryczne! Decydującym parametrem terapii laserem Q-switch jest gęstość energii (J/cm^2). Laser Q-switch zazwyczaj nie ma możliwości regulacji szerokości impulsu, ustawia tę samą wartość energii świetlnej (mJ), jeżeli im mniejszy obszar działania (im mniejsza średnica plamki), tym większa gęstość energii, tym intensywniejsza reakcja skórna, co oznacza „skupianie się”

O Uchwycie


Product advantage

- ⬆ Fast and scar-less
- ⬆ imported 7 joint articulated arm
360 treatment without dead angle
and ensure the highest energy output
minimum energy loss during laser
transmission.
- ⬆ Spots no longer appear
- ⬆ 2-10mm adjustable spot size
Different treatment areas are applicable
Energy density is automatically
adjusted with spot size.
- ⬆ The combination different laser pulse
durations, Provide an optimal method
for shattering all sizes of pigment
particles.

Efekt leczenia


Cechy: 1. Wysoka wydajność: System lasera Rubi charakteryzuje się dużą mocą wyjściową i dużą gęstością mocy, umożliwiając szybką i skuteczną operację i leczenie. 2. Bezpieczeństwo: System wykorzystuje zaawansowaną technologię laserową do dokładnej kontroli głębokości i intensywności wiązki laserowej, minimalizując uszkodzenia otaczających tkanek. 3. Wielofunkcyjny: system lasera rubinowego może być używany do różnych operacji i zabiegów, w tym do usuwania skóry, leczenia chorób naczyniowych, naprawy blizn itp. 4. Wysoka precyzja: system posiada bardzo precyzyjne funkcje pozycjonowania i sterowania wiązką lasera, może dokładnie obsłużyć tkankę docelową, poprawić skuteczność operacji i efekt leczenia. 5. Przenośność: System lasera Rubi ma zwartą konstrukcję, jest łatwy do przenoszenia i przenoszenia, odpowiedni do różnych środowisk klinicznych.

TECHNICAL PRINCIPLE

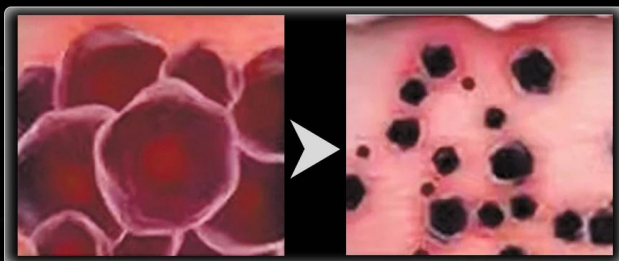

Traditional laser

Traditional nanosecond lasers predominately rely on photothermal action, delivering heat to the pigment and surrounding tissue

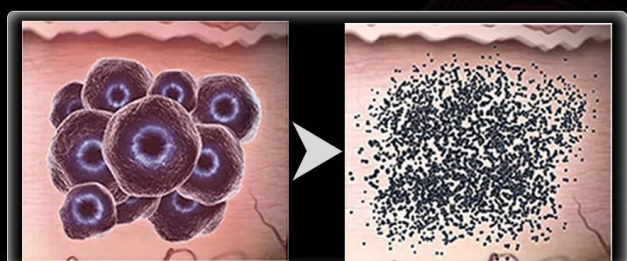

Laser luxe

Laser luxe takes advantage of Pressure Wave Technology to shatter the target ink into tiny particles that are easily

Długość fali 755, stosowana do wybielania i żółknięcia, szybko usuwa pigmenty kurzu i łatwo przywraca białą skórę. Laser pikosekundowy 532 nm ma najlepszy wpływ na żółte tatuaże, a następnie czerwone tatuaże. W przypadku czarnych tatuaży najlepiej sprawdza się laser pikosekundowy o długości fali 1064 nm. Długość fali 532 służy do leczenia plam naskórkowych, takich jak piegi, plamy kawowe, plamy fotostarzeniowe, ślady po trądziku i zmarszczki, a także czerwone i żółte tatuaże. 1064 stosowany w leczeniu plam skórnych, takich jak brązowo-cyjanmole, otomole, ostuda, pigmentacja, wybielanie i rozjaśnianie w celu usuwania żółtych, czarnych i niebieskich tatuaży można pracować, stosować w leczeniu trądziku, zmniejszaniu porów i napinaniu skóry, aby osiągnąć efekt odmładzania skóry.

Before & After



Parameters Table

Device Name	Laser luxe
Wavelength	1064nm 755nm 532nm
Screen Size	12 inch 4K Style touch screen
Pulse Duration	~7ns@1064nm ~6.5ns@532nm
Frequency	1-10hz
Spot size	2-10mm adjustable
Energy	1064/1000mj 755/1000mj 532/1000mj
Beam of light transmission	7 articular-arm of light guide transmitting
Indicator of aiming light	650 red diode laser
Cooling	Water cooling+Air cooling
Voltage	AC220V/110V 50HZ/60HZ
Demension of machine	93.6*92.7*39cm
Package	Aluminum box
Warranty	2 years



Wybielanie skóry Laser pikosekundowy Q-switched Nd Yag Laserowe usuwanie tatuażu Akcesoria: Ponadto posiadamy również różne akcesoria, aby zapewnić naszym klientom doskonałą obsługę. Laser Q-switched nanosekundowy krótki impuls 755 532 1064 terapia naczyniowa naprawa blizn laserowa maszyna do usuwania tatuażu pikosekundowego





You'll get

Six value-added services

One-stop after-sales solution



2 years machine
warranty
1 year for handle



Free enterprise
training



Test **videos** and
pictures
about the machine



A professional
training service
training files
training videos



Customized logos,
posters and promotional
videos, put the logo on
screen system



Parcel **tracking service**
Help to do
Customs clearance

Po służbie:

*Biorąc pod uwagę dużą odległość między nami a naszymi klientami oraz aby znacznie lepiej służyć naszym klientom, *Nasza firma tworzy profesjonalną technologię po zespole serwisowym.

*Nasz technik zapewni terminowe rozwiązanie każdego problemu z maszyną i przygotuje dokumenty w ciągu 24 godzin.

*Możesz także skontaktować się z nami telefonicznie, online itp.

Dowiedz się więcej o produktach i wiedzy o urodzie, zapraszamy do konsultacji!
Usługa online 7*24 godziny!