



Diode laser hair removal

Big Power: 1200w 1800w
Triple wavelength: 755nm 808nm 1064nm
For different skin type: white, brown, black

15 lat fabryki, 2 lata gwarancji, 102 kraje, ponad 60 000 klientów
MLKJ — Spraw, aby Twój biznes kosmetyczny był łatwiejszy



Facial TIP!

diode laser hair removal

◆◆◆

Easily treat areas that are normally hard to reach!

Improved Reach

This unique facial head allows you to reach areas of difficult access such as ears, nose, and interlining, among others.

ICE with cold Sapphire tip, protects the epidermis while keeping the heat in the dermis, where the follicles are located.

Facial TIP:

Specifications: Diode, 808 nm, Spot Size $\Phi 6$ mm




Depilacja laserem diodowym

Z łatwością lecz obszary, które nLubmalnie są trudno dostępne!

Lepszy zasięg

Ta unikalna głowica do twarzy pozwala dotrzeć do trudno dostępnych miejsc takich jak np jak uszy, nos i między innymi fizeliny.

ICE z zimną szafirową końcówką, chroni naskórek, jednocześnie utrzymując ciepło w skórze właściwej, gdzie znajdują się mieszki włosowe

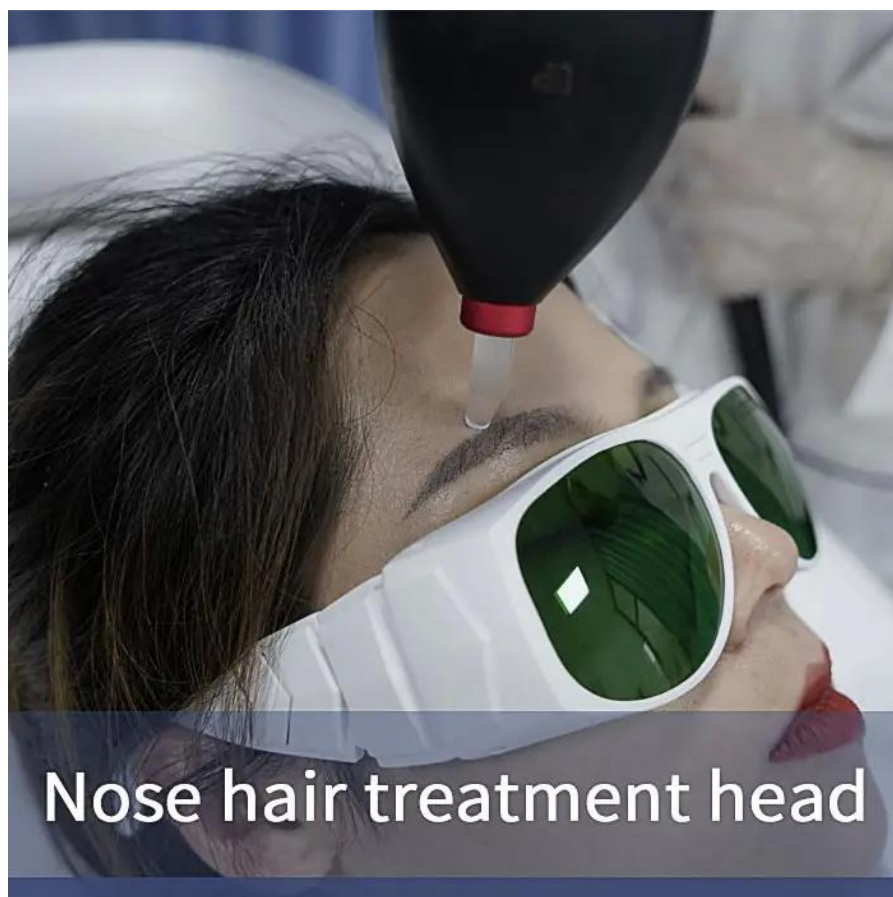

Zalety

- 1.3 fale 1064nm dioda 808nm 755nm, 3 w 1 można stosować wszystkie rodzaje skóry
Wysoka moc: NOWY uchwyt 1000W/1200W/1600W dla opcji
2. Duży rozmiar plamki 15*25mm, 12*35mm rozwiązanie do usuwania włosów z twarzy i ciała!
3. System chłodzenia: Unikalny system chłodzenia Dual-TEC, najskuteczniejszy, aby zapewnić pracę maszyny przez cały dzień, 24 godziny na dobę bez przestojów.
4. Długa żywotność: podwójna gwarancja podtrzymania życia

Najnowszy pasek o mocy 100 W, nowy ulepszony uchwyt, waga 350 g, łatwy do wykonania zabieg.

8 barów 800 W; 10 barów 1000 W; 12 barów 1200 W; 16 barów 1600 W



Depilacja laserem diodowym:

»»Bezpieczeństwo: brak oparzeń skóry, brak uszkodzeń skóry i gruczołów potowych, brak blizn, brak skutków ubocznych.

»»Szybko: duża plamka o wielkości 12*38 mm², skuteczna i szybka terapia na dużym obszarze zabiegowym

»»Trwałe usuwanie włosów: usunąć wszystkie włosy na wszystkich rodzajach skóry, w tym na skórze opalonej.

»»Temperatura kryształów: ~5-3°C, zmniejsza bolesność i zwiększa poczucie komfortu podczas zabiegu.

Hair removal principle

Make Your Beauty Business More Easier



The laser selectively acts on the melanin in the hair follicle, destroying the hair-growing area

Natural hair loss, prevent regeneration, and achieve the purpose of hair removal


Hair removal also stimulates collagen regeneration, shrinks pores and makes skin firm and smooth




1. Bezbolesne usuwanie włosów , brak skutków ubocznych. 2. Potężna moc, Niemcy importowali moduł diody laserowej, 10 barów, 12 barów, 16 dostępnych barów.
3. Duży rozmiar plamki 12*20mm or 12*35mm, do szybkiego usuwania włosów.
4. Najlepszy system chłodzenia: powietrze woda skraplacz półprzewodnikowy TEC, Temperatura wody może być kontrolowana w zakresie od 26 ° C do 28 ° C, 24 godziny ciągłej pracy.



755 nm

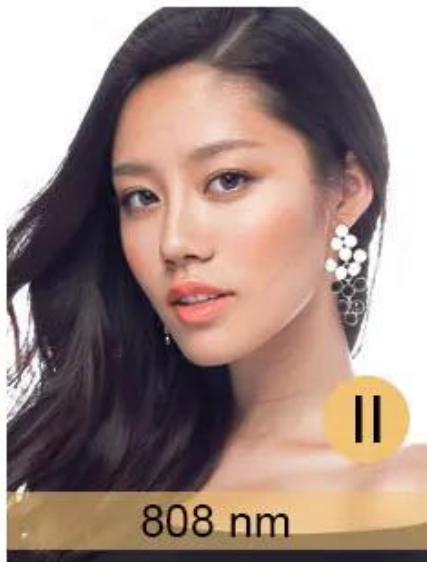

808 nm

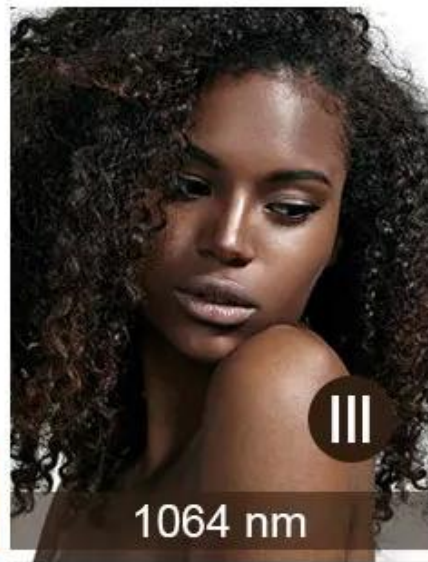


1064 nm



755 nm for white skin (fine, golden hair removal);



808 nm for yellow neutral skin (brown hair removal);

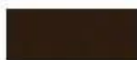

1064 nm for black skin (black hair removal)

Uchwyt Długa żywotność 20-40 milionów strzałów

Prędkość 808 nm: Złoty standard długości fali dla wszystkich rodzajów włosów

Alex 755nm: Specyficzny skuteczny dla włosów blond, włosów cienkich

Długi impuls 1064 nm: Specyficzne skuteczne dla ciemnej, opalonej skóry

najwyższej jakości laser ipl shr opt/nd yag/alexandrite laserowa maszyna do usuwania włosów cena



handle weighs only 350g

Available in **black or white**



Nadaje się do depilacji laserem diodowym na całej skórze ciała
Dobry efekt depilacji laserem diodowym

Model	laser diodowy 808nm depilacja laserowa 1200W
Typ lasera	Laser diodowy 808nm lub 755/808/1064 3 falowy
Wyświetlacz	14-calowy ekran dotykowy
Długość fali	808nm lub 755/808/1064nm
strzały	40 milionów strzałów
Energia	10~150 j/cm ² , regulowane
Częstotliwość	1-10 Hz
Chłodzenie	Podwójne chłodzenie TEC
Moc	3000 W
Rozmiar plamki	12*36mm lub 12*24mm do wyboru
Napięcie	110 V/60 HZ lub 220 V/50 HZ do wyboru
Waga netto	46 kg
Waga brutto	80kg
Rozmiar maszyny	53*40*105 cm
Model	laserowa maszyna do usuwania włosów

- 1) Ekran może dodać twoje własne logo
- 2)ekran z 6 języków
- 3)różne części ciała do wyboru, jedno dotknięcie może rozpocząć leczenie

Frequency	Pulse	Energy	Total	Date
5	30	78	0	2023-05-08 11:25:11
5	30	78	0	2023-05-08 11:25:13
5	30	78	0	2023-05-08 11:25:17
5	30	78	0	2023-05-08 11:25:19

Multimedia Control System

Supports Bluetooth /Wifi /Remote control and locking/Cloud storage



Establishment Registration & Device Listing

FDA Home Medical Devices Databases



New Search

Back To Search Results

Establishment:

WEIFANG MINGLIANG ELECTRONICS CO.,LTD.
Floor 3, Building 4, Second Accelerator, Yuqing Eastern Street, High-Tech District
Weifang Shandong, CN 261000
Registration Number: 3007549439
FEI Number*: 3007549439
Status: Active
Date Of Registration Status: 2022

Owner/Operator:

Weifang Mingliang Electronics CO.,LTD.
Floor 3, Building 4, Second Accelerator, Yuqing Eastern Street, High-Tech District
Weifang, Shandong CN 261000
Owner/Operator Number: 10082104

Official Correspondent:

Pingping Lv
Floor 3, Building 4, Second Accelerator, Yuqing Eastern Street, High-Tech District
Weifang, Shandong CN 261000
Phone: 86-10-56335780

US Agent:

Wen Xu
4611 Maydew Mews Way Ellicott City MD
Ellicott, MD US 21042
Phone: 443 8968583 Ext
Email: Infor@Believe-Med.Com

* Firm Establishment Identifier (FEI) should be used for identification of entities within the imports message set

Page Last Updated: 05/09/2022

Note: If you need help accessing information in different file formats, see Instructions for Downloading Viewers and Players.

Language Assistance Available: Español | 繁體中文 | Tiếng Việt | 한국어 | Tagalog | Русский | العربية | Kreyòl Ayisyen | Français | Polski | Português | Italiano | Deutsch | 日本語 | فارسی | English

Packing

safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,
one-year warranty.

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)
Can Keep You Operate It Easily.



3-5 business days delivery

Professional guide:

24 Hours Professional online customer service,