





Sistema de ultrassom focado macro e micro de alta intensidade
Tratamento não cirúrgico de lifting facial, reafirmante corporal e sistema de contorno corporal!
Descrição dos produtos

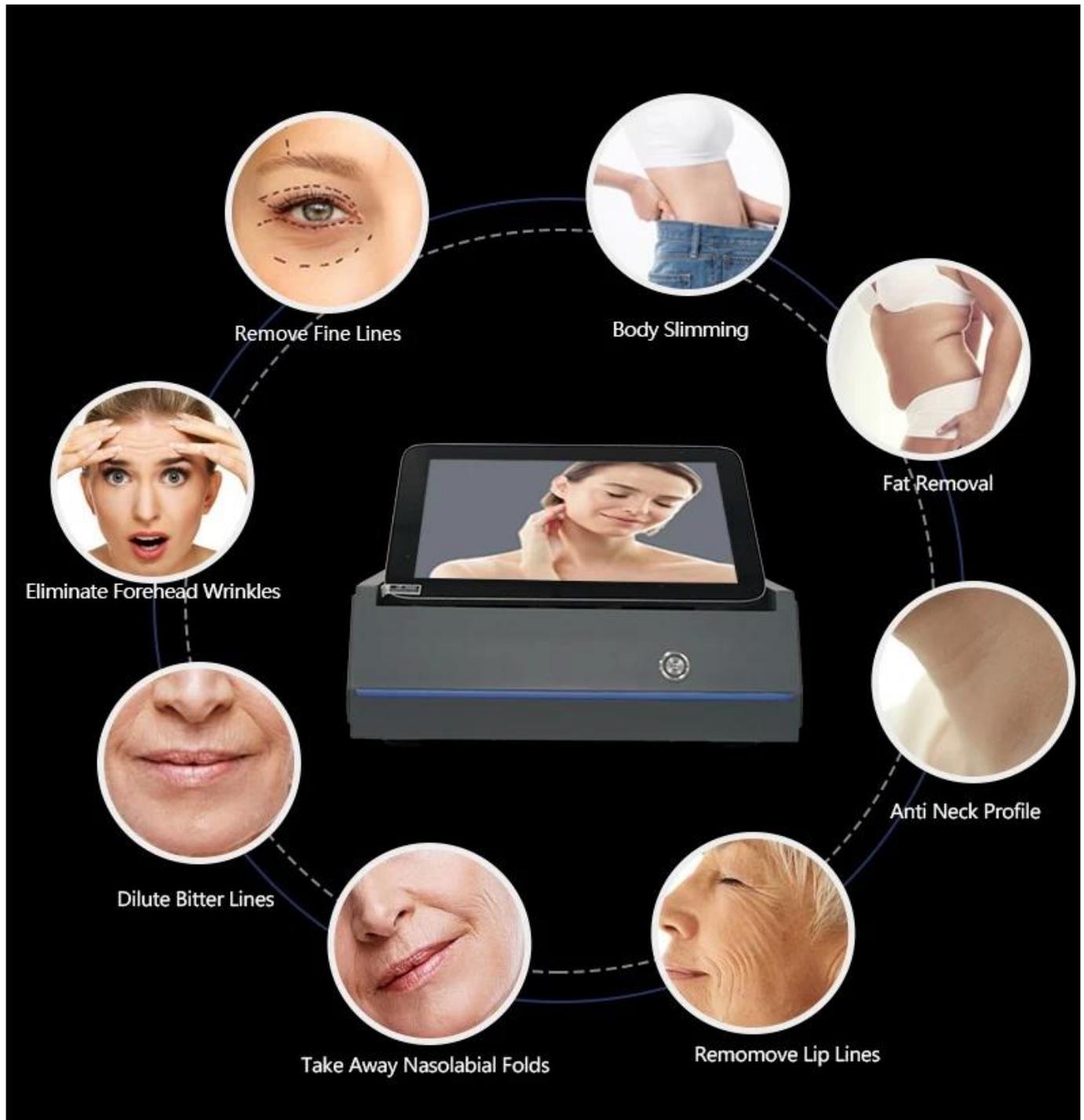


Utilize ultrassom de alta energia com foco na posição de tratamento, para que o tecido da pele crie a térmica, e faça células de fricção de alta velocidade para estimular o colágeno. Esse efeito de calor não prejudicará a epiderme, pois o tratamento tem acesso rápido e direto ao local de tratamento em 0-0,5 segundos, sem tocar no tecido circundante e pode ser passado diretamente para o sistema de membrana do tendão superficial (SMAS), para que possa ser feito pele firme enquanto puxa a camada muscular, rosto fino para cima para o efeito progressivo.

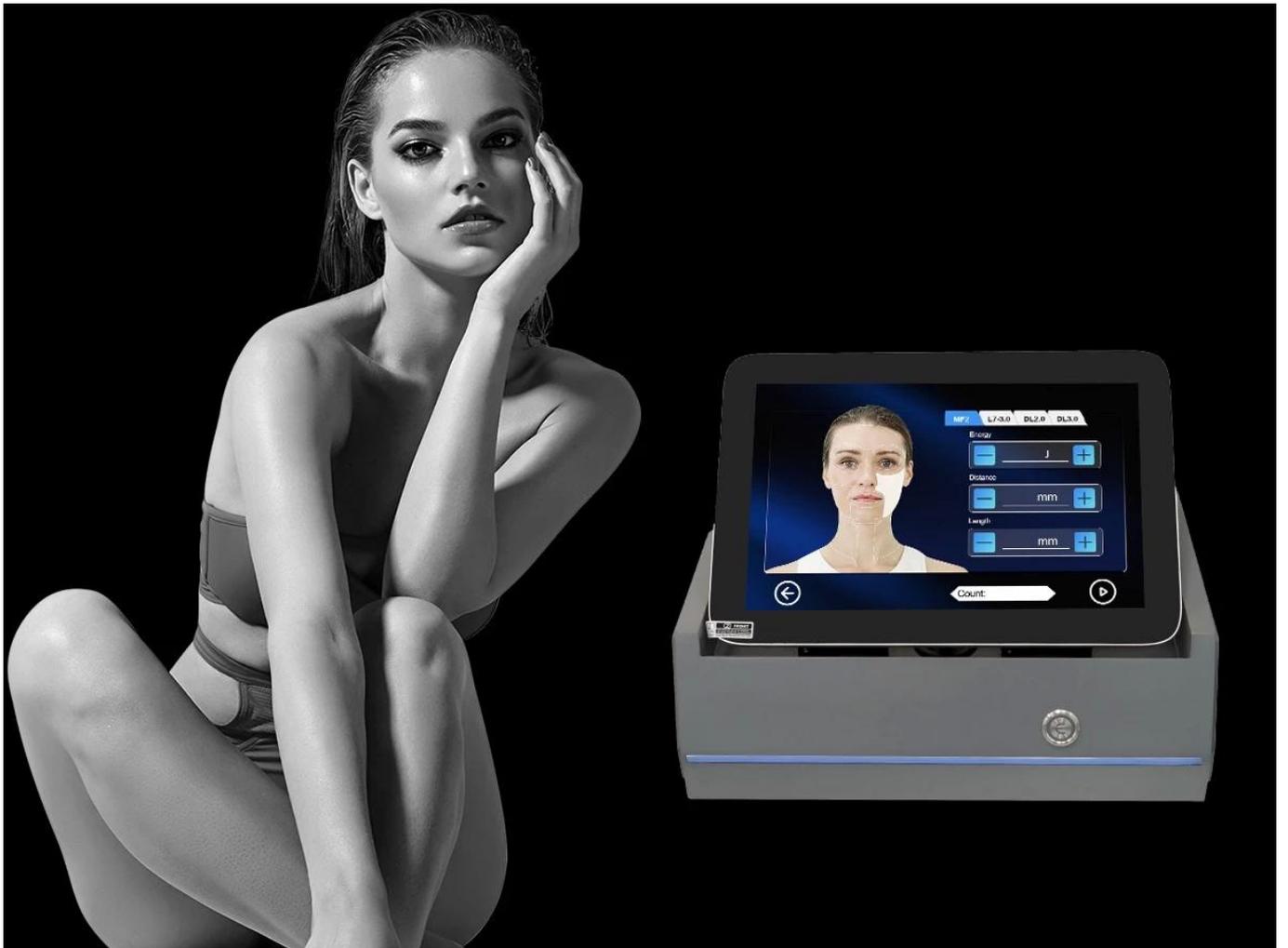

MF2.0MM

Unique ultra-thin
probe Clexis patented
technology

"Special cartridge for eyes treatment"

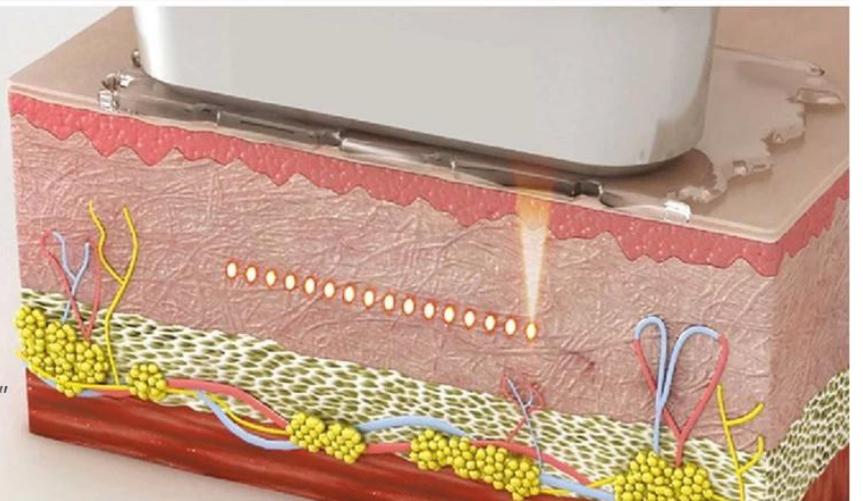

Body Treatment



• *Treatment Effect* •



Modelo	Ultrassom focado em dispositivo de terapia 7D
Nome	Ultrassom focado de alta intensidade

Alças	Facial: 1,5 mm, 3,0 mm, 4,5 mm
	7D AF: MF2/6/9/13 L4-4,5 L7-1,5 L7-3,0
Produção de energia	0,1J-2,5J (0,1J por etapa)
Espaço entre Ponto	1,0 mm-4,0 mm
Comprimento do tiro	5mm-25mm
tiros	Cada cartucho 300.000 tiros
Tamanho da tela	15 polegadas
Tensão	110V-240V, 50/60Hz

Bem-vindo a consultar mais detalhes do produto!