



CO2 laser beauty

Gynecology

Fractional

Cutting

3 in1 multifunctional
CO2 laser beauty equipment
power reaches 40w
professional medical level





Korea 7 joints light guiding arm

360°, smooth operation
100% korea import reliable quatity
7 joins articulated light guiding arm
Greatly reducing energy loss
Convenient and flexible in operation
Stylish appearance and excellient use feeling



Vários modos de operação Contínuo, super pulso, fracionário diferentes modos de operação.


Ajustável O diâmetro e o intervalo do ponto focal são ajustáveis.

importados dos eua O melhor tubo de laser RF dos EUA, importado da CONHERENT, desempenho estável, alta eficácia

Simples Fácil de desmontar a peça de mão e pendurar na máquina.

South Korea imported light guide arm

7 joins articulated light guiding arm

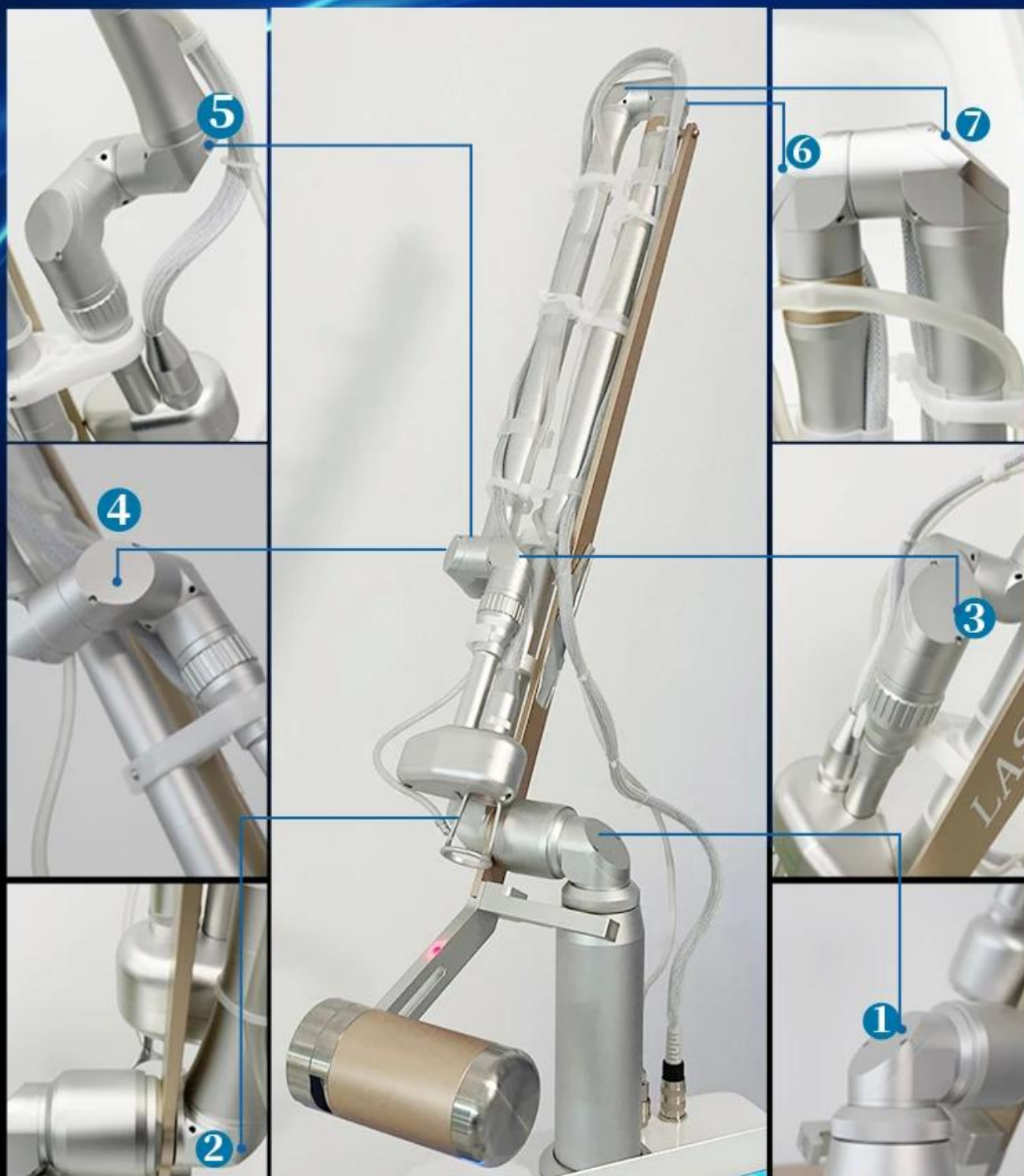

Leve Sem pigmentação e despigmentação da pele, não precisa de consumíveis extras.
 Proteção de segurança Proteção de segurança com alarme automático
 Atalho Tratamento fácil e rápido, sem tempo de inatividade.
 Fácil de usar Condução de luz de braço articulado
 Ampla gama de aplicações Vários volumes de pontos são adequados para diferentes áreas do corpo

PRODUCT EFFICACY

Skin renewal and regeneration	All colors tattoo removal
Remove acne and scars	Remove all kinds of wrinkles
Remove neplasms	Remove pigment:chloasmas Age spots blemishes, speckle,nevus,birth mark,ect
Treat telangiectasis	Sun damage recovery and skin renewing
Eliminates scrub	Pierce ears
Tighten and whiten skin,pore missing	Effective treatment with skin hydroponic,skin rough



Scann Mode
Random Sen-
quential Max dot
distance

(Adjustable dot
shape and size)




Cutting Mode
CW
Single
Pulse

Sobre alças




• Trachea

When working, gas is sprayed out, which has the functions of cooling, cooling and dust removal.

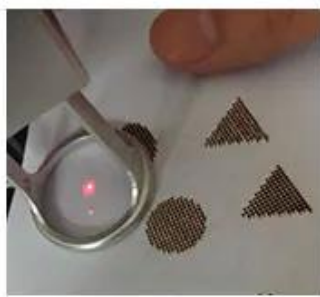

Adjustable dot shape and size

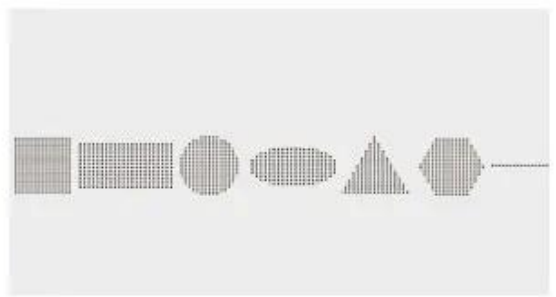

Shape display



• Rf tube

Good stability and high safety



• Metal frame


In addition to the shell, the all-metal internal structure is firmer and has long service life.

As cabeças de digitalização importadas geralmente usam por 3 a 5 anos, com baixa taxa de falhas, digitalização mais precisa e longa vida útil.

O laser de 40w tem alta potência e energia suficiente e pode funcionar continuamente por um longo período de tempo.

Energia forte, emissão de luz uniforme, digitalização mais precisa, menor taxa de falhas e longa vida útil.

WORKING PRINCIPLE

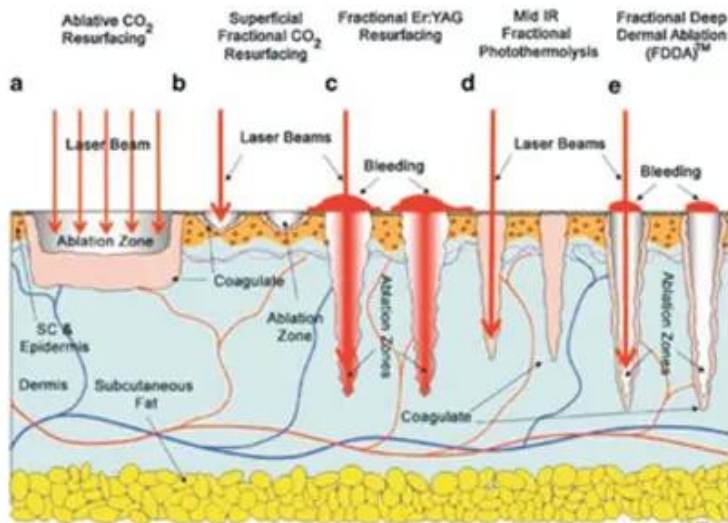

The CO₂ laser uses a unique head piece which tracks the CO₂ 10.6 μ m wavelength light as it passes light through its optical lens to penetrate the skin. We can control the depth of the penetration from only a few micrometers in depth (only as deep as a few sheets of paper) to much deeper with tiny thermal channels. This will also determine the length of healing, the number of treatments and the cost. Each thermal channel creates a small micro-injury but does not significantly disturb or disrupt the surrounding tissue.

These microscopic injuries caused by the laser (around 15-20% of the treated area) are the beginning of the healing process. By creating thousands of these perforations underneath the skin, your epidermis layer starts to heal from the edge of these microscopic perforations very quickly. By healing so fast it remodels, tightens and stimulates the collagen, your skin tightens, which in turn smooths out lines, and significantly improves your skin's tone and complexion.



Comparação de efeito

TREATMENT EFFECT T



before treatment



during treatment



after treatment



after 30days

Acne Scars



Burn Scars



Hypertrophic Scars



Surgery Scars



Chicken Pox Scars



Accident Scars



Tela de exibição



Simple and practical operation interface

Fractional cutting private multi-function multiple modes of operation
4 scan modes, sequence, random, continue and ultra pulse



Tela sensível ao toque grande de 14 polegadas em cores verdadeiras
 Experiência de toque super legal
 6 idiomas para sua escolha, idioma especial pode ser adicionado
 O serviço OEM é aceito, como parâmetro de ajuste, inclui escopo de energia/frequência/tempo
 12 tipos de padrões de saída.

Tipo de Laser	Laser Co2 Vaginal Laser Vaginal Machine Laser Fracionado de CO2
Comprimento de onda do laser	1060nm
potência do laser	até 40W (opcional)
sistema de luz	7 braços articulados
Duração do pulso	100-5000us
Facula	modo único
Diâmetro focalizado do feixe	0,25 mm
área focal	0,05mm ²
formulário de saída	Ultra Pulso, fracionário
Modo de trabalho	Carregamento intermitente
Modo de digitalização	Sequência, aleatória, paralela (comutável)
Digitalizando Formas	Triângulo/quadrado/retângulo/redondo/oval/hexágono/linear
Área do diagrama	≤20mm*20mm
Interface Tela sensível ao toque colorida	14 polegadas
Sistema de refrigeração	Resfriamento a ar, resfriamento a água
Potência de entrada	CA 230V±10%,50HZ/ CA 110V±10% 60HZ
Tamanho do ponto	≥0,2 mm no foco
Tempo de radiação / Tempo de intervalo	0,01 1 s
Feixe de mira	raio infravermelho 635nm
Fonte de energia	110/220V10% 60HZ 6A