



Laser luxe

Powerful

fastly


Safety

Laser de pulso curto: duração \leq nanossegundos ($10e-6$ segundos)

[Melhor laser para remoção de tatuagens](#)

Características:

- Usando o efeito mecânico de jateamento de pressão sonora da luz, uma única duração de emissão é curta, alta energia e potência de pico;
- A largura do pulso geralmente não é ajustável;
- O pulso curto é realizado pela tecnologia Q-switching

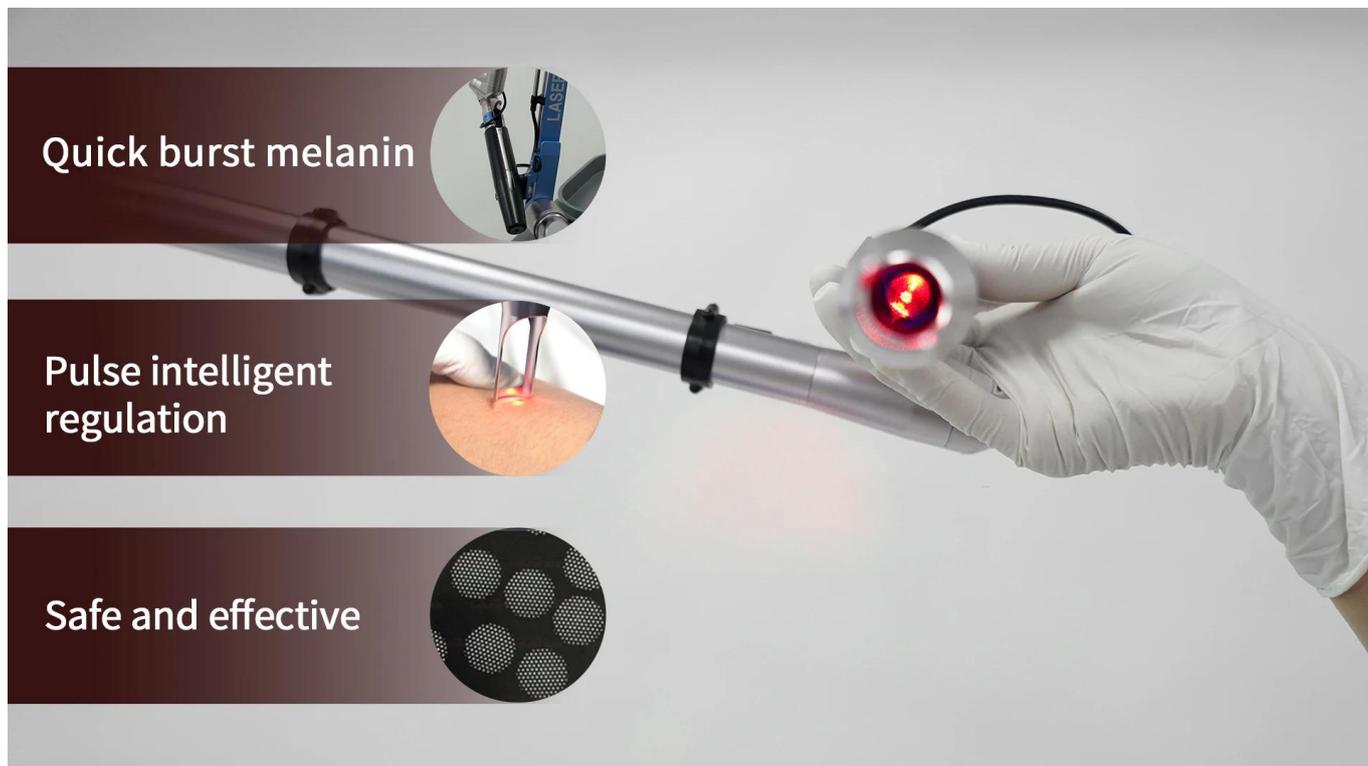

informação do produto

Light guide arm imported from South Korea

- **Life can reach 5 million times**

Long service life, up to 5 million exposures, to better meet customer needs.

- **Aluminum**

Equipped with high-quality aluminum light guide arm, quality is guaranteed

- **Counterweight**

The light guide arm adopts a counterweight design, which makes the operation more flexible and convenient



Com 7 braços de luz orientadores, a luz é mais simétrica! A densidade de energia (J/cm^2) é o parâmetro decisivo da terapia com laser Q-switched. O laser Q-switched geralmente não consegue ajustar a largura do pulso, definir o mesmo valor de energia luminosa (mJ), se quanto menor a área de ação (menor o diâmetro do ponto), maior a densidade de energia, mais intensa a reação da pele, qual é o significado de "focar"

Sobre o identificador


Product advantage

- ⬆ Fast and scar-less
- ⬆ imported 7 joint articulated arm 360 treatment without dead angle and ensure the highest energy output minimum energy loss during laser transmission.
- ⬆ Spots no longer appear
- ⬆ 2-10mm adjustable spot size Different treatment areas are applicable Energy density is automatically adjusted with spot size.
- ⬆ The combination different laser pulse durations ,Provide an optimal method for shattering all sizes of pigment particles.

Efeito do tratamento

Características: 1. Alto desempenho: O sistema laser Ruby possui alta produção de energia e alta densidade de potência, permitindo cirurgia e tratamento rápidos e eficazes. 2. Segurança: O sistema utiliza tecnologia laser avançada para controlar com precisão a profundidade e intensidade do feixe de laser, minimizando danos ao tecido circundante. 3. multifuncional: o sistema laser rubi pode ser usado para uma variedade de cirurgias e tratamentos, incluindo remoção de pele, tratamento de doenças vasculares, reparo de cicatrizes, etc. 4. alta precisão: o sistema possui funções de posicionamento e controle de feixe de laser de alta precisão, pode lidar com precisão com o tecido alvo, melhorar a taxa de sucesso da cirurgia e o efeito do tratamento. 5. Portabilidade: O sistema Ruby Laser adota design compacto, fácil de transportar e mover, adequado para diferentes ambientes clínicos.

TECHNICAL PRINCIPLE

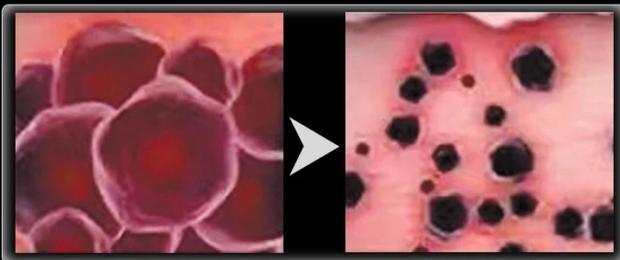

Traditional laser

Traditional nanosecond lasers predominately rely on photothermal action, delivering heat to the pigment and surrounding tissue



Laser luxe

Laser luxe takes advantage of Pressure Wave Technology to shatter the target ink into tiny particles that are easily

755 waveleng usado para clarear e amarelar, remove rapidamente os pigmentos de poeira e restaura facilmente sua pele branca. O laser de picossegundo de 532 nm tem o melhor efeito em tatuagens amarelas, seguidas por tatuagens vermelhas. O laser de picossegundos de 1064 nm funciona melhor para tatuagens pretas. O comprimento de onda 532 é usado para tratar manchas epidérmicas, como sardas, manchas de café, manchas de fotoenvelhecimento, marcas de acne e rugas, bem como tatuagens vermelhas e amarelas. 1064 usado para tratar manchas dérmicas como cianomoles marrons, otamoles, cloasma, pigmentação, clareamento e brilho para remover tatuagens amarelas, pretas e azuis podem ser lavados, usados para tratar acne, reduzir os poros e apertar a pele, para alcançar o efeito de rejuvenescimento da pele.

Before & After



Parameters Table

Device Name	Laser luxe
Wavelength	1064nm 755nm 532nm
Screen Size	12 inch 4K Style touch screen
Pulse Duration	~7ns@1064nm ~6.5ns@532nm
Frequency	1-10hz
Spot size	2-10mm adjustable
Energy	1064/1000mj 755/1000mj 532/1000mj
Beam of light transmission	7 articular-arm of light guide transmitting
Indicator of aiming light	650 red diode laser
Cooling	Water cooling+Air cooling
Voltage	AC220V/110V 50HZ/60HZ
Demension of machine	93.6*92.7*39cm
Package	Aluminum box
Warranty	2 years



Acessórios da máquina de remoção de tatuagem a laser Nd Yag Q-switchced para clareamento da pele: Além disso, também temos vários acessórios para oferecer aos nossos clientes um excelente serviço. Laser q-switchced nanossegundo pulso curto 755 532 1064 terapia vascular reparação de cicatriz máquina

de remoção de tatuagem a laser de picossegundos





You'll get

Six value-added services

One-stop after-sales solution



2 years machine
warranty
1 year for handle



Free enterprise
training



Test **videos** and
pictures
about the machine



A professional
training service
training files
training videos



Customized logos,
posters and promotional
videos, put the logo on
screen system



Parcel **tracking service**
Help to do
Customs clearance

Depois do serviço:

*Considerando a longa distância entre nós e nossos clientes, e para atender muito melhor nossos clientes, *Nossa empresa constrói uma equipe profissional de tecnologia pós-serviço.

*Nosso técnico fornecerá solução oportuna para qualquer problema da máquina e preparará os documentos para você dentro de 24 horas.

*Você também pode entrar em contato conosco por telefone, online etc.

**Saiba mais informações sobre produtos e conhecimentos de beleza, entre em contato conosco!
Serviço on-line 7*24 horas!**