

Venda imperdível laser de co2 fracionário médico aprovado pela fda equipamento a laser de co2 fracionado



1, aplicação de laser de co2 fracionário portátil médico:

- 1) Remova acne, cicatriz de acne, cicatriz e assim por diante;
- 2) Dissipar rugas ao redor dos olhos, pés de galinha e rugas formadas pela falta de água;
- 3) Reduza efetivamente as rugas no rosto, testa, articulações e estrias gravídicas;
- 4) Dissipar sardas, nevo zigomático e outras manchas formadas por alterações patológicas hiper-crômicas;
- 5) Aperte a pele e levante o rosto;
- 6) Remova estrias gravídicas e outras cicatrizes profundas
- 7) Remova todas as cores da tatuagem
- 8) corte de osso
- 9) função de aperto vaginal opcional

TREATMENT EFFECT T



before treatment



during treatment



after treatment



after 30days

Acne Scars



BEFORE



AFTER

Hypertrophic Scars



BEFORE



AFTER

Chicken Pox Scars



BEFORE



AFTER

Burn Scars



BEFORE



AFTER

Surgery Scars



BEFORE



AFTER

Accident Scars



BEFORE



AFTER

RF treatment effect




2, profundidade de tratamento do laser de co2 fracionário portátil médico:

O tratamento do laser de co2 fracionado é 50-2000 μ m ajustável, Max é 2mm. Porque a luz infravermelha de 10600 μ m

comprimento de onda mudará as fibras elásticas em 2mm de profundidade, então o laser de co2 fracionado controla a profundidade de 2mm para resolver o

Problema de pele fotoenvelhecida

WORKING PRINCIPLE

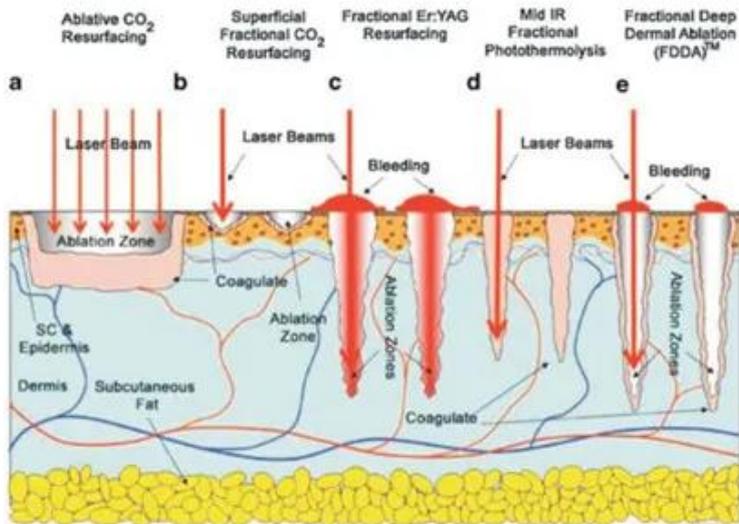


The CO₂ laser uses a unique head piece which tracks the CO₂ 10.6 μm wavelength light as it passes light through its optical lens to penetrate the skin. We can control the depth of the penetration from only a few micrometers in depth (only as deep as a few sheets of paper) to much deeper with tiny thermal channels. This will also determine the length of healing, the number of treatments and the cost. Each thermal channel creates a small micro-injury but does not significantly disturb or disrupt the surrounding tissue.


These microscopic injuries caused by the laser (around 15-20% of the treated area) are the beginning of the healing process. By creating thousands of these perforations underneath the skin, your epidermis layer starts to heal from the edge of these microscopic perforations very quickly. By healing so fast it remodels, tightens and stimulates the collagen, your skin tightens, which in turn smooths out lines, and significantly improves your skin's tone and complexion.



3, tratamento privado da mulher do laser de CO₂ fracionário portátil médico --- aperto e rejuvenescimento vaginal.

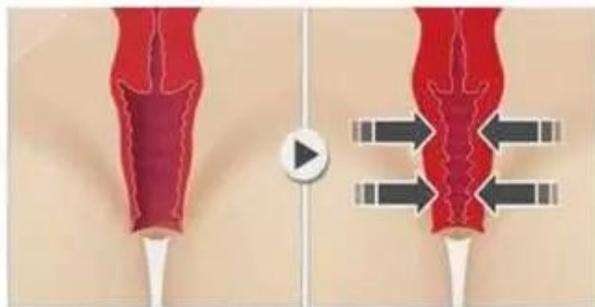

Use an articulate arm probe with automatically 360° rotation technology, producing in 50-70° C at a controlled depth inside the vaginal mucosa - stimulates collagen contraction, restructuring and regeneration; promotes collagen fiber proliferating, remodeling; improves vaginal mucosa microcirculation; increases cell secretion and dynamic reaction function; corrects PH value of vaginal inside;

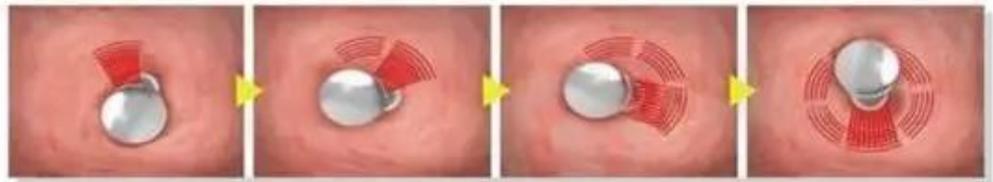

Therapeutic schemes

Improves the inside environment; achieve female private parts to significant lasting firming, nourishing and restoring harmonious sexual life. The laser has a photo thermal heating effect on collagen in both the vaginal walls and the urethra which causes restructuring and regrowth of the collagen. This results in thickening and tightening of the vaginal walls and urethra to improve atrophy and prevent urine loss.

4, detalhes da máquina de laser de co2 fracionário portátil médico:



German import scanning head

- **Longer life span**

Imported scanning heads generally use for 3 - 5 years, with low failure rate, more accurate scanning and long service life.

- **Strong energy, more accurate**

Strong energy, uniform light emission, more accurate scanning, lower failure rate and long service life.

- **Scanning accuracy**

The scanning rate of import is more accurate



Section 7 light guide arm

- **counter weight**

Light guide arm adopts counter weight design, which makes it more flexible to use and convenient to operate.

- **Aluminium material**

The light guide arm is made of high-grade aluminum, which has high stability and is lighter.

- **Tri - color optional**

Equipped with silver, red and blue light guide arms, it can meet different preferences of customers.

Five therapeutic heads

Equipped with scanning head * 1 / cutting head * 1 / private head * 3

- **Scanning head efficacy**

Tender skin/shrink pores/remove striae gravidarum and chloasma

- **Cutting head efficacy**

Removing sarcoma / nevus

- **Efficacy of private head**

Tighten vagina / tender vulva / tender vulva




- **Trachea**

When working, gas is sprayed out, which has the functions of cooling, cooling and dust removal.




- **Adjustable dot shape and size**

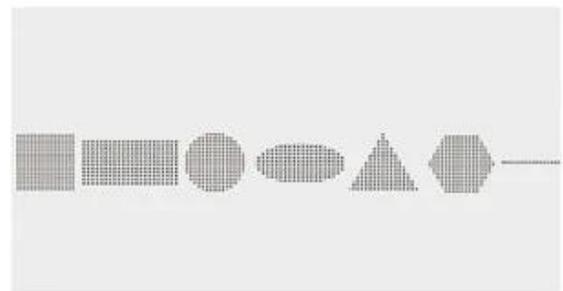

- **Shape display**

5, tela de toque de cor verdadeira de 8,4 polegadas da máquina a laser fracionária de co2 portátil:

SCREEN IMAGE

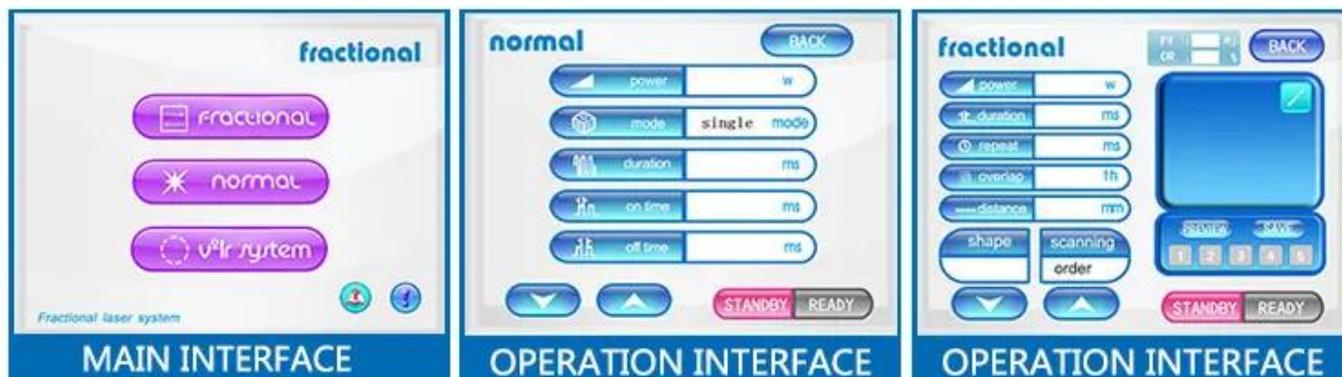

Informação básica	Comprimento de onda	10,6µm, laser infravermelho distante
	Radiofrequência pulsada	0,530 W
	Ultra-pulso	1. Potência máxima: 120 W 2. Largura de pulso: 200 a 500µs é opcional
	Pulso	Potência média: 1-30W
Modo Matriz	Digitalizar gráficos	Gráficos quadrados, retangulares, redondos ou personalizados
	Quantidade de pontos	400 pontos no máximo
	Estado de trabalho	modo ultra-pulsado
	Modo de digitalização	Varredura de sequência ou varredura aleatória
Técnico especificação	Energia de pulso	1mj a 100mj é opcional para cada ponto.
	Aparelho a laser	Dispositivo a laser selado estimulado por corrente contínua
	Foco do condensador	f=50mm
	Ângulo de divergência do feixe	0,3 mil
	Tamanho do ponto	0,5-20 mm ajustável
	Tempo de radiação / tempo de intervalo	0,01 1 segundo
	Feixe de mira	Menos de 2mW, laser semiconductor vermelho de 635nm
Dispositivo de transporte de feixe	Braço articulado com seis segmentos e peso de equilíbrio	

Nossos serviços

1) Garantia

Nós fornecemos 2 anos de garantia aos clientes. Manutenção gratuita ao longo da vida.

2) Treinamento

Oferecemos treinamento profissional a nossos clientes, garantimos que cada cliente possua o conhecimento de operação profissional em

tempo, DVD para treinamento ou treinamento on-line diretamente. Sem qualquer custo, de graça!

3) Serviço profissional de OEM e ODM

Como somos uma fabricação profissional de máquinas de beleza na china, podemos oferecer a todos os distribuidores e revendedores o OEM/ODM

Serviço sem qualquer custo de design, qualquer conselho de nosso cliente é bem-vindo!

4) logotipo grátis, language, design de cores

Podemos adicionar seu logotipo na tela da máquina gratuitamente.

Podemos projetar sua linguagem na tela gratuitamente.

Você pode escolher qualquer cor que desejar para a máquina.

5) Entrega

Nós entregaremos a máquina dentro de 3 dias.

Podemos entregar as mercadorias para todo o mundo. Leva de 3 a 5 dias pela DHL de porta em porta.

Embalagem e envio

Prazo de entrega	3-5 dias úteis após o pagamento
Método de Entrega	Oferecer serviço porta a porta por via aérea, como DHL UPS TNT..
Embalagem	Caixa de alumínio forte com espuma

ABOUT SHIPPING

3-5 businessdays delivery

support air cargo & sea cargo as your option !



-- Máquinas de beleza que produzimos

Laser de diodo 808nm (use barra de laser de sinterização de estanho de ouro, condensador TEC, lâmpada importada da Itália)

Laser fracionado de CO2 (40W RF, cabeça de varredura importada)

Laser de diodo 980 (remoção vascular especializada)

Elight/IPL (7 filtros, tamanho de ponto grande de 15*50mm)

Laser Nd Yag (barra de laser importada, 5 cabeças de tratamento)

Laser de picosegundo (Seis cabeças de tratamento)

CavitaçãoVácuoRF (RF Tripolar, RF Monopolar, RF Bipolar)

SHR (super depilação)

Certificat e



BV-France's most authoritative certification body BV Group certification



TUV-Germany's most authoritative certification body Rheinland certification



SGS-Switzerland's most authoritative certification body SGS certification



Italy ECM Certification



ISO 13485

NQA medical system certification



Perguntas frequentes

1. É uma empresa confiável?

Weifang Mingliang Development Co., Ltd. é estabelecida em 2005, envolvida em R&D, vendas e

serviços pós-venda de

aparelhos estéticos e equipamentos médicos a laser, inclusive na área de TI e setor imobiliário. temos um profissional

equipe integrando com ótica, maquinário, eletricidade e medicina, para nos mantermos à frente neste campo. capas de fábrica

5000M2 e tem mais de 100 funcionários.

2: E quanto à entrega?

Podemos oferecer serviços porta a porta por via aérea ou marítima, dependendo apenas do seu pedido real. Como DHL, UPS, TNT,

FEDEX... por via aérea; e os transportes marítimos.

3: Qual é o prazo de entrega?

3-5 dias úteis. Estoque enorme.

4: Qual é o pacote?

Capa de liga de alumínio forte e bonita/caixa de papelão/caixa de madeira.

5: você tem algum suporte tecnológico oportuno?

Temos uma equipe profissional de suporte de tecnologia para seus serviços oportunos. Preparamos os documentos técnicos

para você, você também pode nos contatar por telefone, webcam, chat online (googletalk, MSN, skype, yahoo...).

6: Qual é o método de pagamento?

T/T, WESTERN UNION, CUSTÓDIA e etc.

7: se as máquinas quebrarem durante o envio, você nos apoiará?

Geralmente nosso cliente comprará o seguro antes do envio, evitará qualquer perda de dinheiro com o transporte áspero.

Vamos ajudá-lo a resolver os sinistros com as companhias de seguros para receber seu dinheiro de volta no tempo.