



Многофункциональный диодный лазер elight ipl 808 нм для удаления волос и удаления татуировок с помощью RF

Модель	Диодный лазер Elight808нмND YAG LaserRF
--------	---

Приложение	1) Удаление волос, удаление веснушек 2) Омоложение кожи 3) Лечение пигментации 4) Устранить морщины 5) Очистка от прыщей 6) Удаление линии глаз 7) Удаление вышивки бровей 8) Удаление татуировок 9) Удаление веснушек
Источник света	Интенсивный импульсный свет
Насадка	Одна ручка Elight Одна ручка диодного лазера 808 нм. Одна лазерная ручка nd yag и одна RF-ручка
Длина волны	IPL: 420/510/690~1200 Нм (стандарт IPL) 585/640/755~1200 нм (опционально) ШР: 640-690 НМ
Время задержки импульса	1~50 мс
Беглость	2~15 мс
Экран	8,4-дюймовый цветной сенсорный экран
Размер пятна	12x20мм, 12x35мм, 15x50мм
Q-переключаемый Nd	ND: YAG-лазер
Длина волны	1064, 532 и 1320 нм
Импульсная энергия	0-800мДж 0-300мДж
Энергия ШР	1-50Дж
Система охлаждения	Циркуляция воздуха и холодной воды, обрабатывающая головка с регулируемой температурой охлаждения полупроводника.
Власть	1600-3000 Вт
Электрический источник	-4-----0
Способ упаковки	Алюминиевая упаковка
Способ упаковки	Алюминиевая упаковка

Многофункциональный диодный лазер elight ipl 808 нм для удаления волос и удаления татуировок YAG

Ручка диодного лазера 808 нм для сверхбыстрого удаления волос

ручка электронного света (IPLRF) для омоложения кожи, подтяжки кожи, удаления пятен, удаления волос, ухода за кожей и т. д.

nd-yag лазерная ручка для удаления татуировок, удаления линии глаз и т. д.

РФ направляйтесь в похудение лица и тела, омоложение кожи и т. д.

Advantage

- **Diode laser handle**

Painless hair removal, Permanent hair removal,
Suitable for all skin tones.

- **Elight handle**

Elight for hair removal ,skin rejuvenation,vascular
therapy ,pigmentation therapy,acne therapy.

- **ND YAG Laser handle**

ND Yag laser for tattoo removal, eyeline remova,
eyebrow ,embroidery removal. freckle removal.

- **RF handle**

Skin tightening/lifting, wrinkle removal on bod




DIODE LASER

755/808/1064nm diode laser, for all type skin hair removal, painless

755 NM

The Power of
Diversity

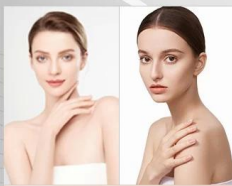

755nm

808 NM

Up To Speed



808nm

1064 NM

Dedicated to Darker
Skin



1064nm





One minute cooling

Suitable for hair removal on any part of the body



Arms



Legs



Face



Armpits



Back



Chest




How does it work

E-light IPL for Hair removal/Skin rejuvenation/Vascular Job/Pigmentation treatment/Acne clearance

Face and body with big and small treatment head.

Through the scientific design of diode laser handle, the high-energy laser beam instantly penetrates the skin and reaches the hair follicle during treatment, output light is absorbed by melanin in the hair follicle, so destroying the hair follicle and reach permanent hair removal. The laser pulse width is set shorter than the time that human body's feeling time, a single shot of light is over, but the human body felt painless, then could achieve the painless treatment feeling, to improve the customer's comfortable experience

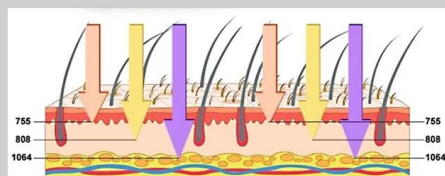

Refuse To Repeat And Leave No Scum



1 week-2 weeks (2 times a week)	3 week-4 weeks (2 times a week)	5 week-8 weeks (2 times a week)
75% hair loss Start to grow slowly Smaller pores	Hair becomes thinner and less Rejuvenate tender skin Smooth body	Select according to hair growth status Use it selectively, say goodbye Repeated hair removal

IPL Handle

© **High-quality IPL**

Handpiece with super cooling system

© **Optional Spot Size**

15*50mm, 15*35mm, 12*30mm

© **Long shots time**

IPL: 150,000 times

© **7 filters**

420/510/560/585/640/690/755nm

Standard: 420/510/560/690nm



420nm

Acne removal
Vascular
treatment

510nm

Pigmentation
therapy, Remove
freckles

560nm

Skin
rejuvenation
wrinkle removal

585nm

Remove Red
blood silk

640nm

Hair removal
(light skin)

690nm

Hair removal
(brown skin)

755nm

Hair removal
(black skin)





ND YAG

5 Treatment Heads

532: Remove colored tattoos.

755 honeycomb head: used to remove age spots, freckles, and chloasma, little damage to skin

Adjustable parameter 1064: for tattoo removal, eyebrow clearing
Non-adjustable parameter 1064: used for removing tattoos and clearing eyebrows

1320: large area treatment, large spot, fast treatment speed and good effect



1064nm
(Size Optional)



532nm
(Original)



1320nm
(Blackface doll)



755nm
(Honeycomb)



1064nm
(Original)


ND YAG ADUANTAGE

Imported crystal bonding laser rod, best quality , shot more than 1.5 million times

Counter on the handle, more easy to get the total shot time


LED red indicator, more easy to aim on the treatment area.

5 treatment tips for multi fuctions: tattoo removal, skin rejuvenation, pigment removal, carbon peeling....

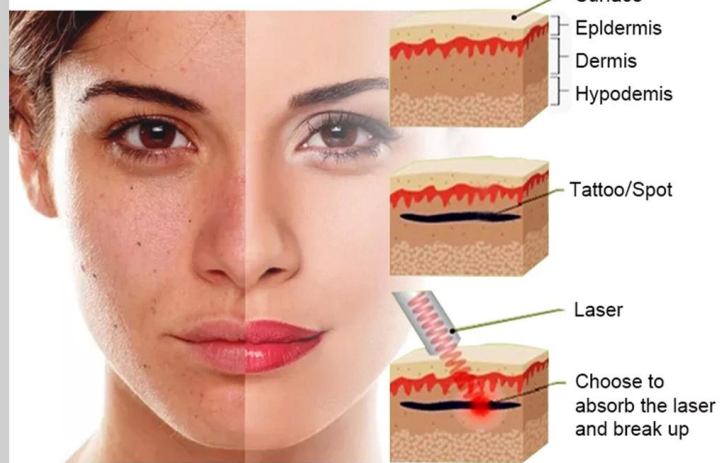

RF Handle

Suitable to 6 kinds of therapy area, to make sure the treatment on the corner of eye, and other area on face.

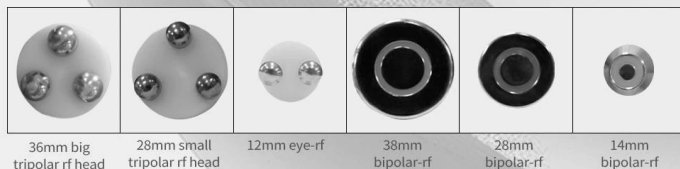

Многофункциональный диодный лазер elight ipl 808 нм для удаления волос и удаления татуировок YAG

14-дюймовый цветной сенсорный экран, кожа мужчины и женщины, 6 языков на выбор.

Ваш язык и логотип могут быть добавлены свободно.

14 inch true color touch screen

Professional Screen, Easy operation



Срок доставки: 3-5 рабочих дней после получения оплаты.

Условия оплаты: Т/Т (банковский перевод), Western Union

Гарантия: 2 года на всю машину, 1 год на ручку.

Способ доставки: Доставка от двери до двери по воздуху, DHL/UPS/TNT

Упаковка: алюминиевая коробка с твердой пеной.

Packing

safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,
one-year warranty.

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)
Can Keep You Operate It Easily.



3-5 business days delivery

Professional guide:

24 Hours Professional online customer service,