



EXFU

CO2 laser beauty

Gynecology

Fractional

Cutting

3 in1 multifunctional
CO2 laser beauty equipment
power reaches 40w
professional medical level



Korea 7 joints light guiding arm

360°, smooth operation

100% korea import reliable quatity

7 joins articulated light guiding arm

Greatly reducing energy loss

Convenient and flexible in operation

Stylish appearance and excellient use feeling



Несколько режимов работы Непрерывный, суперимпульсный, дробный, различные режимы работы.


Регулируемый Диаметр и интервал фокусного пятна регулируются.

Импорт США Лучшая лазерная трубка RF США, импортированная из CONHERENT, стабильная работа, высокая эффективность

Простой Легко разобрать наконечник и повесить в машине.

South Korea imported light guide arm

7 joins articulated light guiding arm

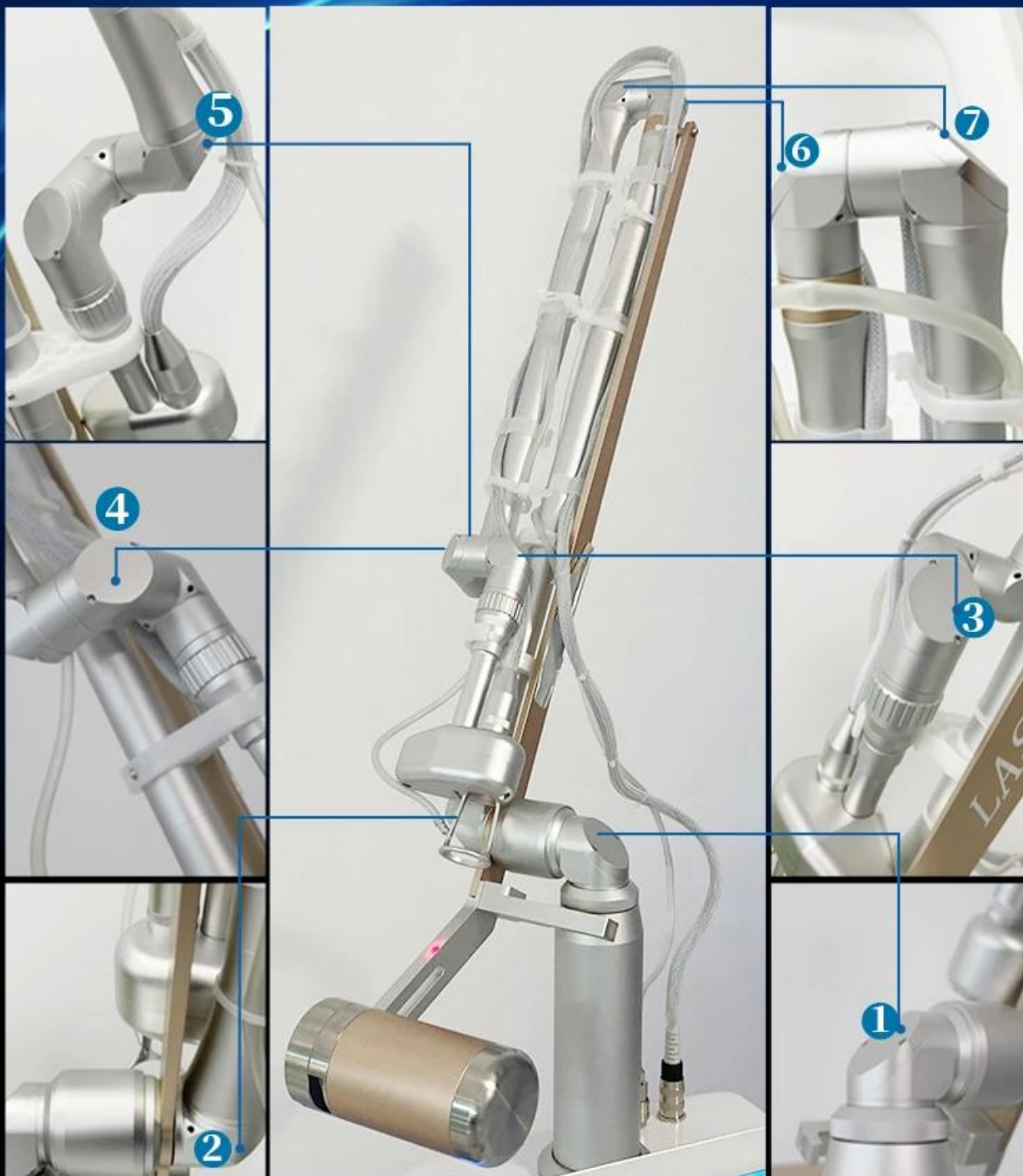

Мягкий Отсутствие пигментации и депигментации кожи, не требует дополнительных расходных материалов.
Защита безопасности Безопасность Защита с автоматическим аварийным сигналом
Ярлык Простое и быстрое лечение, без простоев.
Легко использовать Легкое поведение суставной руки
Широкий диапазон применения Различные объемы пятна подходят для разных областей тела

PRODUCT EFFICAC Y

Skin renewal and regeneration	All colors tattoo removal
Remove acne and scars	Remove all kinds of wrinkles
Remove neplasms	Remove pigment:chloasmas Age spots blemishes, speckle,nevus,birth mark,ect
Treat telangiectasis	Sun damage recovery and skin renewing
Eliminates scrub	Pierce ears
Tighten and whiten skin,pore missing	Effective treatment with skin hydroponic,skin rough



Scann Mode
Random Sen-
quential Max dot
distance

(Adjustable dot
shape and size)



Cutting Mode
CW
Single
Pulse

О ручках

.....




• Trachea

When working, gas is sprayed out, which has the functions of cooling, cooling and dust removal.



Adjustable dot shape and size

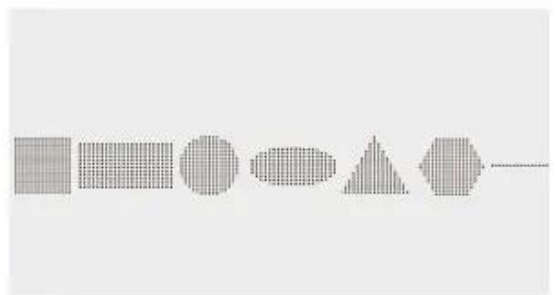

Shape display



• Rf tube

Good stability and high safety



• Metal frame


In addition to the shell, the all-metal internal structure is firmer and has long service life.

Импортные сканирующие головки обычно используются в течение 3-5 лет, с низким уровнем отказов, более точным сканированием и длительным сроком службы.

Лазер мощностью 40 Вт обладает высокой мощностью и достаточной энергией и может работать непрерывно в течение длительного времени.

Сильная энергия, равномерное излучение света, более точное сканирование, более низкая частота отказов и длительный срок службы.

WORKING PRINCIPLE

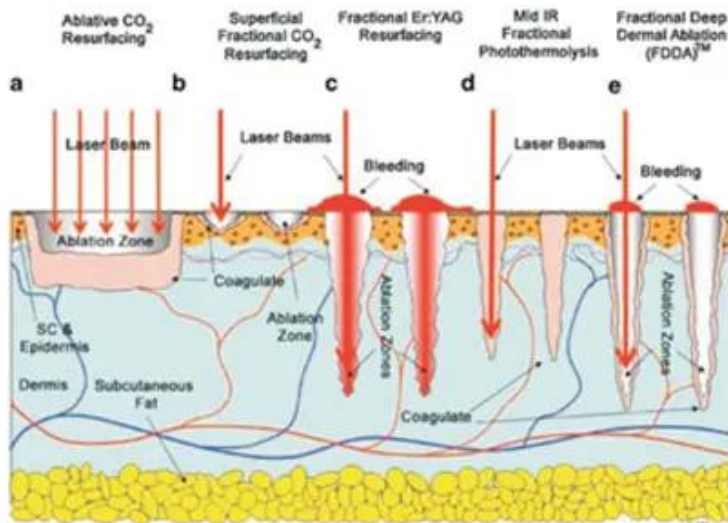

The CO₂ laser uses a unique head piece which tracks the CO₂ 10.6 μ m wavelength light as it passes light through its optical lens to penetrate the skin. We can control the depth of the penetration from only a few micrometers in depth (only as deep as a few sheets of paper) to much deeper with tiny thermal channels. This will also determine the length of healing, the number of treatments and the cost. Each thermal channel creates a small micro-injury but does not significantly disturb or disrupt the surrounding tissue.

These microscopic injuries caused by the laser (around 15-20% of the treated area) are the beginning of the healing process. By creating thousands of these perforations underneath the skin, your epidermis layer starts to heal from the edge of these microscopic perforations very quickly. By healing so fast it remodels, tightens and stimulates the collagen, your skin tightens, which in turn smooths out lines, and significantly improves your skin's tone and complexion.



Сравнение эффектов

TREATMENT EFFECT T



before treatment



during treatment



after treatment



after 30days

Acne Scars



Burn Scars



Hypertrophic Scars



Surgery Scars



Chicken Pox Scars



Accident Scars



Экранный дисплей



Simple and practical operation interface

Fractional cutting private multi-function multiple modes of operation
4 scan modes, sequence, random, continue and ultra pulse



14-дюймовый большой сенсорный экран истинного цвета
 Супер крутой сенсорный опыт
 6 языков на ваш выбор, можно добавить специальный язык
 Принимаются услуги OEM, такие как настройка параметров, включая объем энергии/частоты/времени
 12 типов выходных шаблонов.

Тип лазера	Лазерный Со2 вагинальный лазерный вагинальный аппарат Фракционный лазер СО2
Длина волны лазера	1060нм
Мощность лазера	до 40 Вт (опционально)
Система освещения	7 совместных рук
Длительность импульса	100-5000 долларов США
Факультет	одиночный режим
Сфокусированный диаметр луча	0,25 мм
Фокусная область	0,05 мм ²
Форма вывода	Ультра Импульс, дробный
Режим работы	Прерывистая загрузка
Режим сканирования	Последовательность, случайная, параллельная (переключаемая)
Сканирование фигур	Треугольник/квадрат/прямоугольник/круглый/овальный/шестиугольный/линейный
Площадь диаграммы	≤20мм*20мм
Интерфейс Красочный сенсорный экран	14 дюймов
Холодильная система	Воздушное охлаждение, водяное охлаждение
Входная мощность	230 В переменного тока ± 10%, 50 Гц/ 110 В переменного тока ± 10%, 60 Гц
Размер пятна	≥0,2 мм в фокусе
Время излучения / Время интервала	0,01 1 с
Прицельный луч	инфракрасный луч 635 нм
Источник питания	110/220В10% 60Гц 6А