

5 in 1

BODY SHAPING SYSTEM

- ◎ Roller mechanical massage
- ◎ Vacuum negative pressure adsorption
- ◎ Bipolar radiofrequency thermal
- ◎ Near infrared laser



Advantage

5 treatment handles

According to different treatment areas, treatment items, treatment demands, etc., it can easily achieve perfect body shaping, local slimming and weight loss, skin tightening and lifting, skin texture improvement, etc.

Perfect control system

Adsorption strength, adsorption frequency, roller speed, roller direction, red light intensity, radio frequency power, etc., can be freely adjusted to meet various treatment demands of patients.

True dual-monopolar radio frequency system

The dual-monopolar radio frequency system using Korean 6M radio frequency power supply effectively avoids epidermal burns. The radio frequency energy acts more concentratedly on the target tissue (dermis and subcutaneous tissue), resulting in less pain during treatment. , the number of treatments is significantly reduced.

80K Кавитация: Основанный на использовании низкочастотных ультразвуковых волн, он создает в организме явление, называемое «кавитацией». Кавитация возникает, когда ультразвуковые волны вызывают образование и взрыв крошечных пузырьков в жидкости, окружающей жировые клетки, заставляя их распадаться на части..Он может быть эффективен для уменьшения проявлений целлюлита, тонизирования и укрепления кожи, а также уменьшения окружности обработанных участков.

Многополюсный РЧ: Он использует электромагнитные волны, которые воздействуют на кожу, и волны проникают через поверхность кожи и достигают более глубоких слоев, заставляя ткани вибрировать и генерировать тепло. Таким образом, стимулирует распад жировых клеток.

Вакуумный РФ: Он сочетает в себе технологии вакуумного всасывания и радиочастотную технологию. Вакуумное отсасывание используется для массажа и манипуляций с кожей, а радиочастотная технология используется для нагрева глубоких слоев кожи, способствуя выработке

коллагена и разрушению жировых клеток.




Как работает эта машина?



С помощью операции на лице он может оживить фибробласты человека для выработки коллагена, эластичных волокон, гиалуроновой кислоты и других веществ, а также восстановить жизненные силы кожи; Может решить проблему желтоватого тусклого цвета кожи лица, нечеткости контура, отсутствия эластичности, дряблости кожи, морщин, второго подбородка и депрессии на лице.

Формирование стройного тела: для разложения адипоцитов, разложения липидов, в мышечную энергию, уменьшения объема жира, подтяжки кожи, формирования эффекта. Он может решить проблему накопления целлюлита, ожирения тела, оранжевой кожи, отеков влаги и т. д.

Working principle

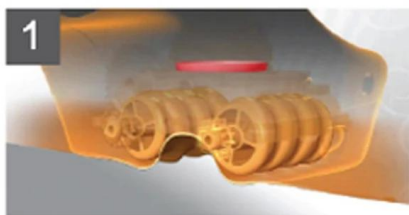

Pumping, relaxing, and pressing through vacuum vacuum suction

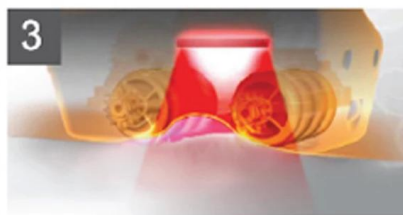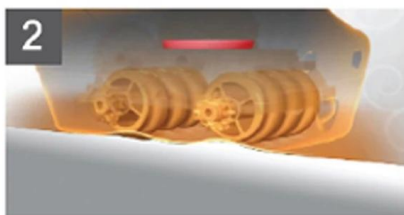


Reuse 940nm infrared to effectively reduce fat cells



Then use the roller or massage to dissolve deep fat, clear the lymph, eliminate toxins, eliminate edema



Use 10MHz RF to tighten and enhance skin after weight loss

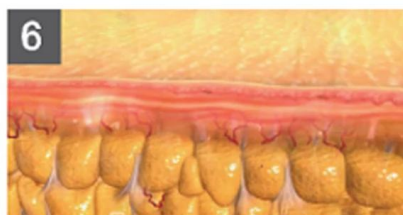

Finally, the orange peel is faded, the curve is attractive, and the skin is smooth and smooth.

Working principle



Large handle with vacuum roller+RF+IR
For large area such as thigh, buttock waist and abdomen.



Medium handle, vacuum roller+RF+IR, button control
For small area, such as arms, flanks.



Small handle, vacuum +RF
For face, forehead and neck.



Smallest handle, vacuum +RF
For eyes.



Large 40KHz cavitation handle
For all body slimming.

Преимущества и характеристики

1. Ручка корпуса оснащена 2,8-дюймовым сенсорным экраном, которым легче управлять и настраивать.
2. Нет необходимости делать косметологу трудоемкий массаж, простая операция безопасна.
3. Притяжение отрицательного давления преобразования частоты: чистое физическое свойство не повреждает кожу, лучший эффект-это наиболее углубленный.
4. Двусторонний силовой ролик: поверхность контакта шире, функциональная область больше, глубина функции глубже.
5. Персональная эксклюзивная цанга: глубокий трехмерный эффект, интеллектуальная бесступенчатая глубина стимуляции скорости отличается.

Treatment efficacy



Body shaping




Dissolves fat and improves skin




Improve stretch marks



Dissolves fat and improves skin

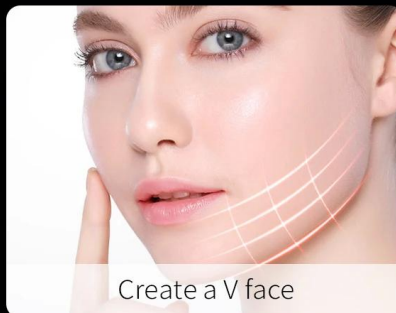

Create a V face

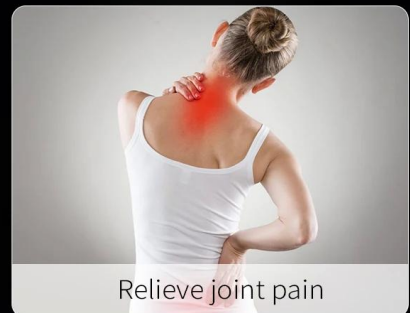

Relieve joint pain










Экранный дисплей

- *14-дюймовый сенсорный экран, прост в эксплуатации;
- *Предоставление услуг по настройке внешнего вида продукта и операционной системы;
- *Обучение руководству по использованию продукта;
- *Руководство по обновлению системы, эксклюзивная служба отслеживания обслуживания клиентов!



Machine introduction

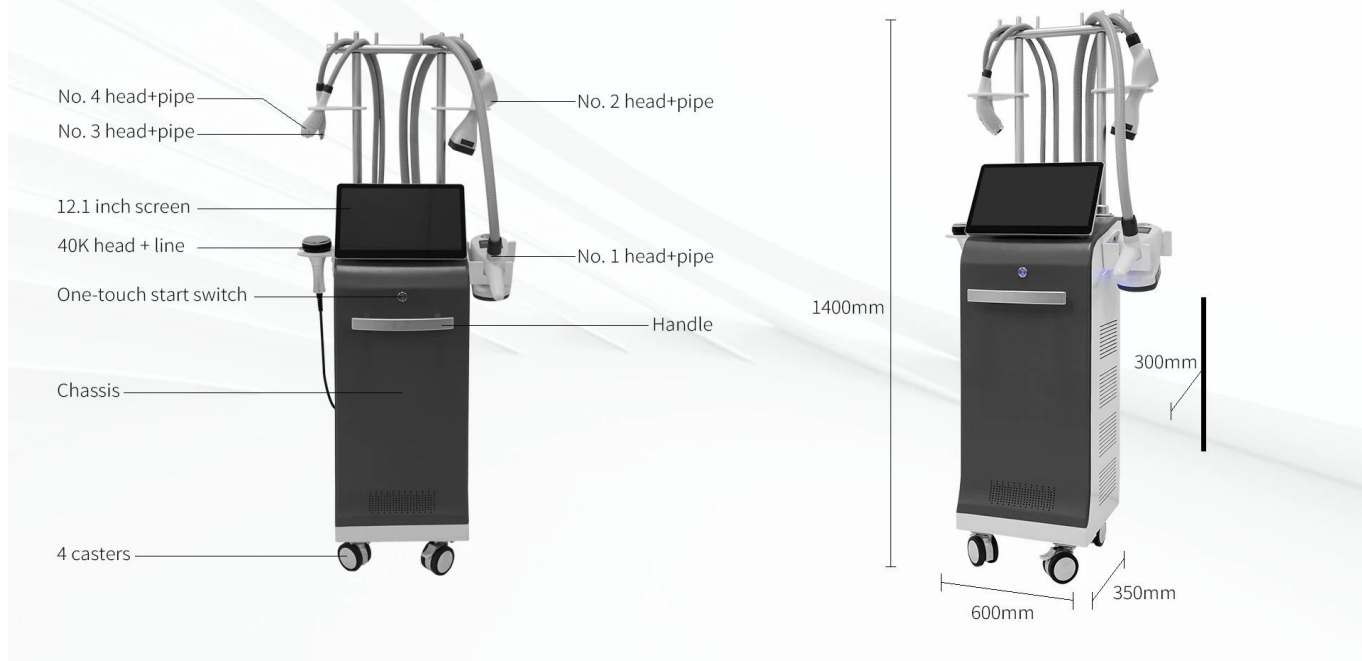

Более подробную информацию о продукте и методах применения, пожалуйста, проконсультируйтесь с нами!
Онлайн-сервис 7*24 часа!