

CO2




Fractional Laser

- ✓ skin rejuvenation
- ✓ remove scars
- ✓ get rid of stretch marks
- ✓ Remove acne scars
- ✓ Treatment of pigmented nevi
- ✓ private compact

CO2 FRACTIONAL LASER

- ✓ Six treatment heads
- ✓ Three treatment modes
- ✓ Professional medical beauty

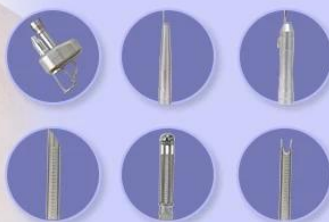

Co2 fractional laser vaginal tightening

Latest






Collagen contraction and remodeling



Pigmentation removal

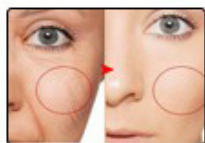

Skin tightening

up

Forehead

Eyelid / Brow

Nasolabial folds

Cheek

Double chin



Glabellum

Front face

Neck

down



Vaginal tightening



Scar removal



Stretch mark removal

SKIN RECONSTRUCTION



Five therapeutic heads

Equipped with scanning head * 1 / cutting head * 1 / private head * 3

• Scanning head efficacy


Tender skin/shrink pores/remove striae gravidarum and chloasma

• Cutting head efficacy


Removing sarcoma / nevus

• Efficacy of private head


Tighten vagina / tender vulva / tender vulva

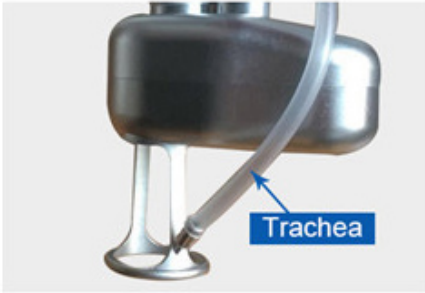

• Trachea

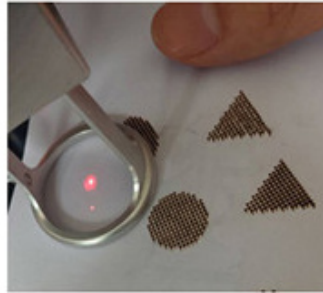

Adjustable dot shape and size

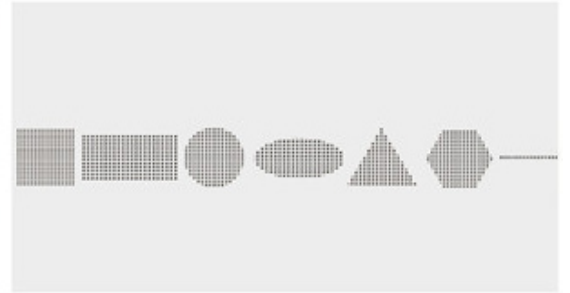

Shape display

Ürün Bilgisi

1. Lazerle cilt yenileme ameliyatı 2. Lazerle kırışıklık giderme ameliyatı 3. Lazerle yara izi giderme ameliyatı 4. Lazerle blefaroplasti 5. Diğer uygulamalar: Pimente nevüs, kloazma, çil, yaş pigmentleri, siğiller, seboreik keratoz, siringoma, akne, milia, striaların giderilmesi gravidarum; Gözenek büzülmesi; Cilt germe; Lazer saç ekimi; Lazerle meme büyütme vb.

CO2 fraksiyonel lazer makinesinin işlevi:



CO2 FRACTIONAL LASER

CLEARLY DIFFERENT

BENEFITS



Shortest Pulse Duration,
Enabling High Peak Power



Improved ROI with Excellent Results in
Fewer Treatments



Unique Double Pulse Mode



Versatile Platform Enabling Multiple
Patient-Tailored Treatment Options



Supreme Feature-Set



Suitable for All Skin Types

CO2 FRACTIONAL LASER

vaginal tightening, skin resurfacing, scar removal




5 TREATMENT
HEADS



SHOW DETAILS

Pursue better in every detail

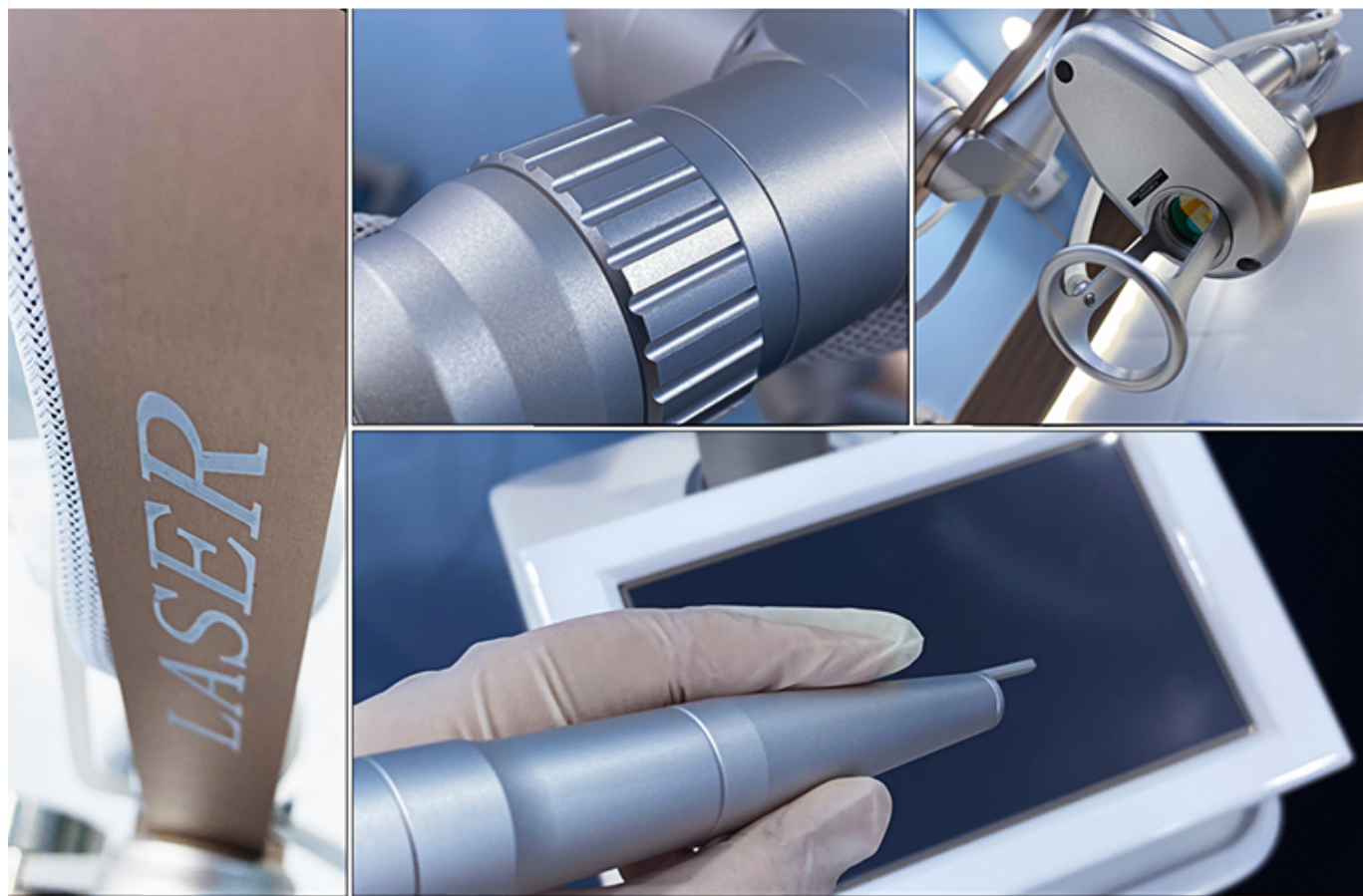


Work Theory



It concentrated thermal heating of the vaginal tissue inner layers induces collagen and elastin contraction and regeneration of these proteins in the longer term. These molecular signals activate the entire wound healing process of the body's local immune system. The treatment outcome is the complete remodeling of the vaginal tissue in addition to re-establishment of firm "young like" vaginal tissue embedded with string-like, thick and long collagen fibers.




1. Laser irradiation angle can be adjusted

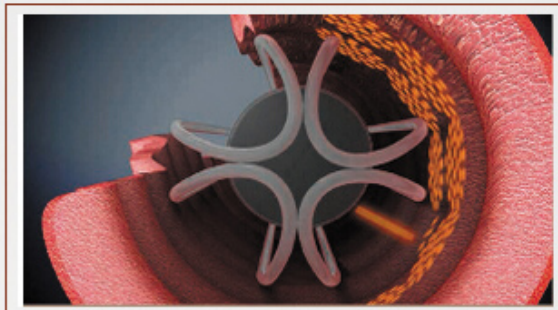

2. Laser irradiation can be rotated 360 degrees

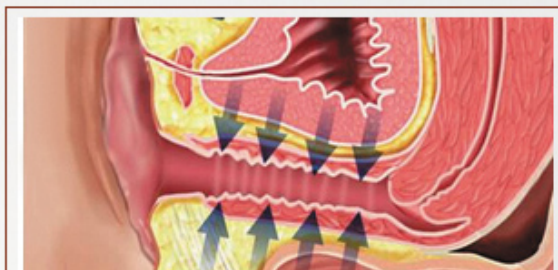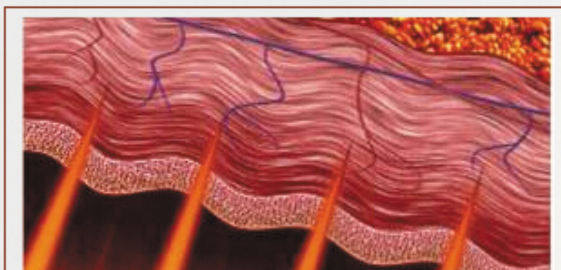

WORKING PRINCIPLE

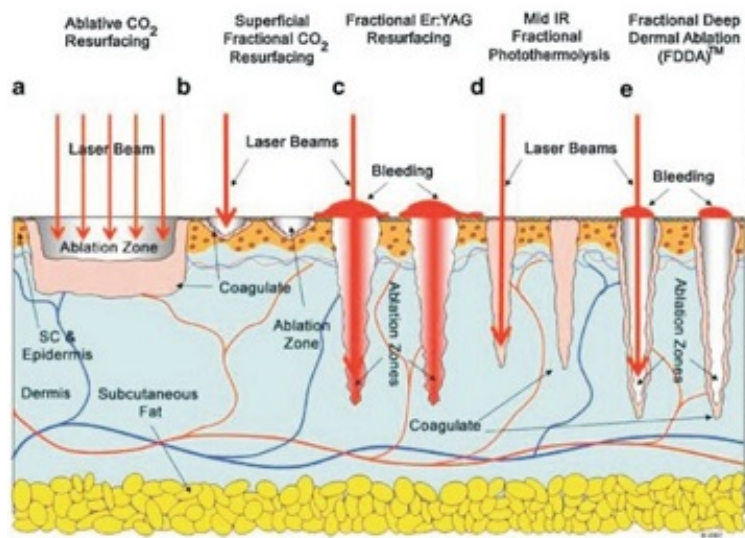

The CO₂ laser uses a unique head piece which tracks the CO₂ 10.6 μ m wavelength light as it passes light through its optical lens to penetrate the skin. We can control the depth of the penetration from only a few micrometers in depth (only as deep as a few sheets of paper) to much deeper with tiny thermal channels. This will also determine the length of healing, the number of treatments and the cost. Each thermal channel creates a small micro-injury but does not significantly disturb or disrupt the surrounding tissue.

Treatment effect comparison



before treatment



during treatment



after treatment



after 30days

Acne Scars



BEFORE



AFTER

Hypertrophic Scars



BEFORE



AFTER

Chicken Pox Scars



BEFORE



AFTER

Burn Scars



BEFORE



AFTER

Surgery Scars



BEFORE



AFTER

Accident Scars



BEFORE



AFTER

Ekran görüntüsü

- * 14 inç gerçek renkli büyük dokunmatik ekran
- * Süper havalı dokunma deneyimi
- * Seçtiğiniz için 6 dil, özel dil eklenebilir
- * Parametre ayarlama, enerji/frekans/darbe genişliği dahil gibi OEM hizmetleri kabul edilir
- * 12 tip çıktı modeli

14 inç gerçek dokunmatik ekran, seçim için 6 çeşit cilt tipi



14 inch 4K HD touch screen
One click start different function parameters
Easier system operation

Lazer Tipi	Lazer Co2 Vajinal Lazer Vajinal Makine
lazer dalga boyu	1060nm
lazer gücü	40W'a kadar (isteğe bağlı)
Işık sistemi	7 ortak kol
Nabız Süresi	100-5000us
fakula	Tek mod
Kirişin odaklanmış çapı	0,25 mm
Odak alanı	0.05mm ²
Çıktı formu	Ultra Darbe, kesirli
Çalışma modu	aralıklı yükleme
Tarama Modu	Sıra, rastgele, paralel (değiştirilebilir)
Şekilleri Tarama	Üçgen/kare/dikdörtgen/yuvarlak/oval/altıgen/doğrusal
Diyagram alanı	≤20mm*20mm
Arayüz Renkli Dokunmatik Ekran	14 inç
soğutma sistemi	Hava soğutma, su soğutma
Giriş gücü	AC 230V±10%,50HZ/ AC 110V±10% 60HZ
nokta boyutu	Odakta ≥0,2 mm
Radyasyon süresi / Aralık süresi	0,01 1 sn
Hedefleme ışını	635nm kızılötesi ışın
Güç kaynağı	110/220V%10 60HZ 6A