



CO2 laser beauty

Gynecology

Fractional

Cutting

3 in1 multifunctional
CO2 laser beauty equipment
power reaches 40w
professional medical level





Korea 7 joints light guiding arm

- 360°, smooth operation
- 100% korea import reliable quatity
- 7 joins articulated light guiding arm
- Greatly reducing energy loss
- Convenient and flexible in operation
- Stylish appearance and excellient use feeling



Çoklu çalışma modları Sürekli, süper darbe, kesirli farklı Çalışma Modları.


Ayarlanabilir Odak noktası çapı ve aralığı ayarlanabilir.

ABD ithalatı CONHERENT'ten ithal edilen en iyi ABD RF lazer tüpü, istikrarlı performans, yüksek etkili

Basit El aletini sökmek ve makineye asmak kolaydır.

South Korea imported light guide arm

7 joins articulated light guiding arm

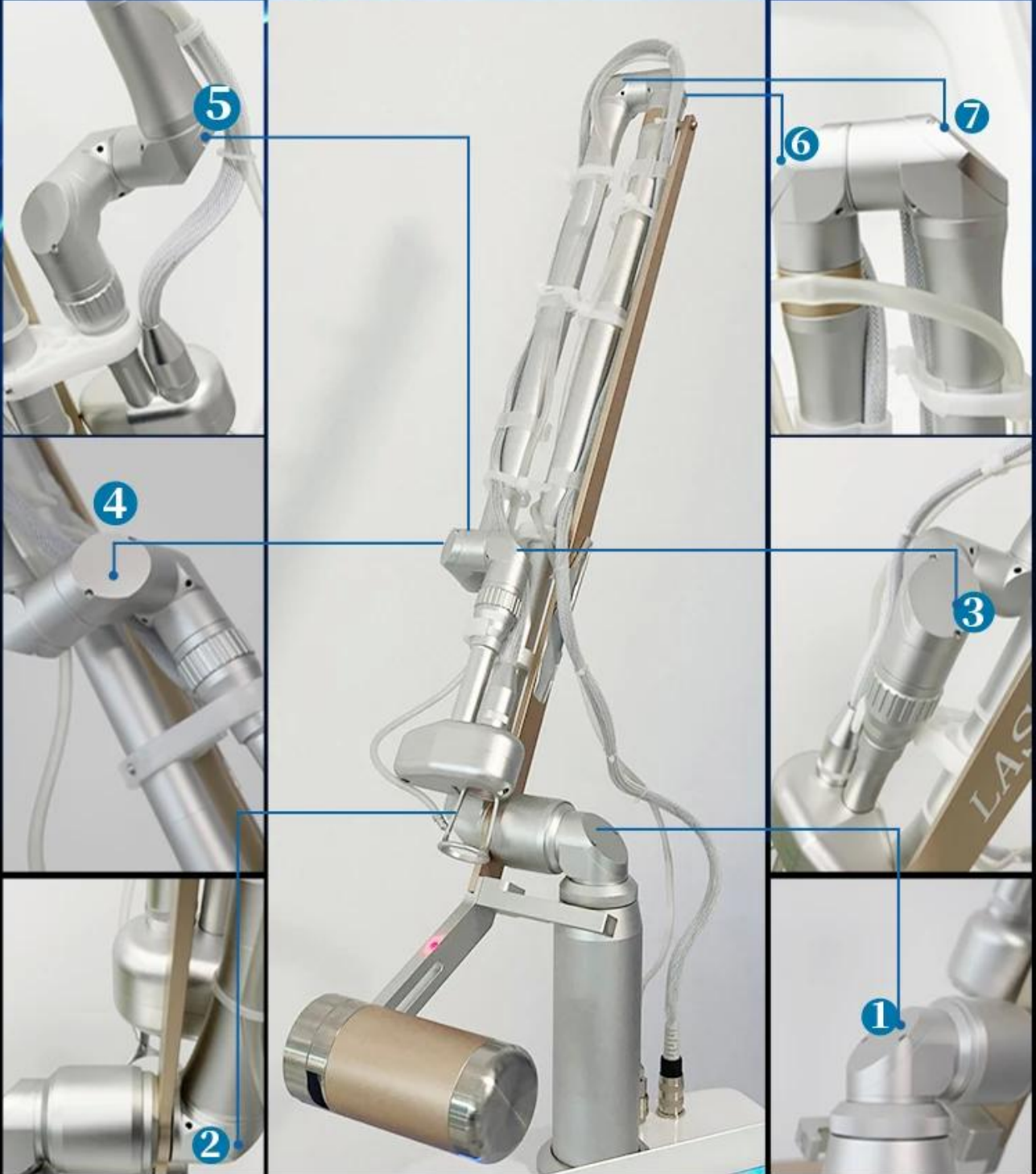

Hafif Cildin pigmentasyonu ve depigmantasyonu yok, ekstra sarf malzemesine ihtiyaç yok.
Güvenlik koruması Otomatik alarmlı Güvenlik Koruması

Kısayol Kolay ve hızlı tedavi, kesinti yok.

Kullanımı kolay Eklemlı kol hafif iletken

Geniř uygulama aralıęı Vücutun farklı bölgeleri için çeřitli nokta hacimleri uygundur

PRODUCT EFFICACY

Skin renewal and regeneration	All colors tattoo removal
Remove acne and scars	Remove all kinds of wrinkles
Remove neplasms	Remove pigment:chloasmas Age spots blemishes, speckle,nevus,birth mark,ect
Treat telangiectasis	Sun damage recovery and skin renewing
Eliminates scrub	Pierce ears
Tighten and whiten skin,pore missing	Effective treatment with skin hydroponic,skin rough



Scann Mode
Random Sen-
quential Max dot
distance

(Adjustable dot
shape and size)



Cutting Mode
CW
Single
Pulse


Kulplar Hakkında

.....




- **Trachea**

When working, gas is sprayed out, which has the functions of cooling, cooling and dust removal.

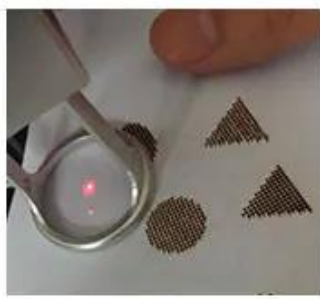

- Adjustable dot shape and size

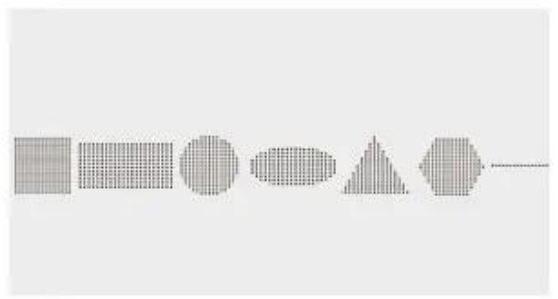

- Shape display



- **Rf tube**

Good stability and high safety



- **Metal frame**


In addition to the shell, the all-metal internal structure is firmer and has long service life.

İthal tarama kafaları genellikle 3 - 5 yıl, düşük arıza oranı, daha doğru tarama ve uzun kullanım ömrü ile kullanılır.

40w lazer, yüksek güce ve yeterli enerjiye sahiptir ve uzun süre sürekli çalışabilir.

Güçlü enerji, homojen ışık emisyonu, daha doğru tarama, daha düşük arıza oranı ve uzun hizmet ömrü.

WORKING PRINCIPLE

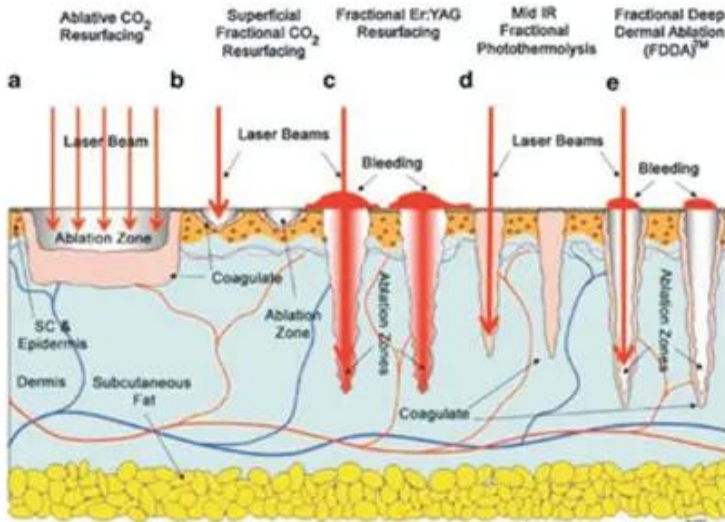

The CO₂ laser uses a unique head piece which tracks the CO₂ 10.6 μ m wavelength light as it passes light through its optical lens to penetrate the skin. We can control the depth of the penetration from only a few micrometers in depth (only as deep as a few sheets of paper) to much deeper with tiny thermal channels. This will also determine the length of healing, the number of treatments and the cost. Each thermal channel creates a small micro-injury but does not significantly disturb or disrupt the surrounding tissue.

These microscopic injuries caused by the laser (around 15-20% of the treated area) are the beginning of the healing process. By creating thousands of these perforations underneath the skin, your epidermis layer starts to heal from the edge of these microscopic perforations very quickly. By healing so fast it remodels, tightens and stimulates the collagen, your skin tightens, which in turn smooths out lines, and significantly improves your skin's tone and complexion.



Etki karşılaştırması

TREATMENT EFFECT T



before treatment



during treatment



after treatment



after 30days

Acne Scars



BEFORE



AFTER

Burn Scars



BEFORE



AFTER

Hypertrophic Scars



BEFORE



AFTER

Surgery Scars



BEFORE



AFTER

Chicken Pox Scars



BEFORE



AFTER

Accident Scars



BEFORE



AFTER

Ekran görüntüsü



Simple and practical operation interface

Fractional cutting private multi-function multiple modes of operation
4 scan modes, sequence, random, continue and ultra pulse



14 inç gerçek renkli büyük dokunmatik ekran

Süper havalı dokunuş Deneyimi

Seçtiğiniz için 6 dil, Özel dil eklenebilir

Parametreyi ayarlamak, enerji/fren/zaman kapsamını dahil etmek gibi OEM hizmeti kabul edilir

12 tip Çıktı deseni.

Lazer Tipi	Lazer Co2 Vajinal Lazer Vajinal Makine CO2 Fraksiyonel Lazer
lazer dalga boyu	1060nm
lazer gücü	40W'a kadar (isteğe bağlı)
Işık sistemi	7 ortak kol
Nabız Süresi	100-5000us
fakula	Tek mod
Kirişin odaklanmış çapı	0,25 mm
Odak alanı	0.05mm ²
Çıktı formu	Ultra Darbe, kesirli
Çalışma modu	aralıklı yükleme
Tarama Modu	Sıra, rastgele, paralel (değiştirilebilir)
Şekilleri Tarama	Üçgen/kare/dikdörtgen/yuvarlak/oval/altıgen/doğrusal
Diyagram alanı	≤20mm*20mm
Arayüz Renkli Dokunmatik Ekran	14 inç
soğutma sistemi	Hava soğutma, su soğutma
Giriş gücü	AC 230V±10%,50HZ/ AC 110V±10% 60HZ
nokta boyutu	Odakta ≥0,2 mm
Radyasyon süresi / Aralık süresi	0,01 1 sn
Hedefleme ışını	635nm kızılötesi ışın
Güç kaynağı	110/220V%10 60HZ 6A