




Kısa darbeli lazer: süre $\leq$ nanosaniye (10e-6 saniye)

[Dövme silme için en iyi lazer](#)

Özellikler:

- Işığın mekanik ses basıncı patlatma etkisini kullanarak, tek bir emisyon süresi kısa, yüksek enerji, en yüksek güçtür;
- Darbe genişliği genellikle ayarlanamaz;
- Kısa darbe Q-anahtarlama teknolojisi ile gerçekleştirilir

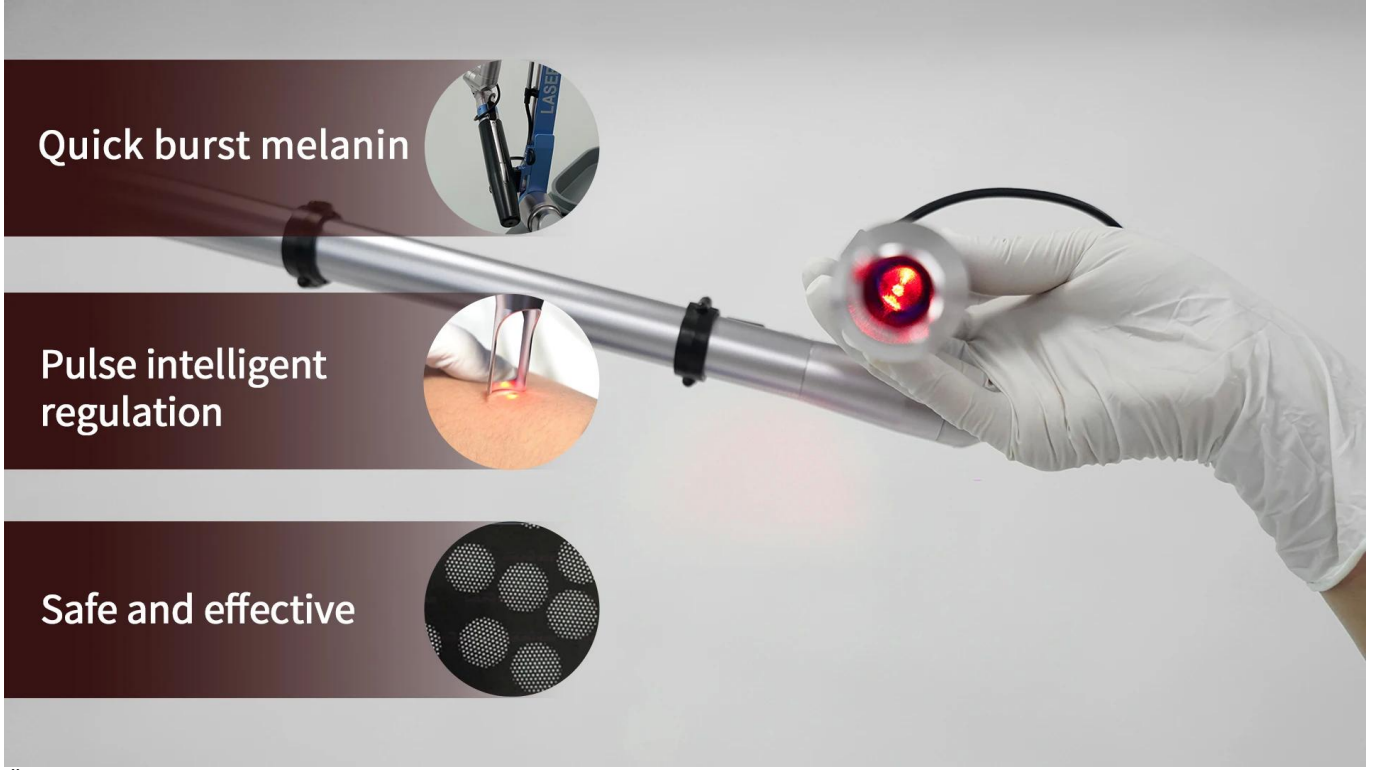

Ürün Bilgisi

Light guide arm imported from South Korea

- **Life can reach 5 million times**

Long service life, up to 5 million exposures, to better meet customer needs.

- **Aluminum**

Equipped with high-quality aluminum light guide arm, quality is guaranteed

- **Counterweight**

The light guide arm adopts a counterweight design, which makes the operation more flexible and convenient



7 adet yönlendirici ışık koluyla ışık daha simetriktir! Enerji yoğunluğu (J/cm^2), Q-anahtarlı lazer tedavisinin belirleyici parametresidir. Q-anahtarlı lazer genellikle darbe genişliğini ayarlayamaz, aynı ışık enerjisi değerini (mJ) ayarlayamaz, eğer etki alanı ne kadar küçükse (nokta çapı ne kadar küçükse), enerji yoğunluğu o kadar büyükse, cilt reaksiyonu o kadar yoğun olur, "odaklanma"nın anlamı budur

Tutamaç Hakkında


Product advantage

- ⬆ Fast and scar-less
- ⬆ imported 7 joint articulated arm
360 treatment without dead angle
and ensure the highest energy output
minimum energy loss during laser
transmission.
- ⬆ Spots no longer appear
- ⬆ 2-10mm adjustable spot size
Different treatment areas are applicable
Energy density is automatically
adjusted with spot size.
- ⬆ The combination different laser pulse
durations ,Provide an optimal method
for shattering all sizes of pigment
particles.

Tedavi Etkisi


Özellikler: 1. Yüksek performans: Ruby lazer sistemi, yüksek enerji çıkışına ve yüksek güç yoğunluğuna sahiptir ve hızlı ve etkili ameliyat ve tedaviye olanak sağlar. 2. Güvenlik: Sistem, lazer ışınının derinliğini ve yoğunluğunu doğru bir şekilde kontrol etmek için gelişmiş lazer teknolojisini kullanır ve çevredeki dokuya verilen zararı en aza indirir. 3. Çok fonksiyonlu: Ruby lazer sistemi, cilt çıkarma, damar hastalığı tedavisi, yara izi onarımı vb. dahil olmak üzere çeşitli ameliyatlara ve tedavilere için kullanılabilir. 4. Yüksek hassasiyet: Sistem, yüksek hassasiyetli lazer ışını konumlandırma ve kontrol fonksiyonlarına sahiptir. Hedef dokuyu doğru bir şekilde işleyebilir, ameliyatın başarı oranını ve tedavi etkisini artırabilir. 5. Taşınabilirlik: Ruby Lazer sistemi, farklı klinik ortamlara uygun, taşınması ve taşınması kolay kompakt tasarımı benimser.

TECHNICAL PRINCIPLE

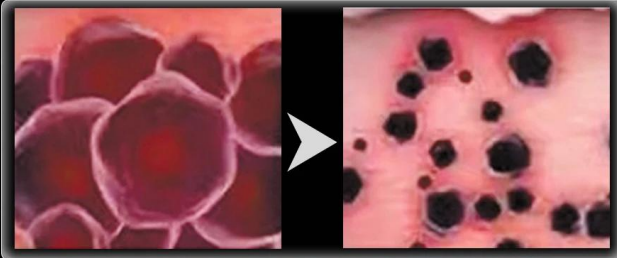

Traditional laser

Traditional nanosecond lasers predominately rely on photothermal action, delivering heat to the pigment and surrounding tissue

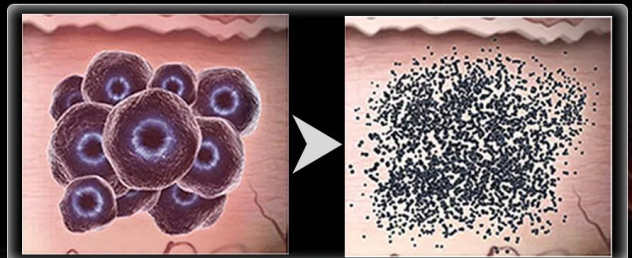

Laser luxe

Laser luxe takes advantage of Pressure Wave Technology to shatter the target ink into tiny particles that are easily

Beyazlatma ve sararma için kullanılan 755 dalga boyu, toz pigmentlerini hızlı bir şekilde giderir ve beyaz cildinizi kolayca onarır. 532 nm pikosaniye lazer, sarı dövmelemlerde ve ardından kırmızı dövmelemlerde en iyi etkiye sahiptir. 1064 nm pikosaniye lazer siyah dövmelemlerde en iyi sonucu verir. 532 Dalgaboyu çiller, kahve lekeleri, foto-yaşlanma lekeleri, sivilce izleri ve kırışıklıklar gibi epidermal lekelerin yanı sıra kırmızı ve sarı dövmelemlerin tedavisinde kullanılır. 1064 kahverengi-siyanmol, Otamol, kloazma, pigmentasyon gibi dermal lekeleri tedavi etmek için kullanılır, sarı, siyah ve mavi dövmelemleri gidermek için beyazlatma ve parlatma, yıkanabilir, akne tedavisinde, gözenekleri küçültmede ve cildi sıkılaştırmada kullanılır, Efekti elde etmek için cilt gençleştirme.

Before & After



Parameters Table

Device Name	Laser luxe
Wavelength	1064nm 755nm 532nm
Screen Size	12 inch 4K Style touch screen
Pulse Duration	~7ns@1064nm ~6.5ns@532nm
Frequency	1-10hz
Spot size	2-10mm adjustable
Energy	1064/1000mj 755/1000mj 532/1000mj
Beam of light transmission	7 articular-arm of light guide transmitting
Indicator of aiming light	650 red diode laser
Cooling	Water cooling+Air cooling
Voltage	AC220V/110V 50HZ/60HZ
Demension of machine	93.6*92.7*39cm
Package	Aluminum box
Warranty	2 years



Cilt Beyazlatıcı Pikosaniye Lazer Q-switched Nd Yag Lazer Dövme Silme Makinesi Aksesuarları: Ayrıca müşterilerimize mükemmel hizmet verebilmek için çeşitli aksesuarlarımız da mevcuttur. Lazer Q-anahtarlı nanosaniye kısa darbe 755 532 1064 vasküler terapi yara izi onarımı pikosaniye lazer dövme silme makinesi





You'll get

Six value-added services

One-stop after-sales solution



2 years machine
warranty
1 year for handle



Free enterprise
training



Test **videos** and
pictures
about the machine



A professional
training service
training files
training videos



Customized logos,
posters and promotional
videos, put the logo on
screen system



Parcel **tracking service**
Help to do
Customs clearance

Servisten sonra:

*Müşterilerimizle aramızdaki uzun mesafeyi göz önünde bulundurarak, müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için, *Firmamız profesyonel bir servis sonrası teknoloji ekibi kurmuştur.

*Teknisyenimiz herhangi bir makine sorununa zamanında çözüm sağlayacak ve belgeleri 24 saat içinde sizin için hazırlayacaktır.

*Ayrıca bizimle telefon, internet vb. yoluyla da iletişime geçebilirsiniz.

***Daha fazla ürün bilgisi ve güzellik bilgisi öğrenin, bize danışmaktan memnuniyet duyarız!
7*24 saat çevrimiçi hizmet!***