

Sıcak satış tıbbi fraksiyonel co2 lazer fda onaylı fraksiyonel co2 lazer ekipmanı



1, tıbbi taşınabilir fraksiyonel co2 lazer uygulaması:

- 1) Akne, sivilce yara izi, yara izi vb.
- 2) göz çevresindeki kırışıklığı, karga ayaklarını ve su eksikliğinden oluşan kırışıklığı giderin;
- 3) Yüz, alın, eklemeler ve stria gravidarumdaki kırışıklığı etkili bir şekilde azaltın;
- 4) Hiperkromik patolojik değişikliklerle oluşan çil, nevus zygomaticus ve diğer lekeleri giderin;
- 5) Cildi sıkın ve yüzü kaldırın;
- 6) stria gravidarum ve diğer derin yara izlerini çıkarın
- 7) tüm renkleri dövme kaldır
- 8) kemik kesmek
- 9)vajinal sıkma fonksiyonu isteğe bağlı

TREATMENT EFFECT T



before treatment



during treatment



after treatment



after 30days

Acne Scars



Hypertrophic Scars



Chicken Pox Scars



Burn Scars



Surgery Scars



Accident Scars



RF treatment effect




2, tıbbi taşınabilir fraksiyonel co2 lazerin tedavi derinliği:

Fraksiyonel CO2 lazer tedavisi 50-2000µm ayarlanabilir, Max 2 mm'dir. Çünkü 10600µm kızılötesi ışık

dalga boyu elastik lifleri 2 mm derinlikte değiştirecektir, bu nedenle fraksiyonel CO2 lazer sorunu çözmek için 2 mm derinliği kontrol eder.

Fotoğraflanmış cilt sorunu

WORKING PRINCIPLE

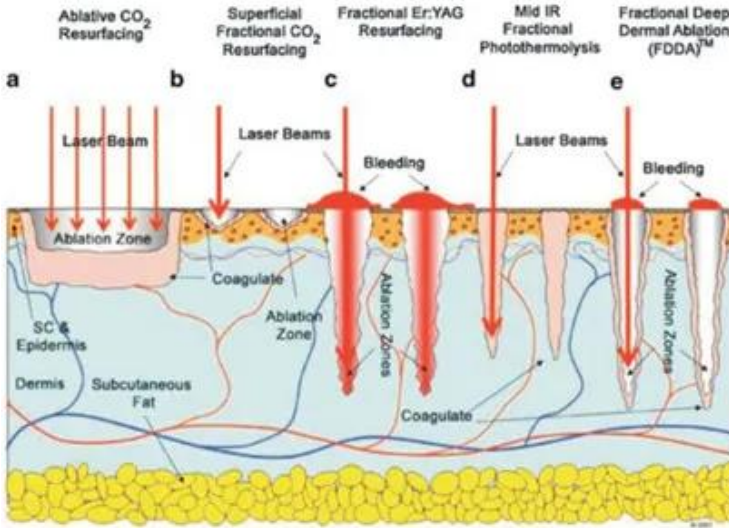

The CO₂ laser uses a unique head piece which tracks the CO₂ 10.6 μ m wavelength light as it passes light through its optical lens to penetrate the skin. We can control the depth of the penetration from only a few micrometers in depth (only as deep as a few sheets of paper) to much deeper with tiny thermal channels. This will also determine the length of healing, the number of treatments and the cost. Each thermal channel creates a small micro-injury but does not significantly disturb or disrupt the surrounding tissue.


These microscopic injuries caused by the laser (around 15-20% of the treated area) are the beginning of the healing process. By creating thousands of these perforations underneath the skin, your epidermis layer starts to heal from the edge of these microscopic perforations very quickly. By healing so fast it remodels, tightens and stimulates the collagen, your skin tightens, which in turn smooths out lines, and significantly improves your skin's tone and complexion.



3, Kadın tıbbi taşınabilir fraksiyonel CO₂ lazerin özel tedavisi --- vajinal sıkma ve gençleştirme.



Use an articulate arm probe with automatically 360° rotation technology, producing in 50-70° C at a controlled depth inside the vaginal mucosa - stimulates collagen contraction, restructuring and regeneration; promotes collagen fiber proliferating, remodeling; improves vaginal mucosa microcirculation; increases cell secretion and dynamic reaction function; corrects PH value of vaginal inside;

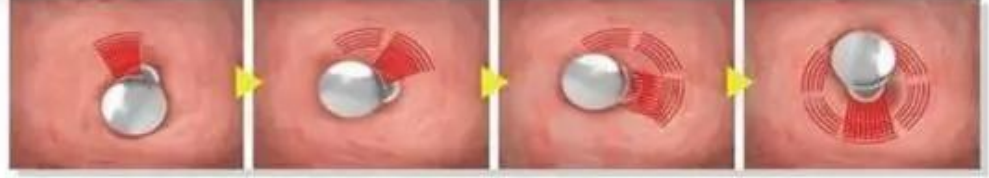

Therapeutic schemes

Improves the inside environment; achieve female private parts to significant lasting firming, nourishing and restoring harmonious sexual life. The laser has a photo thermal heating effect on collagen in both the vaginal walls and the urethra which causes restructuring and regrowth of the collagen. This results in thickening and tightening of the vaginal walls and urethra to improve atrophy and prevent urine loss.

4, tıbbi taşınabilir fraksiyonel co2 lazerin Makine Detayları:



German import scanning head

• Longer life span

Imported scanning heads generally use for 3 - 5 years, with low failure rate, more accurate scanning and long service life.

• Strong energy, more accurate

Strong energy, uniform light emission, more accurate scanning, lower failure rate and long service life.

• Scanning accuracy

The scanning rate of import is more accurate



Section 7 light guide arm

• counter weight

Light guide arm adopts counter weight design, which makes it more flexible to use and convenient to operate.

• Aluminium material

The light guide arm is made of high-grade aluminum, which has high stability and is lighter.

• Tri - color optional

Equipped with silver, red and blue light guide arms, it can meet different preferences of customers.

Five therapeutic heads

Equipped with scanning head * 1 / cutting head * 1 / private head * 3

• Scanning head efficacy

Tender skin/shrink pores/remove striae gravidarum and chloasma

• Cutting head efficacy

Removing sarcoma / nevus

• Efficacy of private head

Tighten vagina / tender vulva / tender vulva




• Trachea

When working, gas is sprayed out, which has the functions of cooling, cooling and dust removal.




Adjustable dot shape and size

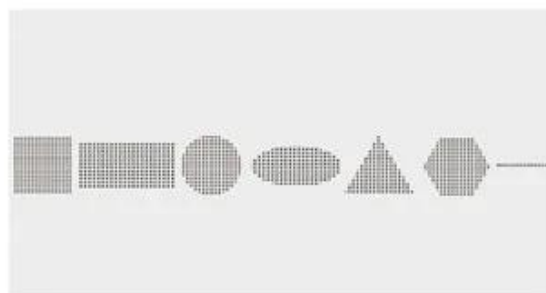

Shape display

Taşıyabilir co2 fraksiyonel lazer makinesinin 5, 8.4 inç gerçek renkli dokunmatik ekranı:

SCREEN IMAGE

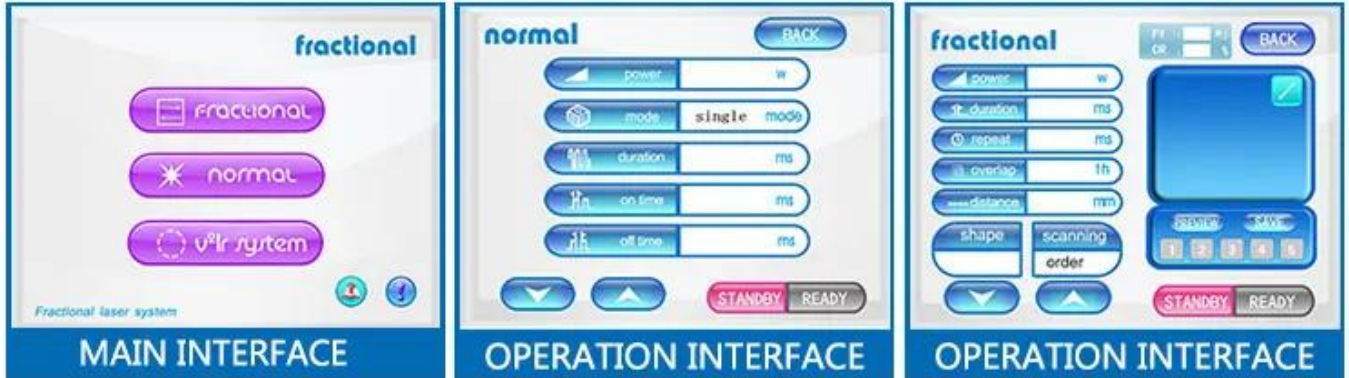

Temel bilgiler	dalga boyu	10.6µm, uzak kızılötesi lazer
	darbeli radyofrekans	0,530W
	Ultra-darbe	1. Maksimum güç: 120W 2. Darbe genişliği: 200 ila 500µs isteğe bağlıdır
	Nabız	Ortalama güç: 1-30W
matris modu	Grafikleri Tara	Kare, dikdörtgen, yuvarlak veya özelleştirilmiş grafikler
	nokta miktarı	en fazla 400 nokta
	çalışma durumu	ultra darbeli mod
	Tarama modu	Sıralı tarama veya Rastgele tarama
	darbe enerjisi	Her nokta için 1mj ila 100mj isteğe bağlıdır.
Teknik Şartname	lazer aparatı	Doğru akımla uyarılan kapalı lazer cihazı
	Kondenser odak	f=50mm
	Işın sapma açısı	0,3 mrad
	nokta boyutu	0,5-20 mm ayarlanabilir
	Radyasyon süresi / Aralık süresi	0.01 1 sn
	Hedefleme ışını	2mW'den az, 635nm kırmızı yarı iletken lazer
	Işın taşıma cihazı	Altı segmentli mafsallı kol ve denge ağırlığı

hizmetlerimiz

1) garanti

Müşterilere 2 yıl garanti veriyoruz. Ömür boyu ücretsiz bakım.

2) Eğitim

Müşterilerimize profesyonel eğitim sunuyoruz, her müşterinin profesyonel operasyon bilgisine sahip olmasını sağlıyoruz.

doğrudan eğitim veya çevrimiçi eğitim için zaman, DVD. Hiçbir ücret ödemedenden, ücretsiz!

3) Profesyonel OEM ve ODM Hizmeti

Çin'de profesyonel bir güzellik makinesi üreticisi olduğumuz için, her distribütöre ve bayiye OEM/ODM sunabiliriz.

Herhangi bir tasarım ücreti olmadan hizmet, müşterimizden herhangi bir tavsiye sıcak bir karşılama!

4) Ücretsiz logo, language, renk tasarımı

Logonuzu makine ekranına ücretsiz olarak ekleyebiliriz.

Language'inizi ekranda ücretsiz olarak tasarlayabiliriz.

Makine için istediğiniz rengi seçebilirsiniz.

5) Teslimat

Makineyi 3 gün içinde teslim edeceğiz.

Malları dünyanın her yerine teslim edebiliriz. DHL kapıdan kapıya 3 ~ 5 gün sürer.

Paketleme ve Nakliye

Teslimat süresi	Ödedikten sonra 3-5 iş günü
Teslimat Yöntemi	DHL UPS TNT gibi hava yoluyla kapıdan kapıya hizmet sunun.
Paketleme	Köpüklü güçlü alüminyum kutu

ABOUT SHIPPING

3-5 businessdays delivery

support air cargo & sea cargo as your option !



-- Ürettiğimiz güzellik makineleri

808nm Diyet Lazer (altın kalay sinterleme lazer çubuğu, TEC kondenser, İtalya ithal lamba kullanın)

CO2 Fraksiyonel lazer (40W RF, ithal tarama kafası)

980 Diyet Lazer (özel damar çıkarma)

Elight/IPL (7 filtre, 15*50mm büyük spot boyutu)

nd yag lazer (ithal lazer çubuğu, 5 tedavi başlığı)

pikosaniye lazer (Altı tedavi başlığı)

KavitasyonVakumRF (Tripolar RF, Monopolar RF, Bipolar RF)

SHR (süper epilasyon)

Certificat e



BV-France's most authoritative certification body BV Group certification



TUV-Germany's most authoritative certification body Rheinland certification



SGS-Switzerland's most authoritative certification body SGS certification




Italy ECM Certification



ISO 13485

NQA medical system certification

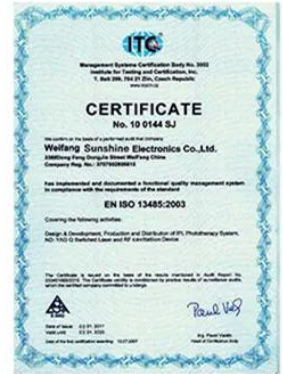

SSS

1. Güvenilir bir firma mı?

Weifang Mingliang Development Co., Ltd. 2005 yılında kurulmuş olup, Ar-Ge, satış ve satış sonrası hizmetler ile uğraşmaktadır.

estetik cihazlar ve tıbbi lazer ekipmanları, hatta BT alanı ve Emlak sektörünün bir parçası. bir profesyonelimiz var

optik, makine, elektrik ve tıp ile bütünleşen ekip, bizi bu alanda önde tutmak için. fabrika kapakları

5000M2 ve 100'den fazla çalışanı var.

2: Teslimat ne olacak?

Sadece gerçek isteğinize bağlı olarak, hava veya deniz yoluyla kapıdan kapıya hizmetler sunabiliriz. DHL, UPS, TNT gibi,

FEDEX... hava yoluyla; ve deniz taşımacılığı.

3: Teslim süresi nedir?

3-5 iş günü. Büyük stok.

4: Ne paketi?

Güçlü ve güzel alüminyum alaşımlı kasa/karton kutu/tahta sandık.

5: Herhangi bir zamanında teknoloji desteğiniz var mı?

Zamanında hizmetleriniz için profesyonel bir teknoloji destek ekibimiz var. Teknik belgeleri hazırlıyoruz

Sizin için ayrıca telefon, web kamerası, çevrimiçi sohbet (googletalk, MSN, skype, yahoo...) ile bizimle iletişime geçebilirsiniz.

6: Ödeme yöntemi nedir?

T/T, WESTERN UNION, EMANET vb.

7: Sevkiyat sırasında makineler kırılırsa bize destek olur musunuz?

Genellikle müşterimiz sigortayı sevkiyattan önce satın alacak, zorlu nakliyeden kaynaklanan para kaybını önleyecektir.

Paranızı zamanında geri almak için sigorta şirketleri ile tazminat taleplerinizi çözmenize yardımcı olacağız.